

頭部

1000 頭部 CT 単純


1001 頭部 CT 造影

1002 頭部 CT 単純+造影

1003 頭部 CT 単純(急性期脳梗塞)

範囲) 後頭蓋窩下縁から頭蓋骨内板上縁まで

* 内板上縁に正確に合わせられない場合は、頭側に数スライスの余剰は可

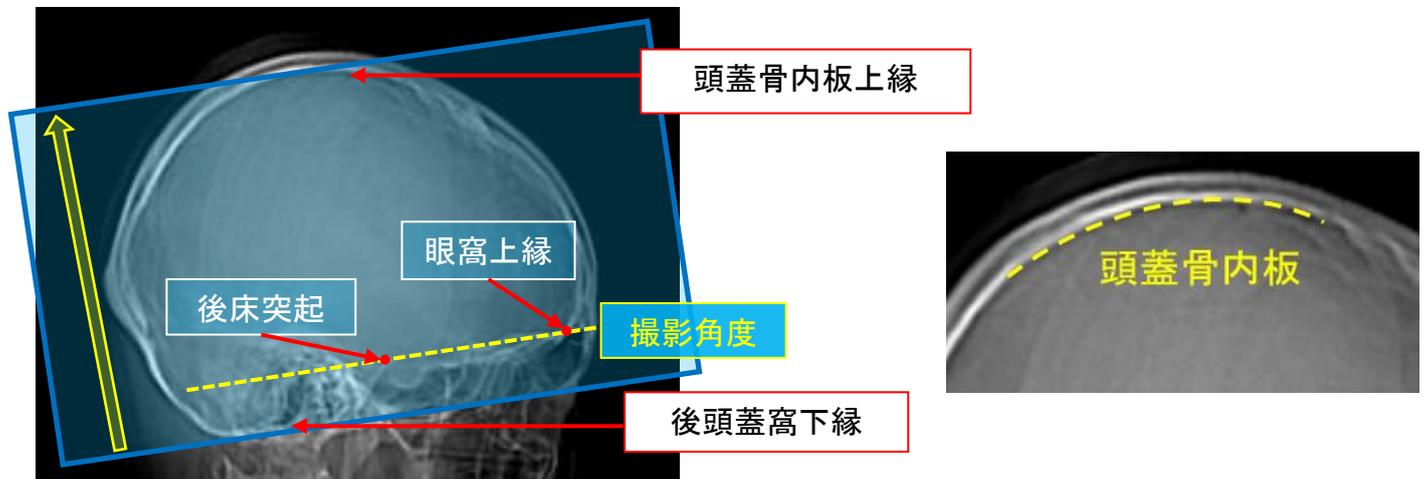


1004 頭部 CT 単純(脳室サイズ)

範囲) 後頭蓋窩下縁から頭蓋骨内板上縁まで

* 内板上縁に正確に合わせられない場合は、頭側に数スライスの余剰は可


基準面) 前頭蓋窩下縁と後頭蓋窩下縁を結んだ線(眼窩を避けるため)

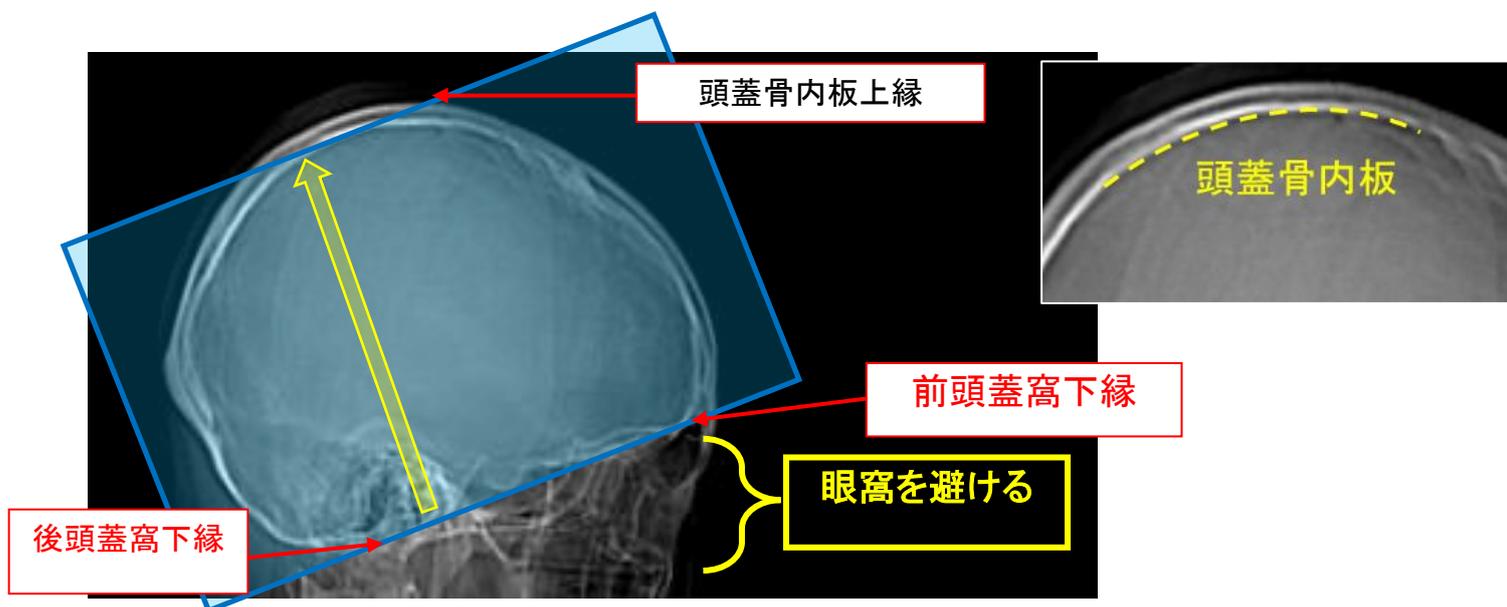

- 1010 頭部多断面 CT 単純
- 1011 頭部多断面 CT 造影
- 1012 頭部多断面 CT 単純+造影
- 1013 頭部多断面 CT 単純(急性期脳梗塞)


範囲) 後頭蓋窩下縁から頭蓋骨内板上縁まで

* 頭蓋骨の検査(3D 作成など)も兼ねている場合は、頭蓋骨外板まで

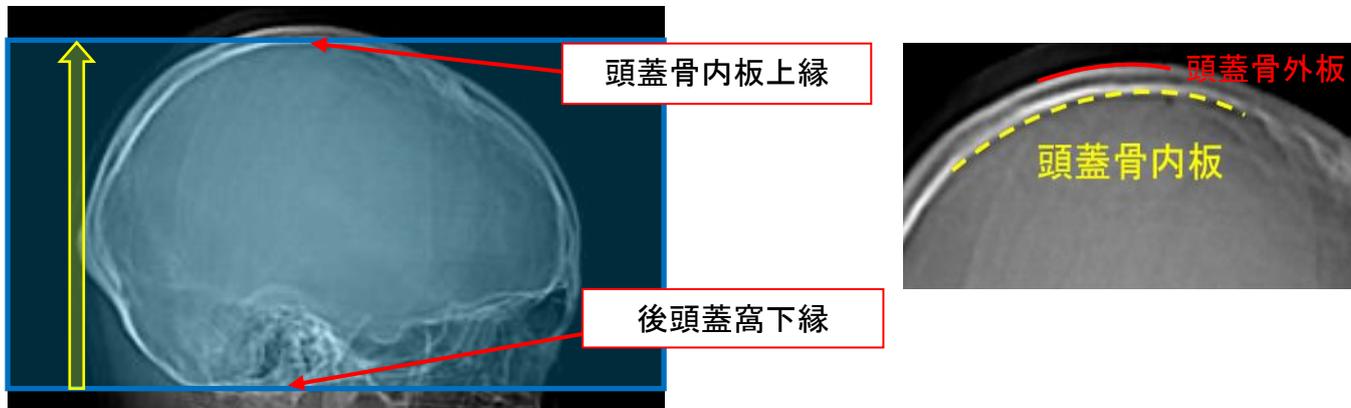


1020 頭蓋骨 CT 単純

範囲) 後頭蓋窩下縁から頭蓋骨外板まで

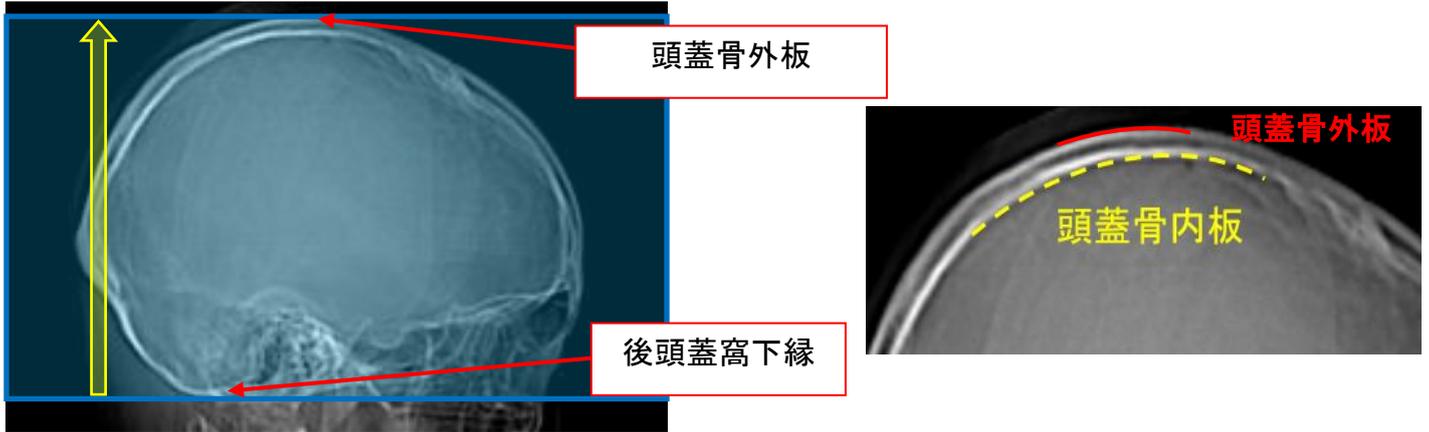


- 1030 下垂体 CT 単純
- 1031 下垂体 CT 造影
- 1032 下垂体 CT 単純+造影

範囲) 後床突起 4cm 頭側から歯列下縁まで

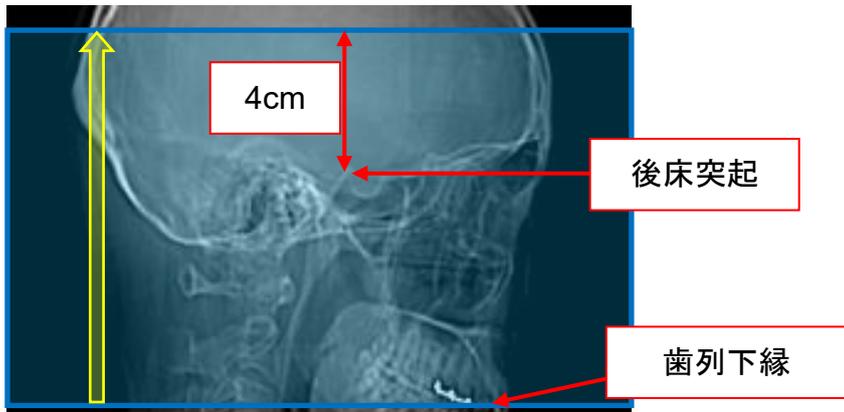

* 歯が無い場合は、硬口蓋下縁 1cm 尾側から

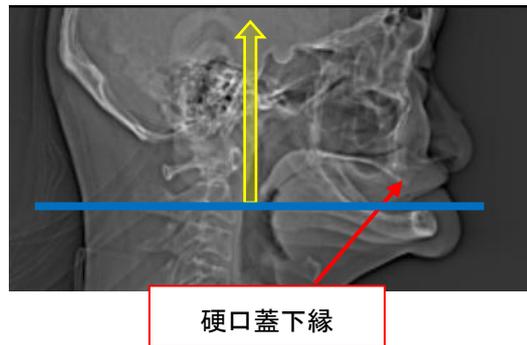


1100 頭部 CTA

範囲) 後頭蓋窩下縁から 10 cm 頭側まで

* 原則 OM line と撮影スライス面を水平にポジショニング。

* ポジショニングが困難な場合は、リーダー技師等に疑義照会を行う。

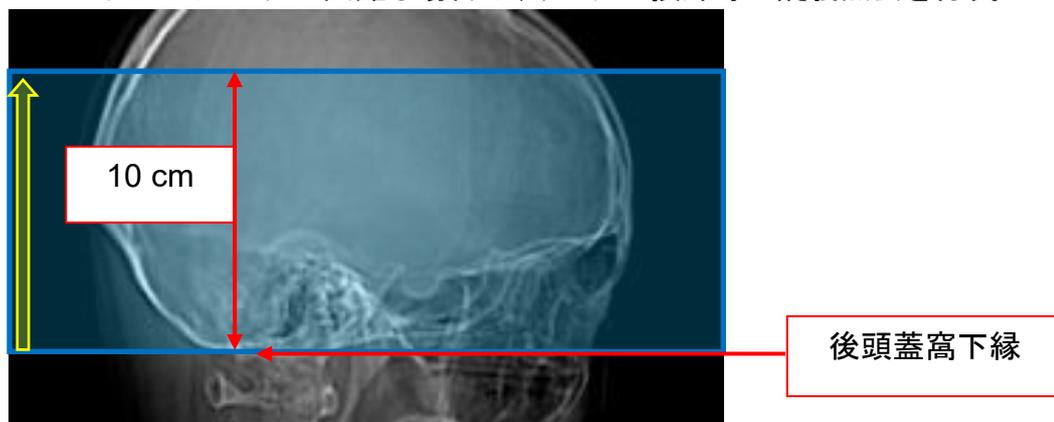


1101 頭部単純+CTA

範囲)

①単純: 後頭蓋窩下縁から頭蓋骨内板上縁まで


* 内板上縁に正確に合わせられない場合は、頭側に数スライスの余剰は可

* OM line と撮影スライス面を水平にポジショニングだが、困難時は、リーダー相談

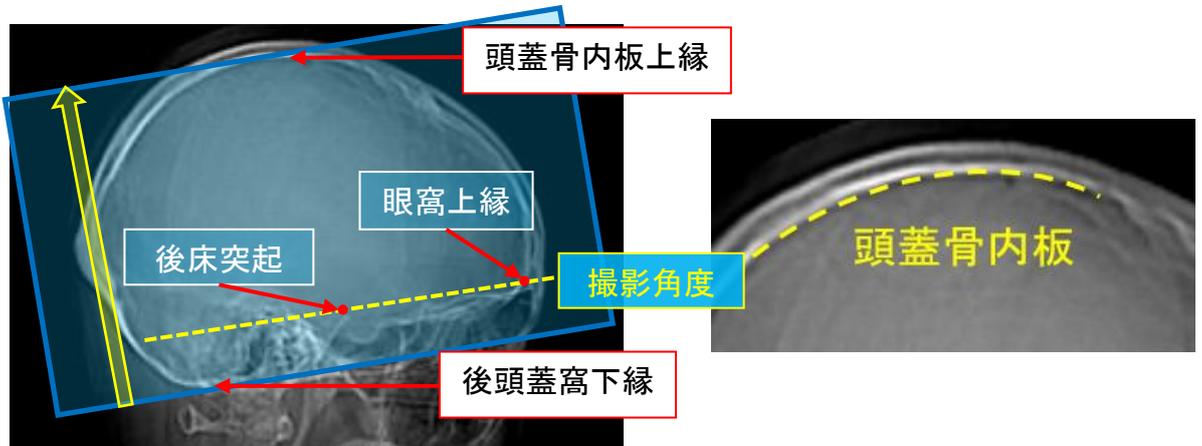

②動脈相: 後頭蓋窩下縁から 10 cm 頭側まで

* OM line と撮影スライス面を水平にポジショニング

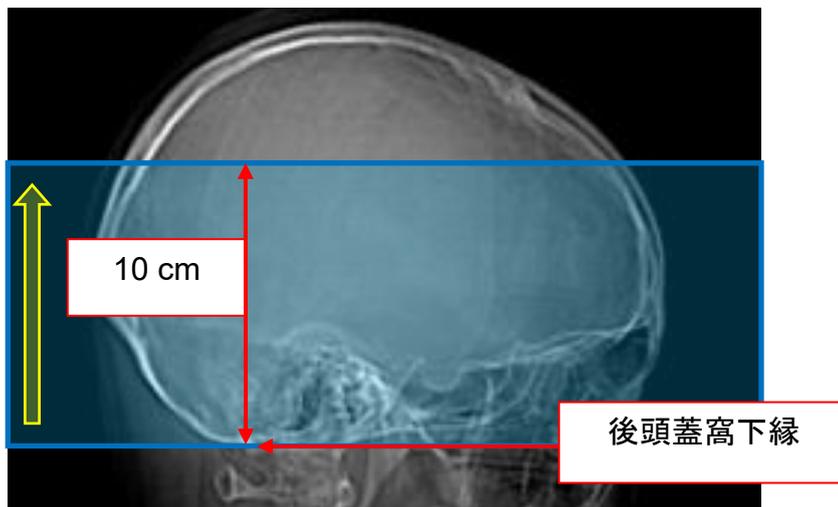

1102 頭部 CTA+CTV


1102 頭部 CTA+CTV

範囲)


①動脈相: 後頭蓋窩下縁から 10 cm 頭側まで

* OM line と撮影スライス面を水平にポジショニング

ポジショニングが困難な場合は、リーダー技師等に疑義照会を行う。

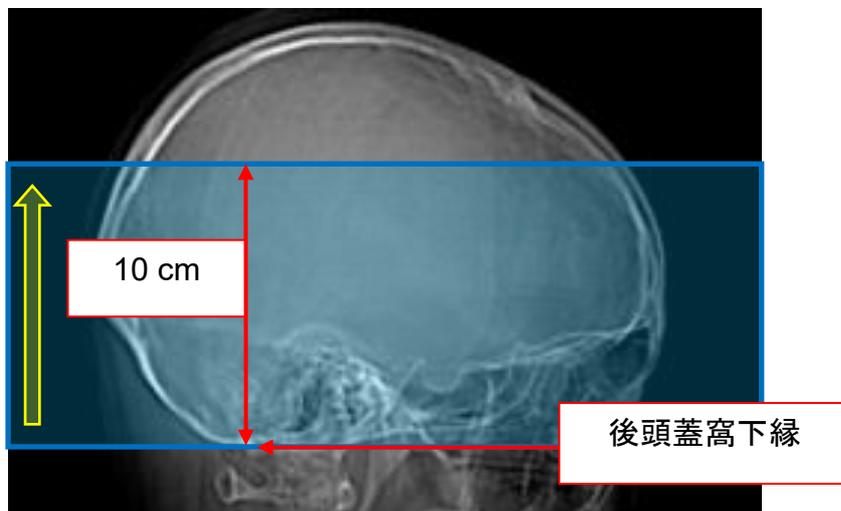

②静脈相: 後頭蓋窩下縁から頭蓋骨内板上縁まで

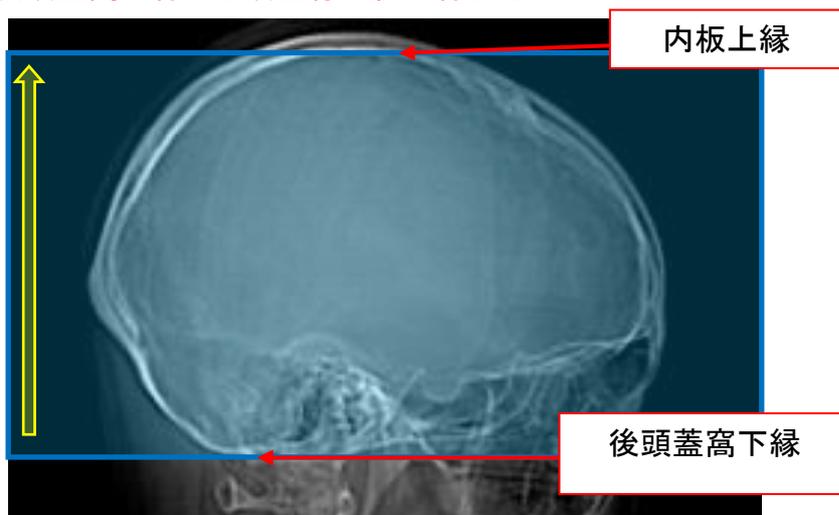


1103 頭部 CTA+CTV+単純


範囲)

①単純: 後頭蓋窩下縁から内板上縁まで

* OM line と撮影スライス面を水平にポジショニング

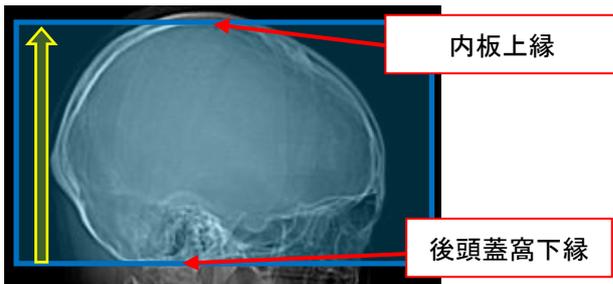


「鼻下縁から」or「顔水平」の参考画像

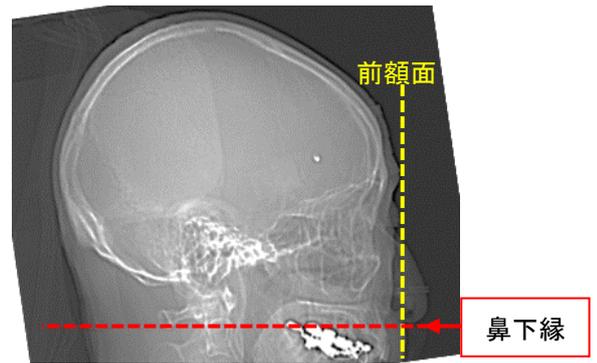


②動脈相: 後頭蓋窩下縁から 10 cm 頭側まで

* OM line と撮影スライス面を水平にポジショニング * ポジショニングが困難な場合は、リーダー等に相談

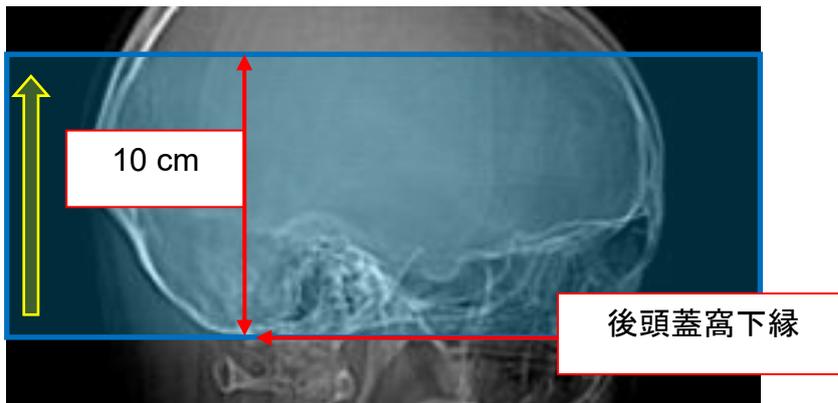

③静脈相: 後頭蓋窩下縁から内板上縁まで

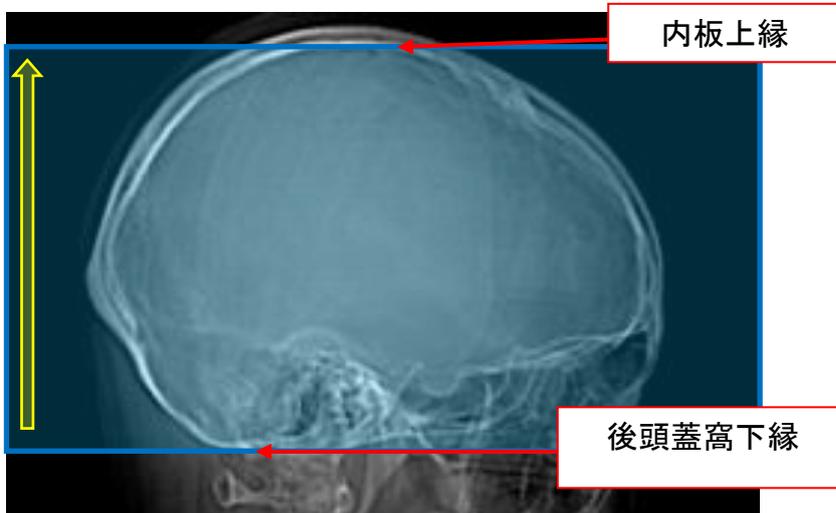


1104 頭部 CTA+CTV+造影


範囲)

①動脈相: 後頭蓋窩下縁から 10 cm 頭側まで


* OM line と撮影スライス面を水平にポジショニング
ポジショニングが困難な場合は、リーダー等に相談

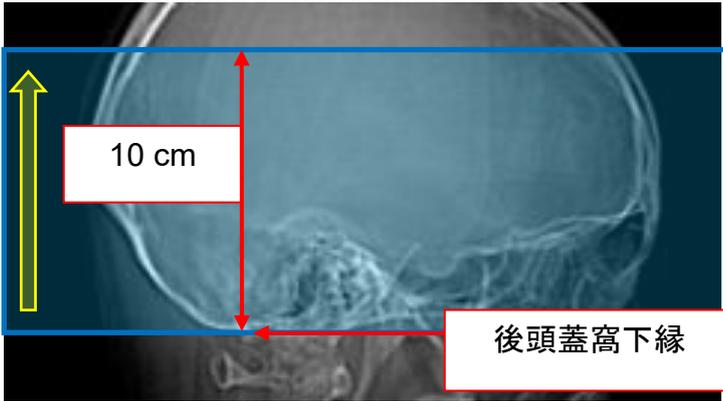


「鼻下縁から」or「顔水平」の参考画像

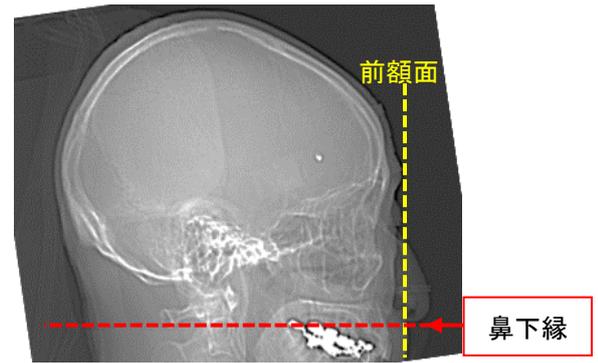

②静脈相: 後頭蓋窩下縁から内板上縁まで

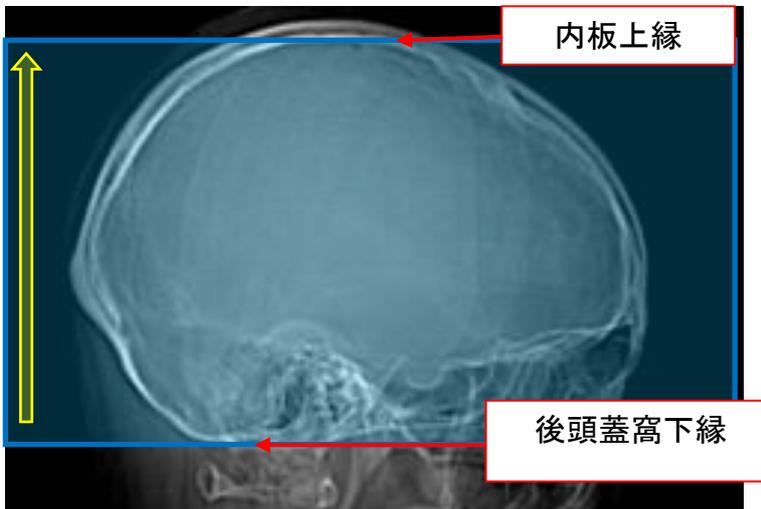

③遅延相: 後頭蓋窩下縁から内板上縁まで

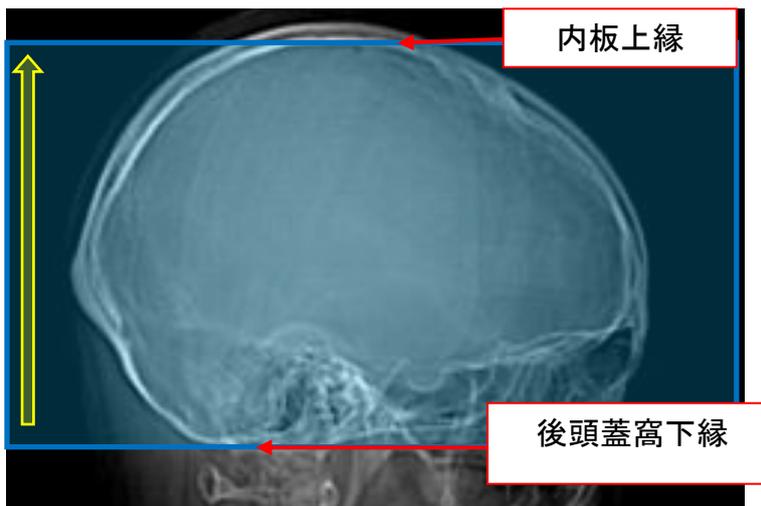


1105 頭部 CT-Perfusion


範囲)

①**単純**: 後頭蓋窩下縁から頭蓋骨内板上縁まで

* 内板上縁に正確に合わせられない場合は、頭側に数スライスの余剰は可

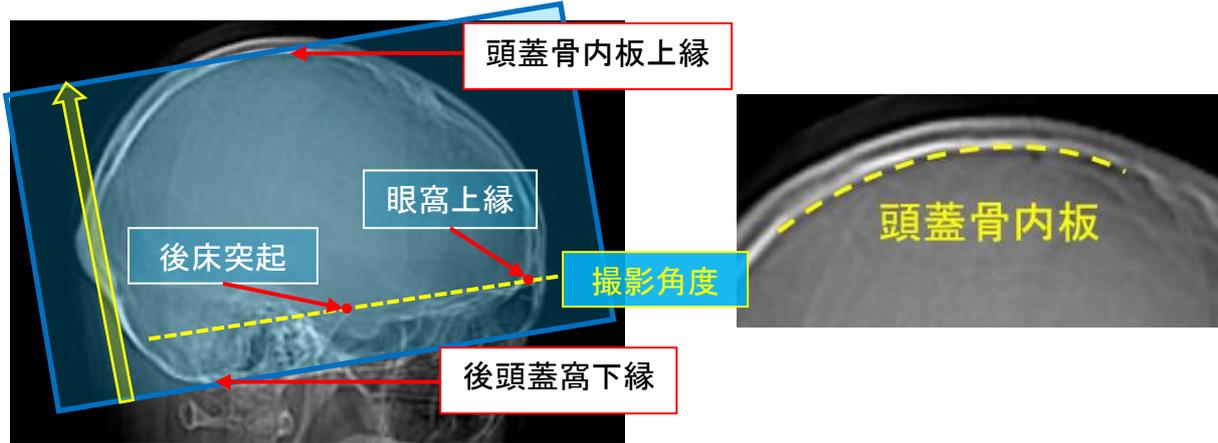

②**CTP**: 単純画像から依頼医と決定

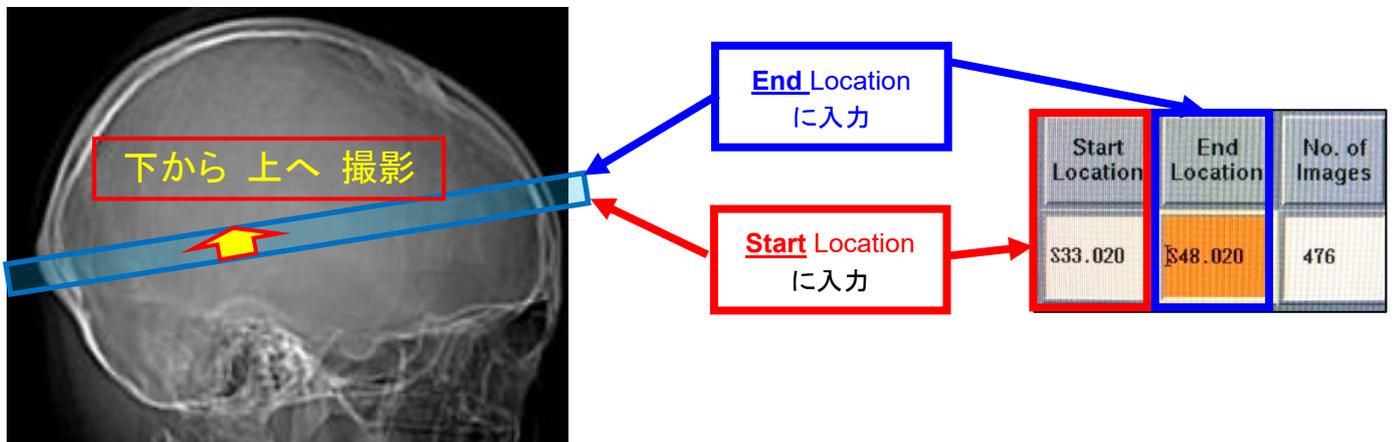


1106 頭部 CTA+Perfusion


範囲)

①単純: 後頭蓋窩下縁から頭蓋骨内板上縁まで

* 内板上縁に正確に合わせられない場合は、頭側に数スライスの余剰は可

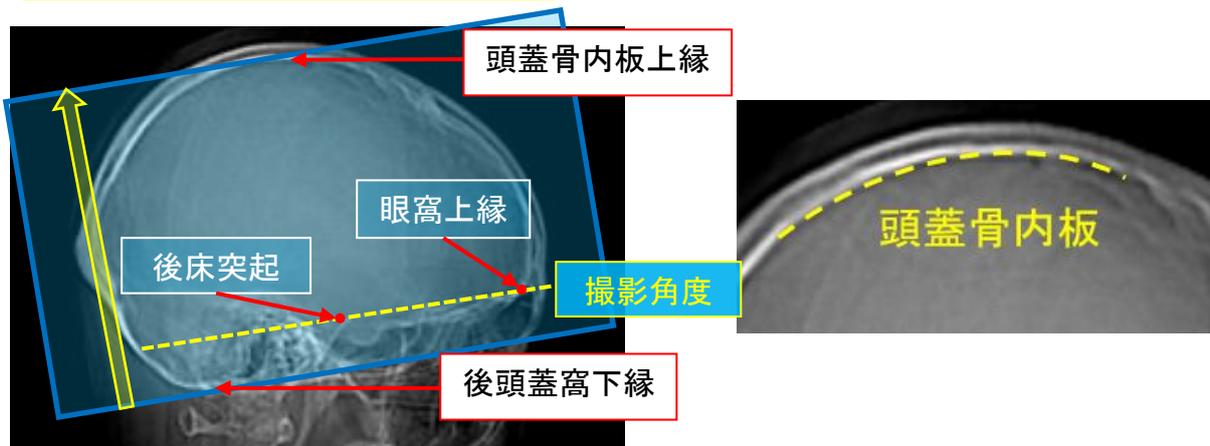


②CTP: 単純画像から依頼医と決定

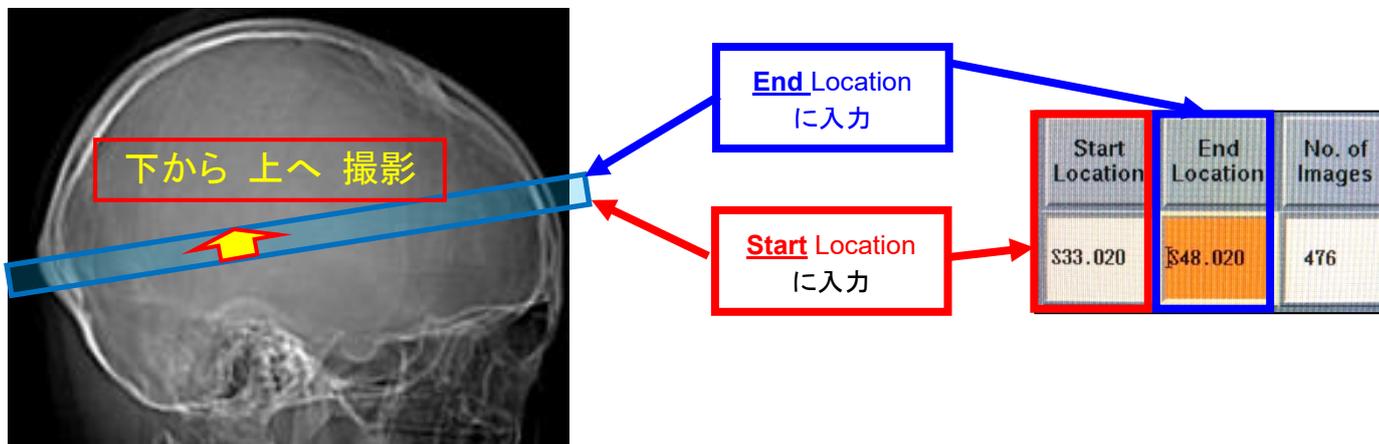

③動脈相: 後頭蓋窩下縁から 10 cm 頭側まで


* OM line と撮影スライス面を水平にポジショニング
ポジショニングが困難な場合は、リーダー等に相談する

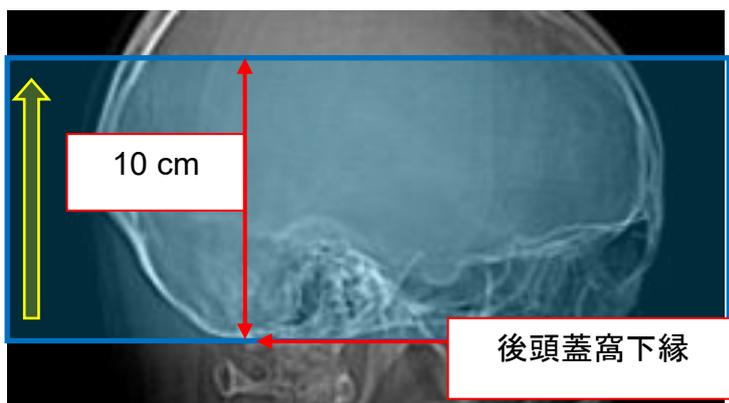


1107 頭部 CTA+CTV+単純+造影

範囲)

- ①単純: 後頭蓋窩下縁から内板上縁まで
* OM line と撮影スライス面を水平にポジショニング

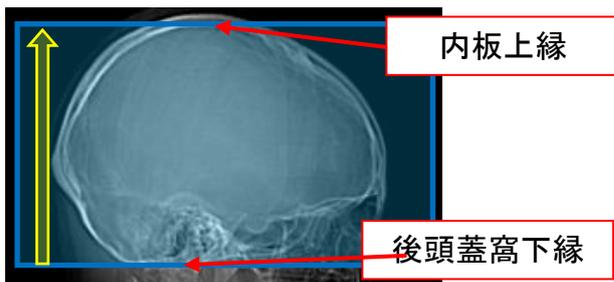


「鼻下縁から」or「顔水平」の参考画像

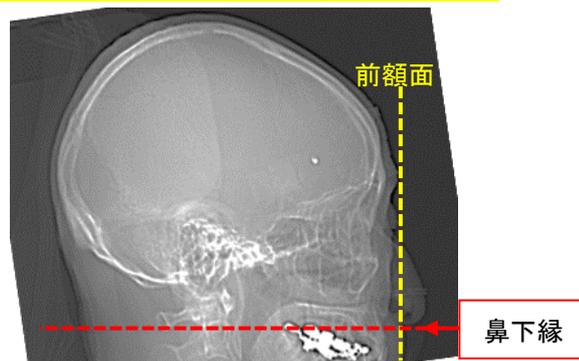


- ②動脈相: 後頭蓋窩下縁から 10 cm 頭側まで


* OM line と撮影スライス面を水平にポジショニング * ポジショニングが困難な場合は、リーダー等に相談

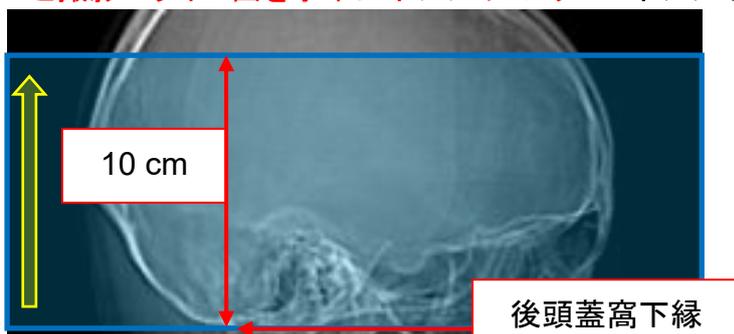

- ③静脈相: 後頭蓋窩下縁から内板上縁まで

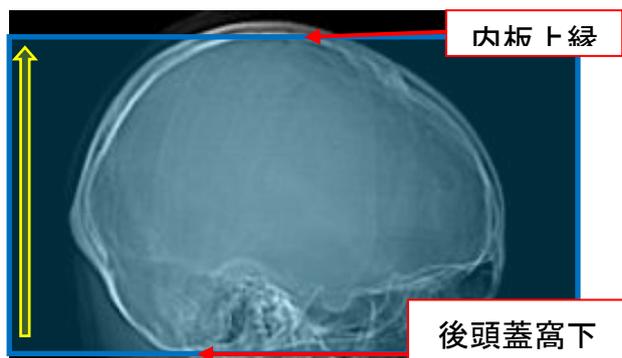


- ④遅延相: 後頭蓋窩下縁から内板上縁まで

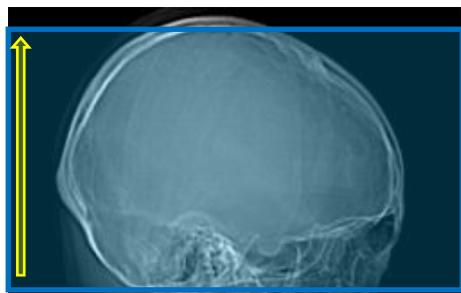

1200 脳槽脳室 CT


範囲) 後頭蓋窩下縁から頭蓋骨内板上縁まで

* 内板上縁に正確に合わせられない場合は、頭側に数スライスの余剰は可

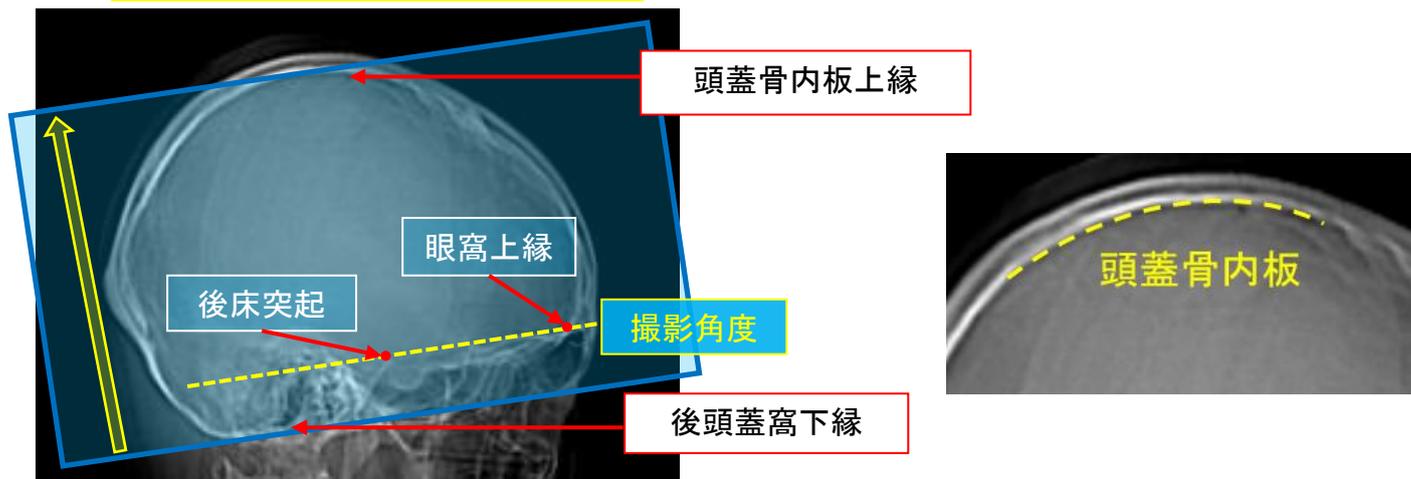

1500 全身筋 CT 単純

範囲) 上腕、前腕、臀部、大腿、下腿を各部位 2 力所撮像

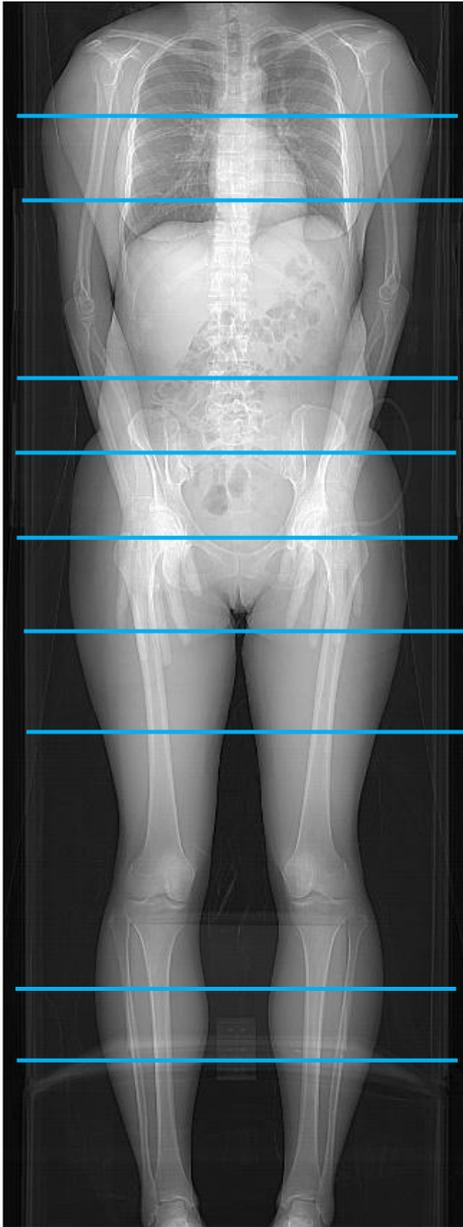

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦


⑧

⑨

頭頸部

2000 顔面骨 CT 単純


範囲) 眼窩上縁 1 cm 頭側から下顎骨下縁 1 cm 尾側まで

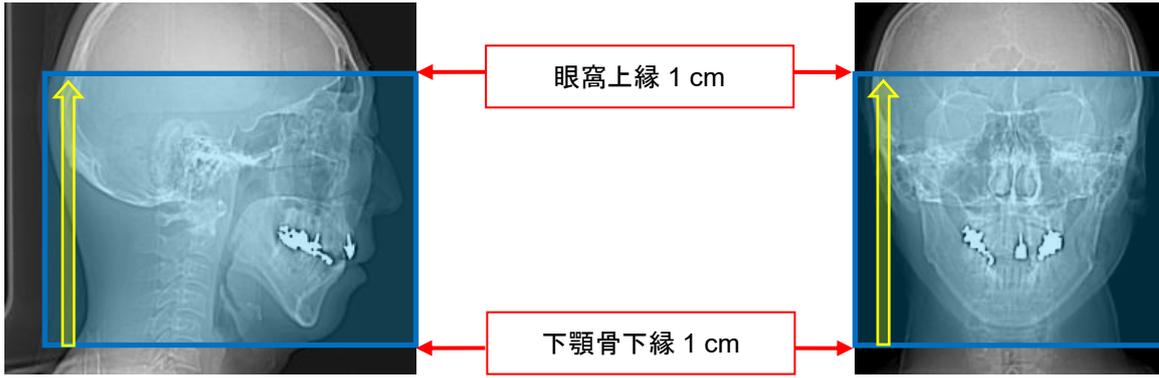


2001 顔面骨 CT 単純(低線量)

*** 撮影範囲が 2 通りあることに注意**

範囲) **顔面骨**の場合: 眼窩上縁 1 cm 頭側から下顎骨下縁 1 cm 尾側まで

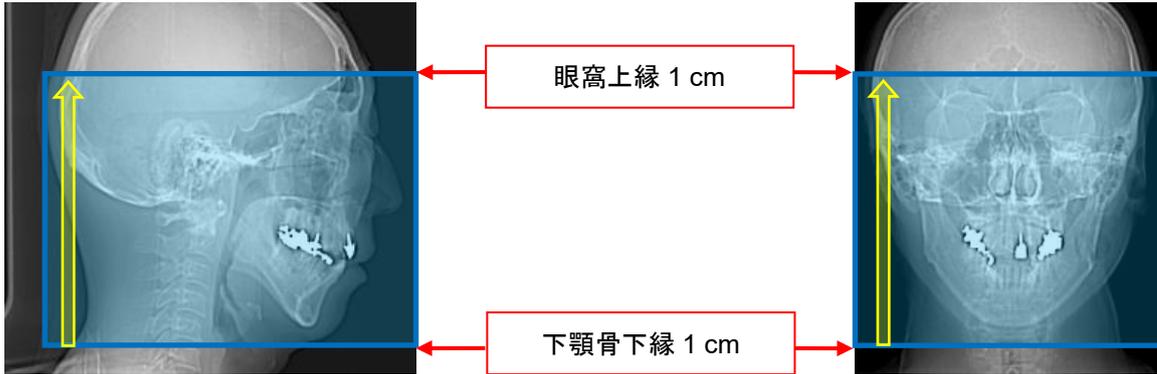


範囲) **下顎骨**の場合: 錐体上縁から下顎骨下縁 1 cm 尾側まで

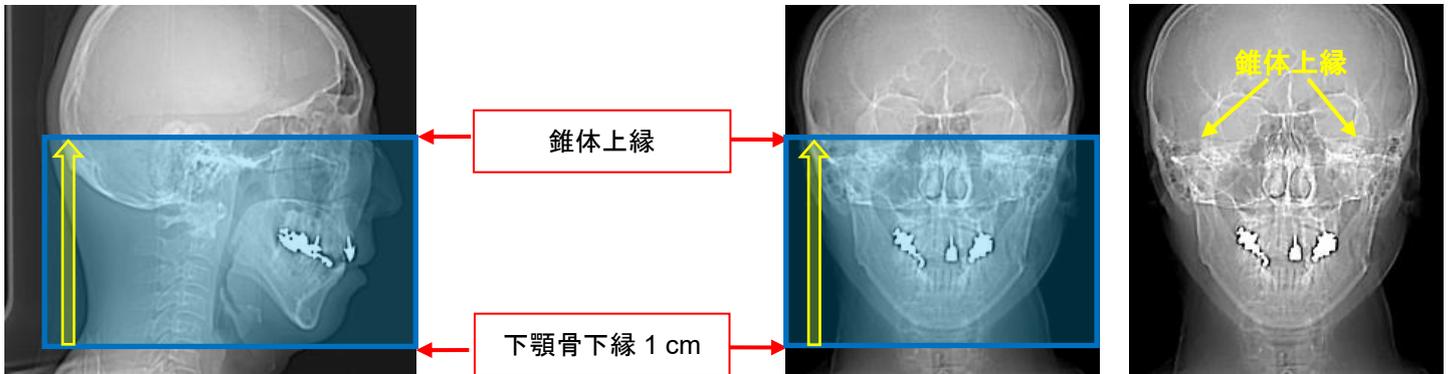


2010 鼻骨 CT 単純

範囲) 眼窩上縁 1 cm 頭側から歯列下縁まで

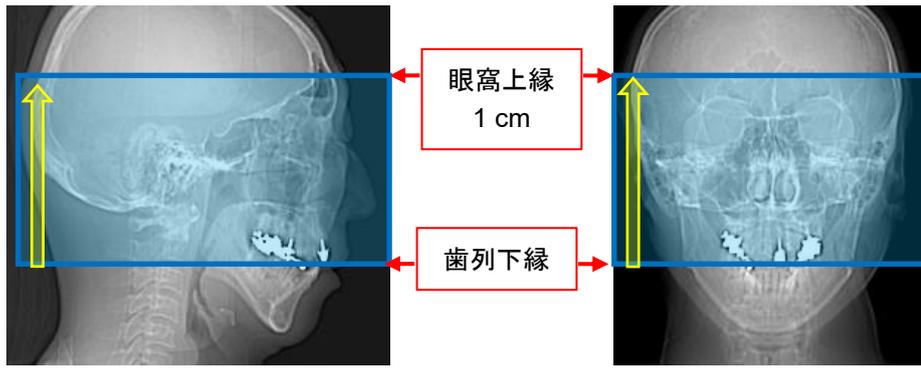

* 歯が無い場合の撮影範囲下縁は、
硬口蓋下縁 1cm 尾側まで

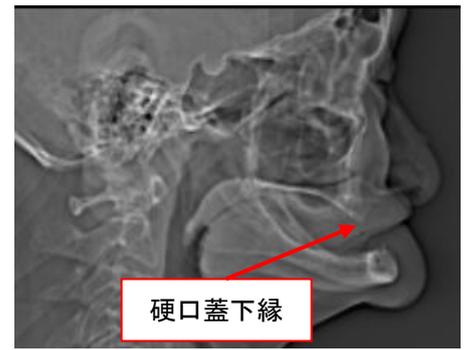

2020 眼窩 CT 単純



2021 眼窩 CT 造影

2022 眼窩 CT 単純+造影

範囲)

①単純・②造影: 眼窩上縁 1 cm 頭側から歯列下縁まで


* 歯が無い場合の撮影範囲下縁は、
硬口蓋下縁 1cm 尾側まで

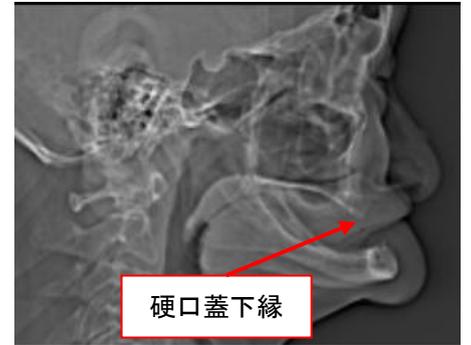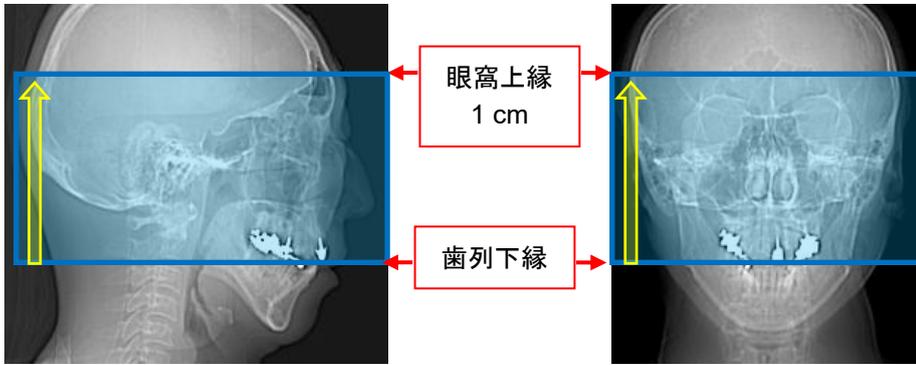


2030 副鼻腔 CT 単純

2031 副鼻腔 CT 造影

範囲) 前頭洞上縁 1 cm 頭側から歯列下縁まで

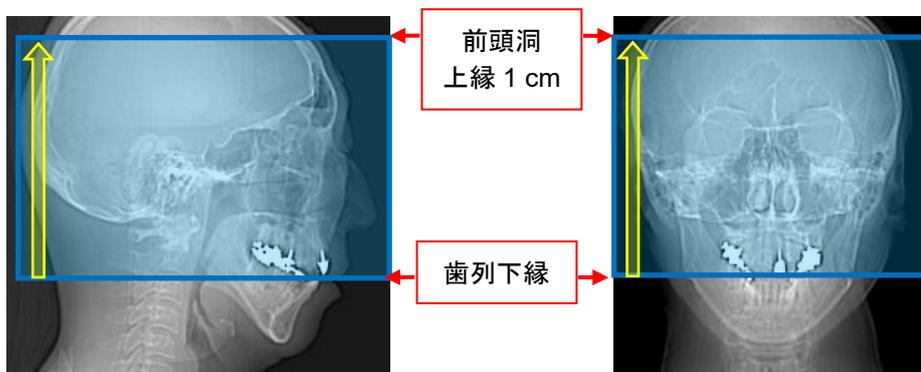


* 歯が無い場合の撮影範囲下縁は、
硬口蓋下縁 1cm 尾側まで

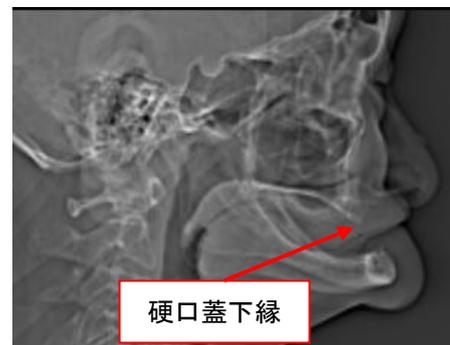


2040 側頭骨 CT 単純

2041 側頭骨 CT 造影

範囲) 錐体上縁 1cm 頭側から乳突蜂巢下縁まで

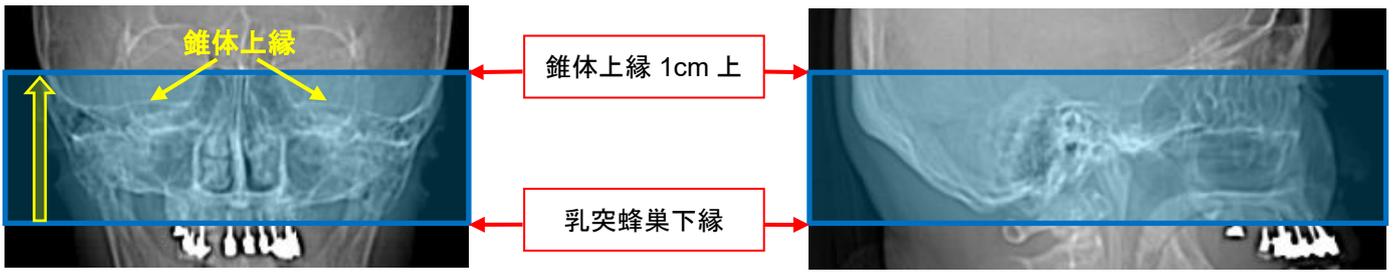

拡大再構成)

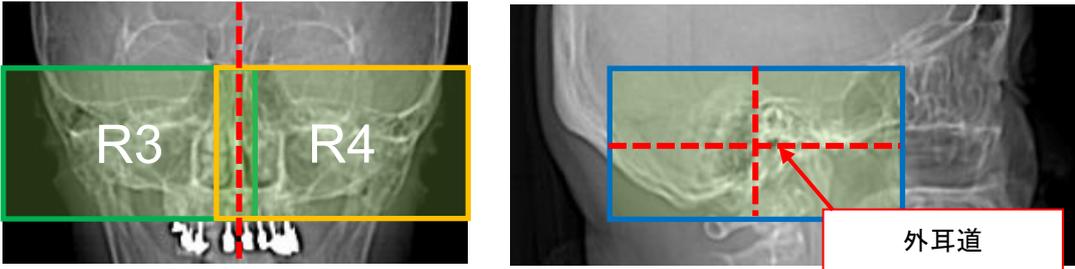


2100 頸部 CT 単純

2101 頸部 CT 造影

範囲) 上咽頭上縁から胸鎖関節下端まで

* 嚥声精査の場合、気管分岐部 2 cm 尾側まで


* 嗅神経芽細胞腫の場合、前頭蓋底上縁 1 cm 頭側から

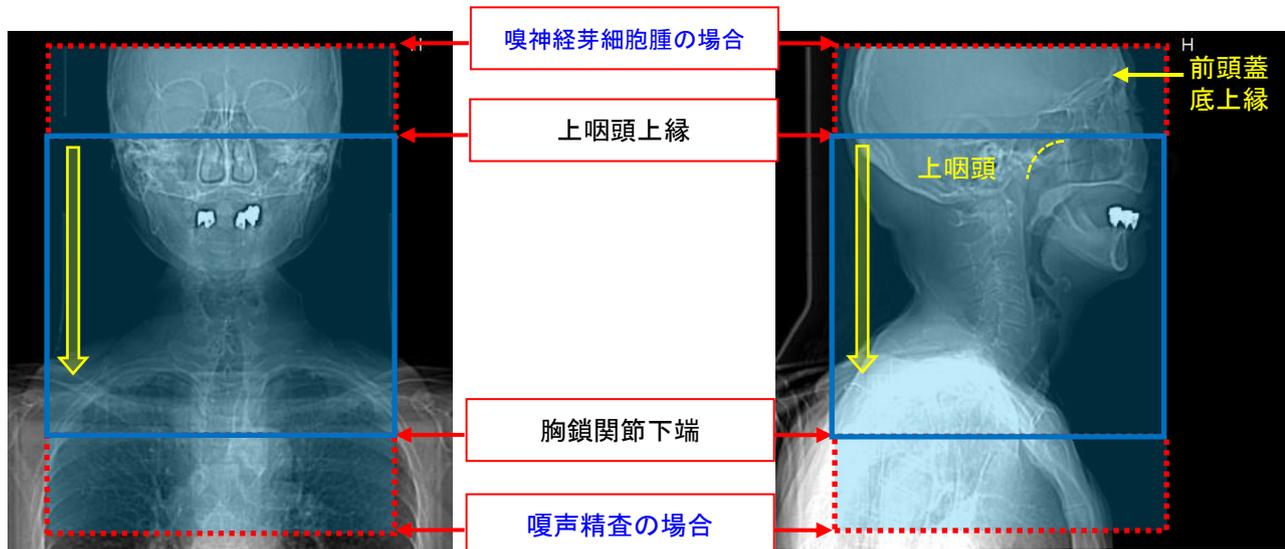

2102 頸部 CT 単純(膿瘍)


2103 頸部 CT 造影(膿瘍)

範囲) 眼窩上縁 5cm 上方から胸鎖関節下端まで

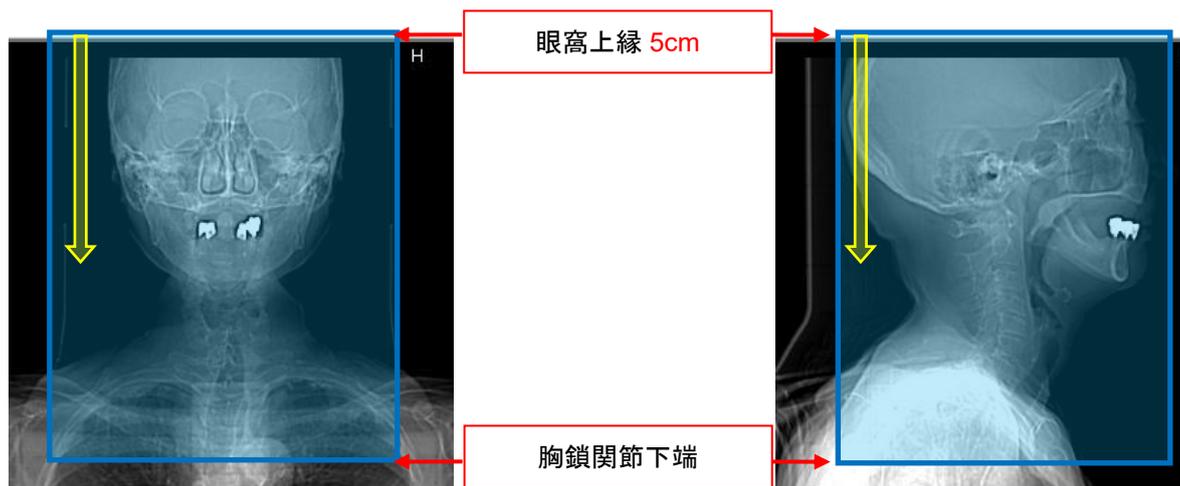

*** 下縁スライスに膿瘍があれば、以下の撮影を追加**

上肢挙上で、肺尖から心臓下縁まで

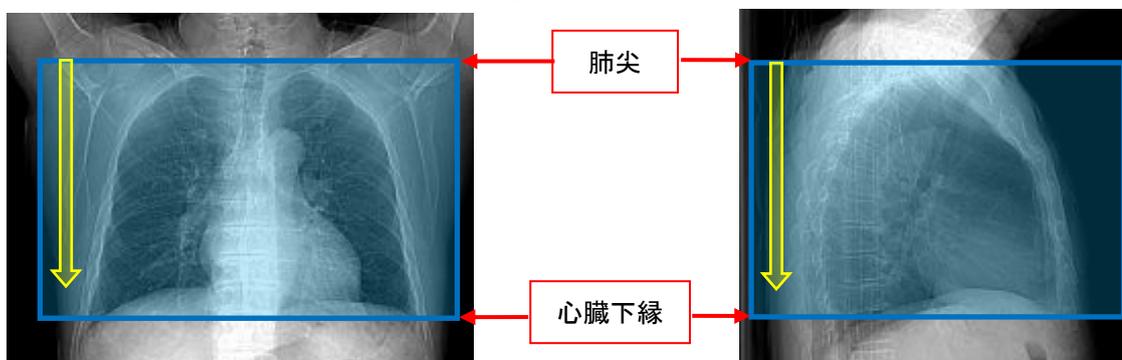

2104 頸部 CT 単純(唾石)

2105 頸部 CT 造影(唾石)


範囲) **顎下腺**唾石症: **硬口蓋上縁**から**下顎骨下縁 2cm 尾側**まで

* 原則、両唾液腺共に**前額面**を撮影スライス面と**垂直にポジショニング**する。



範囲) **耳下腺**唾石症: **上咽頭上縁**から**下顎骨下縁**まで


* 原則、両唾液腺共に**前額面**を撮影スライス面と**垂直にポジショニング**する。

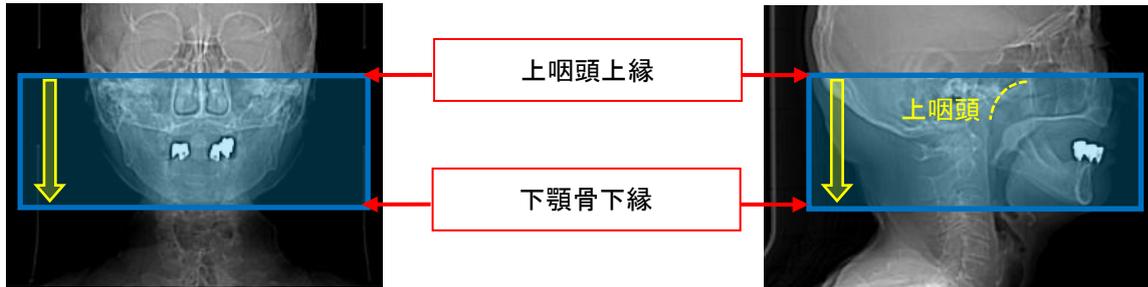

2110 頸部ターゲット CT 単純

範囲) 上咽頭上縁から胸鎖関節下端まで

* 上咽頭腫瘍(疑)の場合は、後床突起から胸鎖関節下端まで

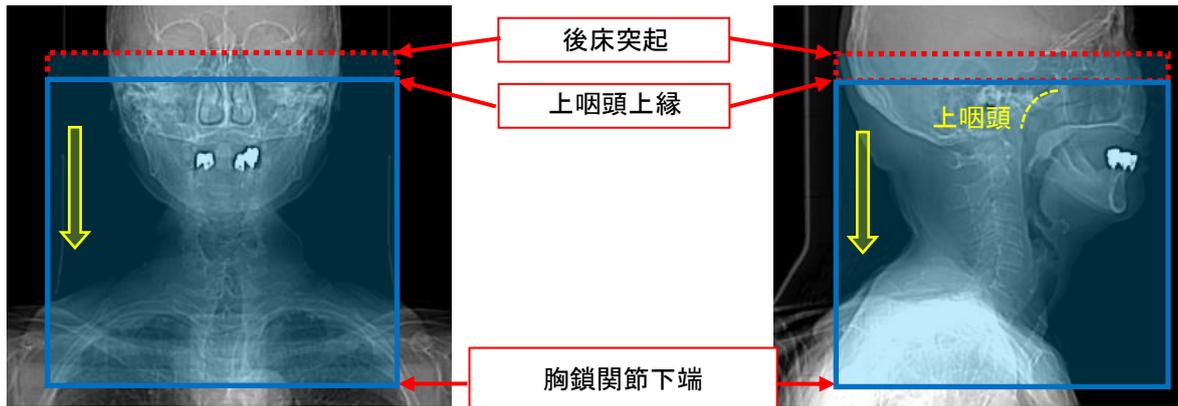

【拡大再構成】病変の部位に応じた範囲を DFOV 150 mm で拡大再構成

上咽頭: 後床突起から第2頸椎椎体下縁まで

中咽頭: 硬口蓋上縁から舌骨下縁まで




下咽頭・喉頭: 喉頭蓋上縁 1 cm 頭側から第1胸椎肋骨基部まで



2111 頸部ターゲット CT 造影(上中部)

範囲) 上咽頭上縁から胸鎖関節下端まで



* 上咽頭腫瘍(疑)の場合は、後床突起から胸鎖関節下端まで

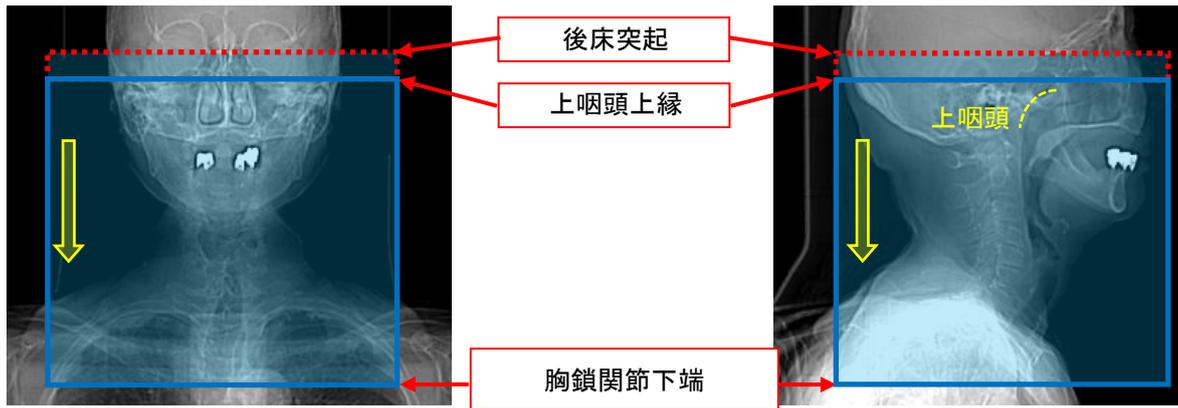

【拡大再構成】 病変の部位に応じた範囲を DFOV 150 mm で拡大再構成


上咽頭: 後床突起から第2頸椎椎体下縁まで

中咽頭: 硬口蓋上縁から舌骨下縁まで

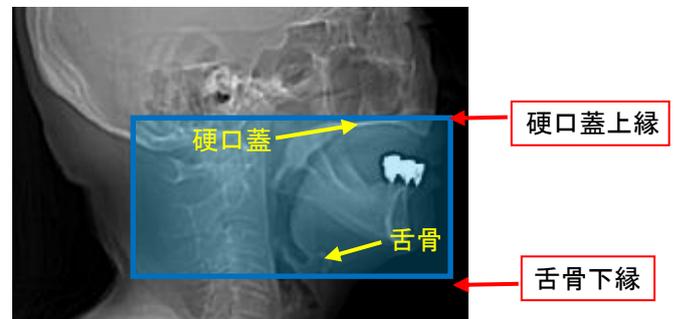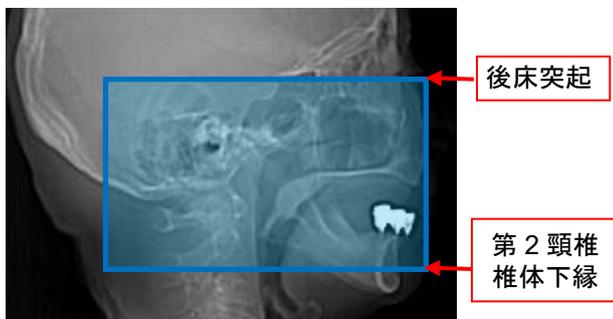


2112 頸部ターゲット CT 造影(下部)

範囲) 上咽頭上縁から胸鎖関節下端まで

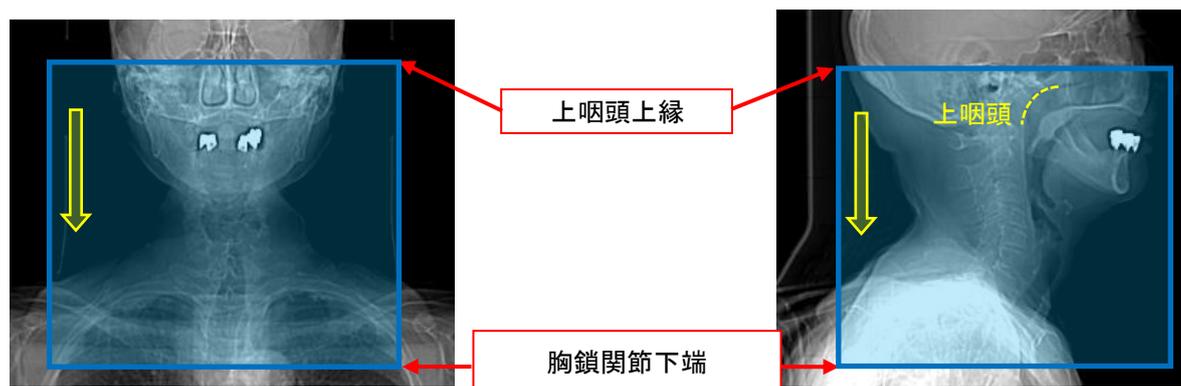


【拡大再構成】 病変の部位に応じた範囲を DFOV 150 mm で拡大再構成

下咽頭・喉頭: 喉頭蓋上縁 1 cm 頭側から第 1 胸椎肋骨基部まで

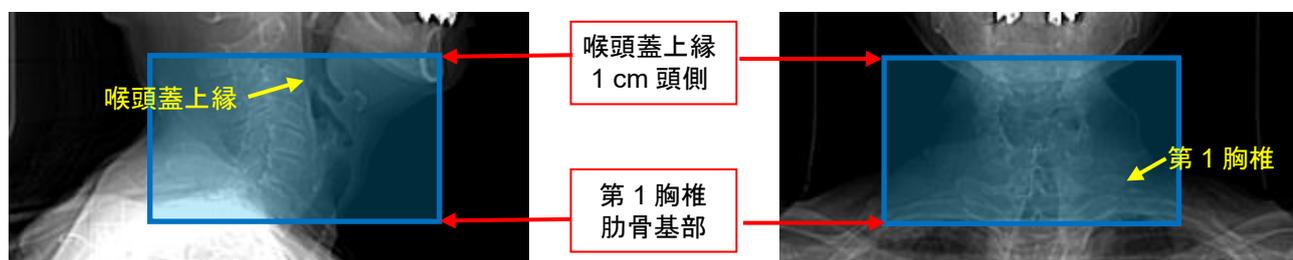

2120 頸部ダイミク CT(血管性)


範囲)①単純・②動脈相・③静脈相: 上咽頭上縁から胸鎖関節下端まで

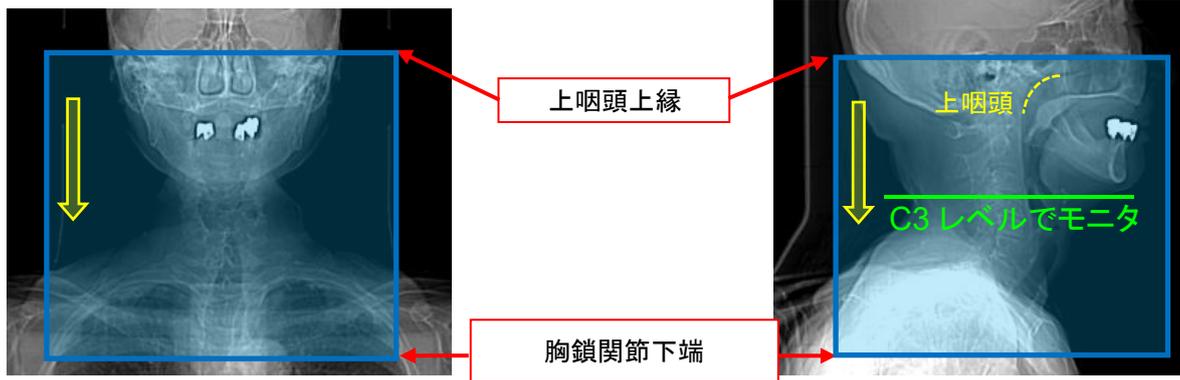


2121 頸部ダイミク CT(口腔)

範囲)

①単純・②動脈相: 硬口蓋上縁から下顎骨下端 1cm 尾側まで

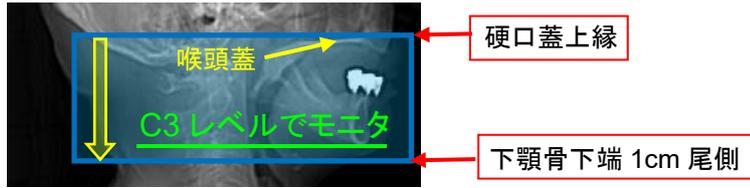


③静脈相: 上咽頭上縁から胸鎖関節下端まで

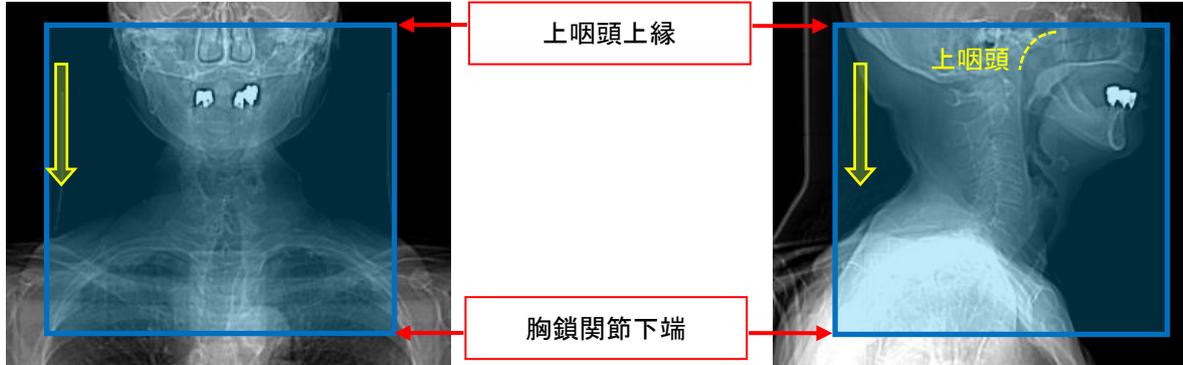

2130 甲状腺 CT 単純

2131 甲状腺 CT 造影

範囲) 上咽頭上縁から気管分岐部 2cm 尾側まで

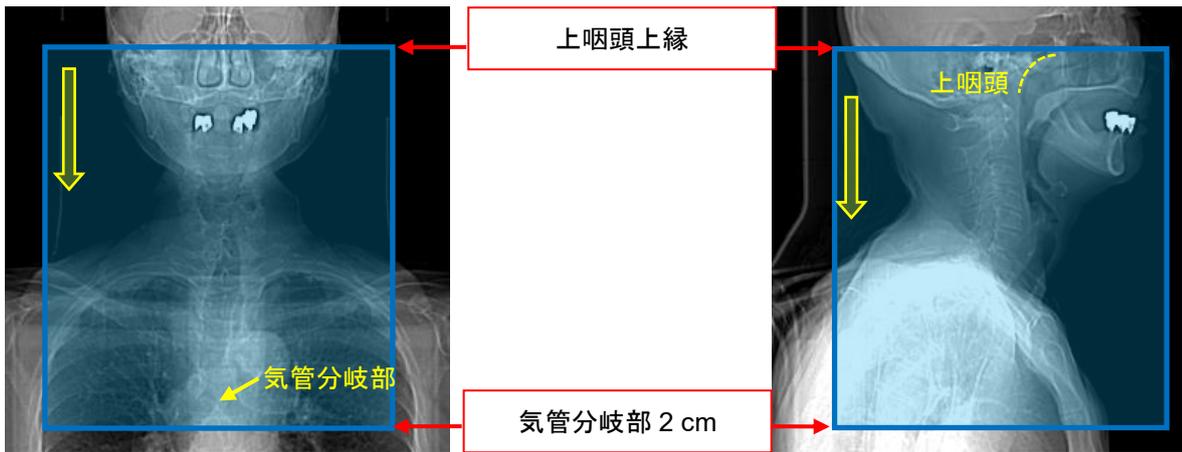


2132 甲状腺 CT 単純+造影

範囲)

①単純: 舌骨下縁から胸鎖関節下縁まで



②造影: 上咽頭上縁から気管分岐部 2cm 尾側まで

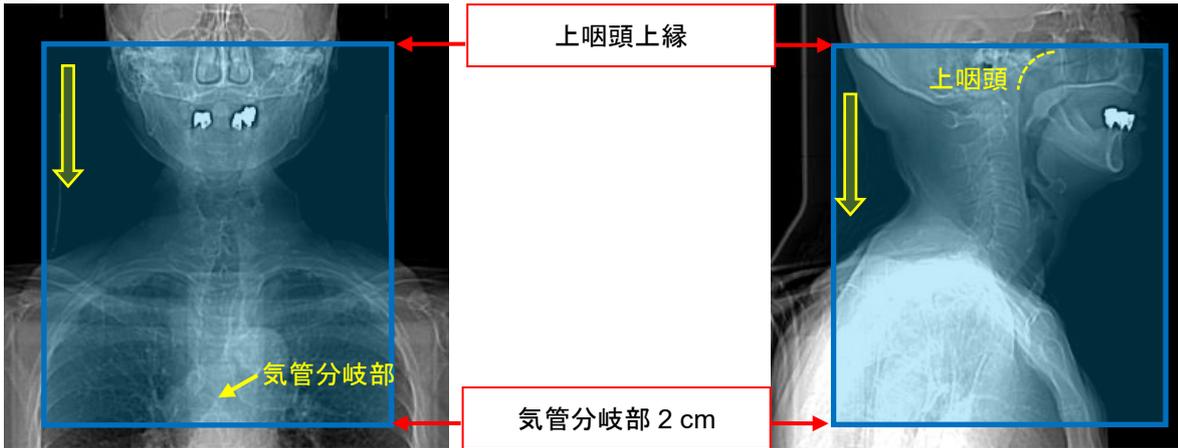


2200 頸部 CTA

範囲) 気管分岐部 2 cm 尾側から眼窩上縁 2 cm 頭側まで

* 原則、前額面を撮影スライス面と垂直にポジショニングする。

* 過去画像等がある場合は、その画像を参照し大動脈弓部 3 分岐の 2 cm 尾側までとする。

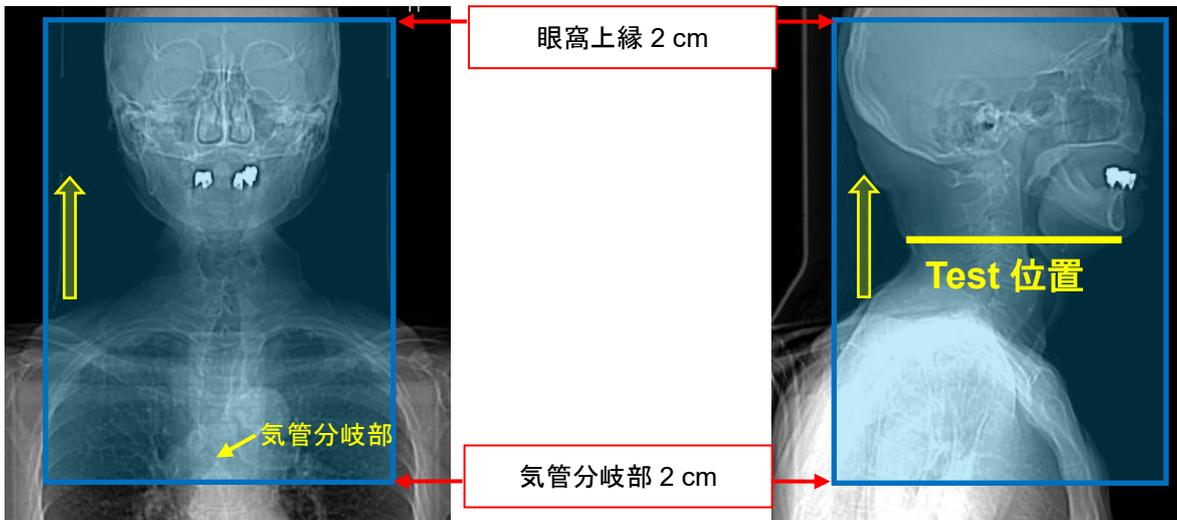


体幹一般

3000 頸-胸部 CT 単純

3001 頸-胸部 CT 造影

範囲) 上咽頭上縁から肺底部まで

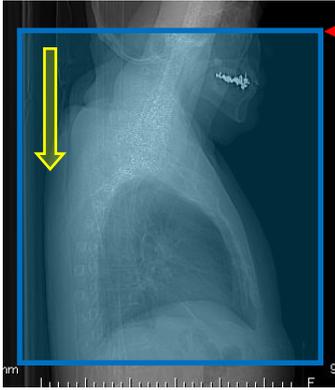

上咽頭上縁

肺底部


3010 頸-胸部 CT 単純(分割)

3011 頸-胸部 CT 造影(分割)


範囲)

①頸部: 上肢拳上なし、上咽頭上縁から胸鎖関節下端まで

* 嗅神経芽細胞腫の場合、前頭蓋底上縁 1 cm 頭側から

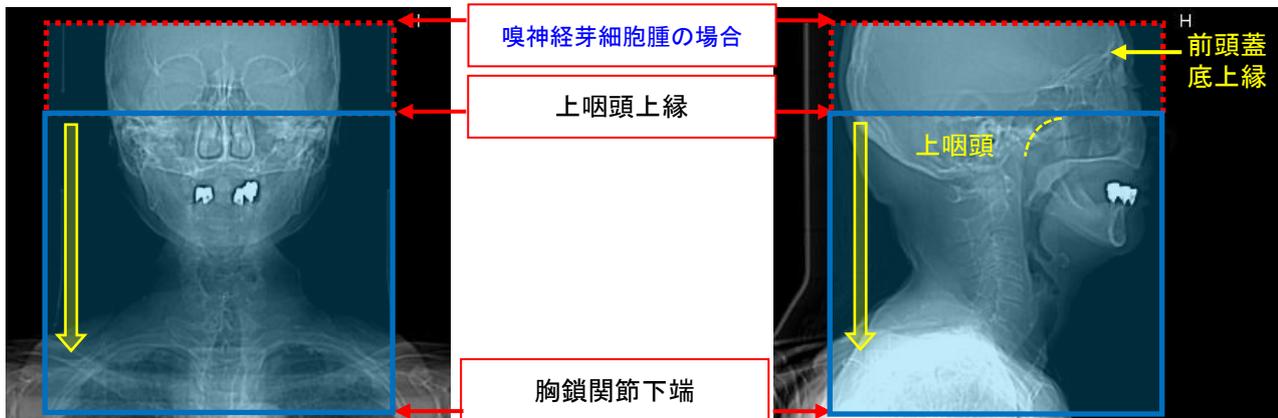


②胸部: 上肢拳上あり、肺尖から肺底部まで

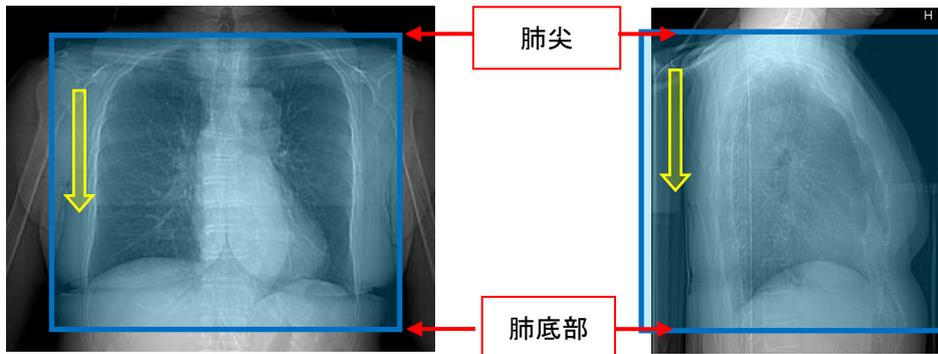

3012 頸-胸部 CT 単純+造影(分割)


範囲)

①頸部単純: 上肢挙上なし、舌骨下縁から胸鎖関節下端まで

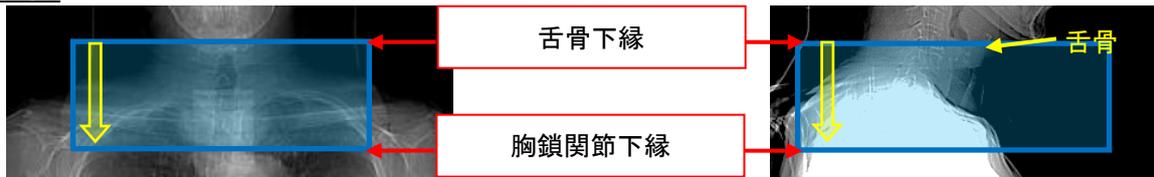


②頸部造影: 上肢挙上なし、上咽頭上縁から胸鎖関節下端まで

* Precheck の記載があれば、上咽頭上縁から気管分岐部まで

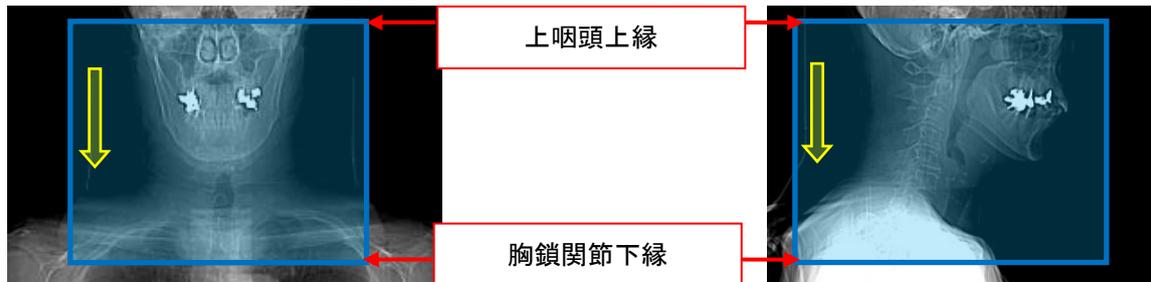


③胸部造影: 上肢挙上あり、肺尖から肺底部まで

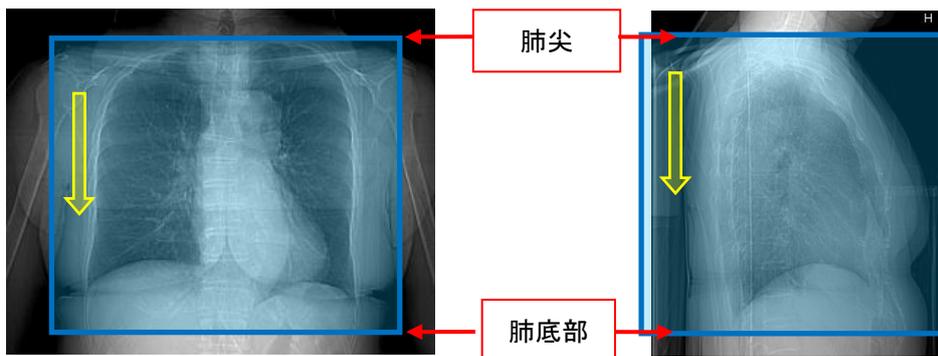

3020 頸-胸部ターゲット CT 単純 範囲)


①頸部: 上肢挙上なし、上咽頭上縁から胸鎖関節下端まで

* 上咽頭腫瘍(疑)の場合は、後床突起から胸鎖関節下端まで

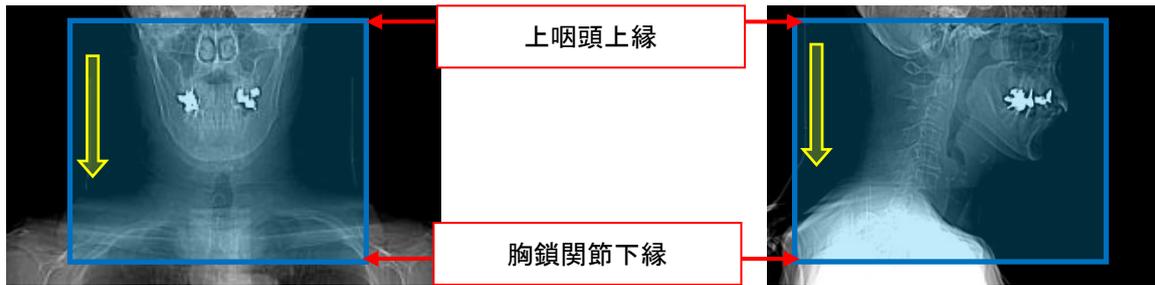


【拡大再構成】病変の部位に応じた範囲を DFOV 150 mm で拡大再構成

1. 上咽頭: 後床突起から第 2 頸椎椎体下縁まで

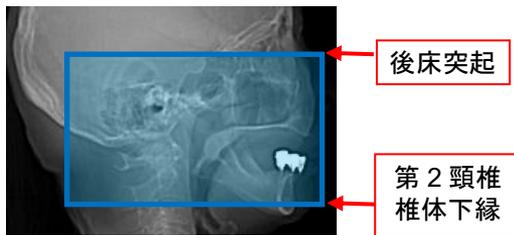


2. 中咽頭: 硬口蓋上縁から舌骨下縁まで

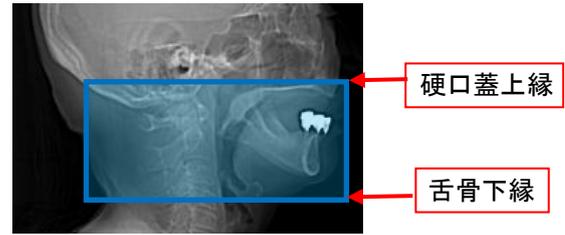

3. 下咽頭・喉頭: 喉頭蓋上縁 1 cm 頭側から第 1 胸椎肋骨基部まで



②胸部: 上肢挙上あり、肺尖から肺底部まで

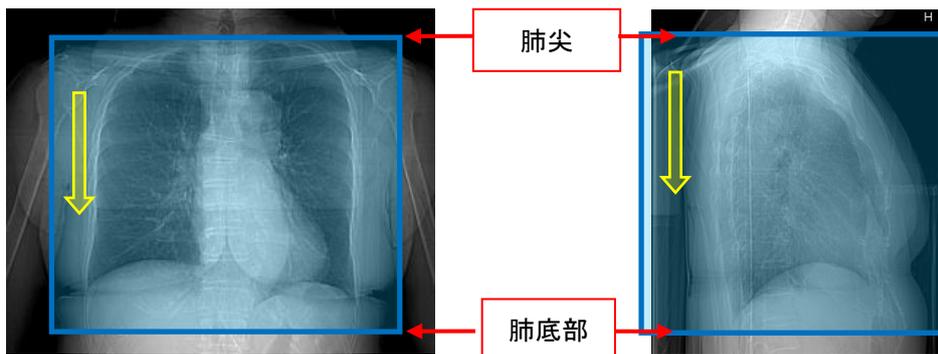


3021 頸-胸部ターゲット CT 造影(上中部)

範囲)


①頸部: 上肢挙上なし、上咽頭上縁から胸鎖関節下端まで

* 上咽頭腫瘍(疑)の場合は、後床突起から胸鎖関節下端まで

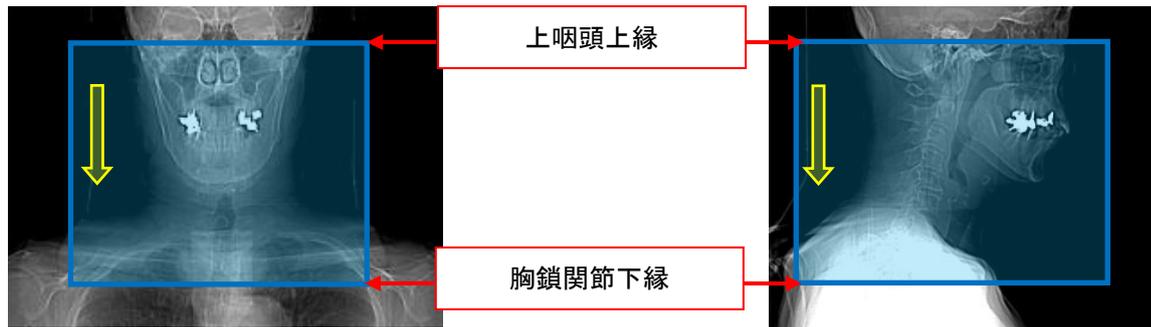


【拡大再構成】病変の部位に応じた範囲を DFOV 150 mm で拡大再構成

1.上咽頭: 後床突起から第2頸椎椎体下縁まで | 2.中咽頭: 硬口蓋上縁から舌骨下縁まで

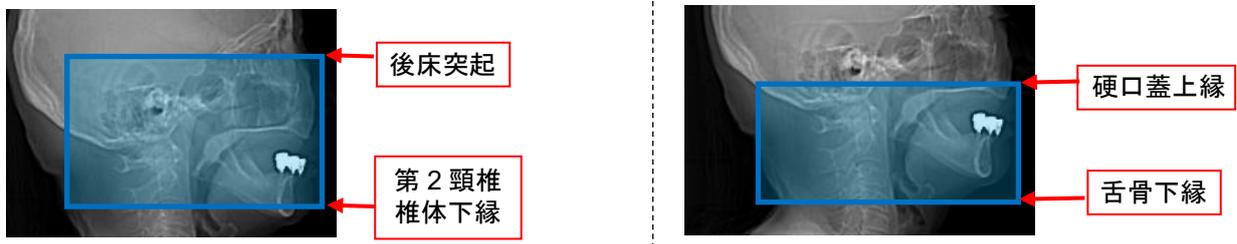

②胸部: 上肢挙上あり、肺尖から肺底部まで

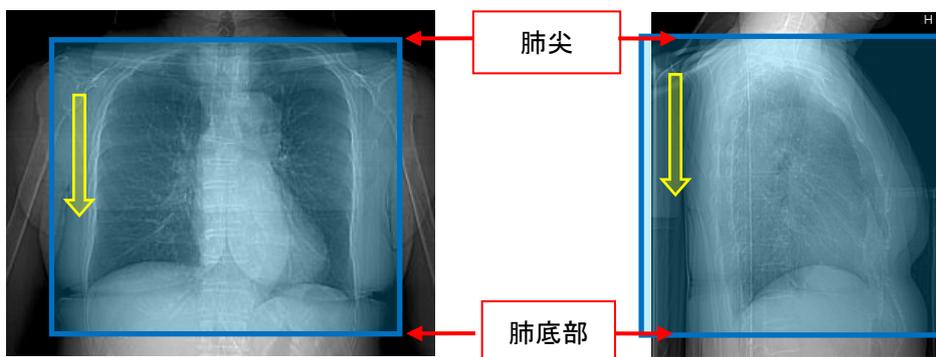


3022 頸-胸部ターゲット CT 造影(下部)

範囲)

①頸部: 上肢挙上なし、上咽頭上縁から胸鎖関節下端まで

* 上咽頭腫瘍(疑)の場合は、後床突起から胸鎖関節下端まで

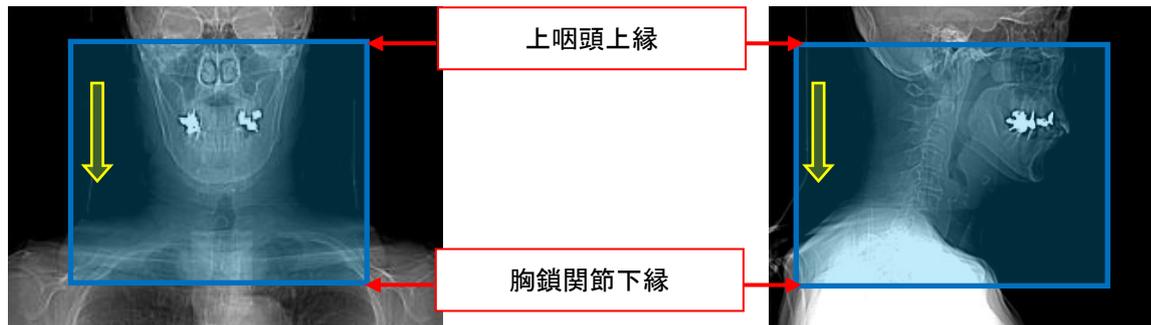


【拡大再構成】病変の部位に応じた範囲を DFOV 150 mm で拡大再構成

下咽頭・喉頭: 喉頭蓋上縁 1 cm 頭側から第 1 胸椎肋骨基部まで




②胸部: 上肢挙上あり、肺尖から肺底部まで

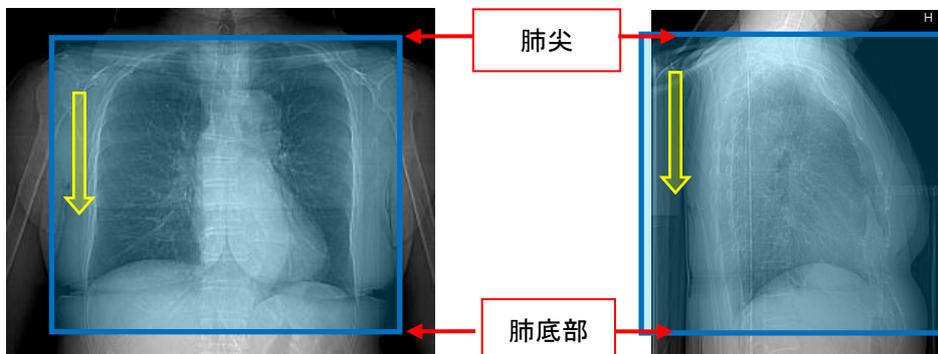


3031 頸-胸部ダイミック CT

範囲)


①頸部単純・②頸部動脈相: 硬口蓋上縁から下顎骨下端 1cm 尾側まで

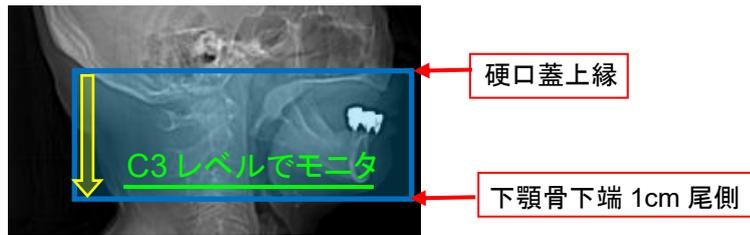

③頸部静脈相: 上咽頭上縁から胸鎖関節下端まで

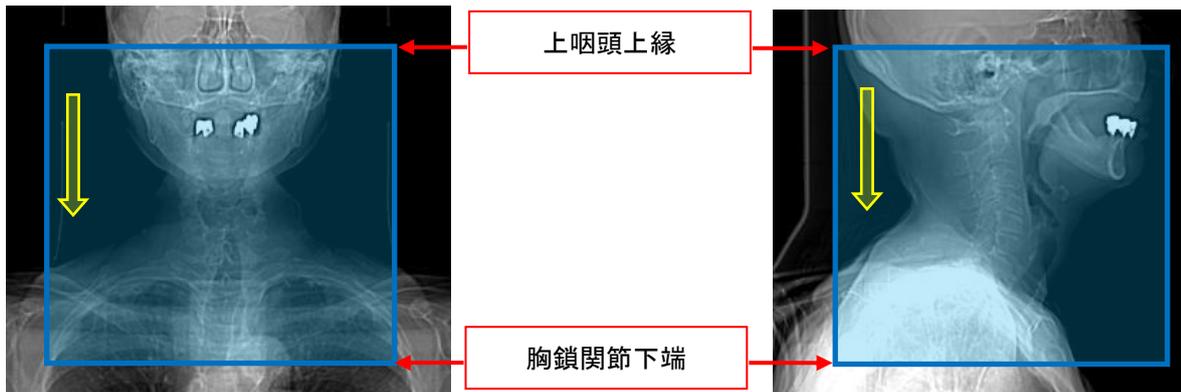

④胸部: 上肢拳上あり、肺尖から肺底部まで

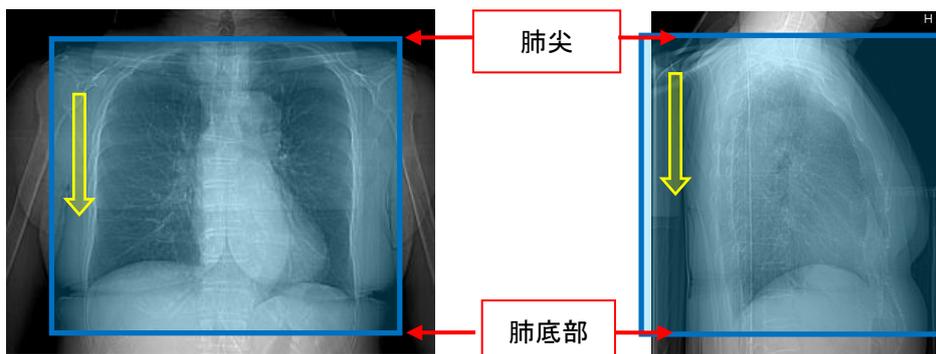


3040 頸-腹部 CT 単純

3041 頸-腹部 CT 造影


範囲) 上咽頭上縁から

腸骨上縁まで

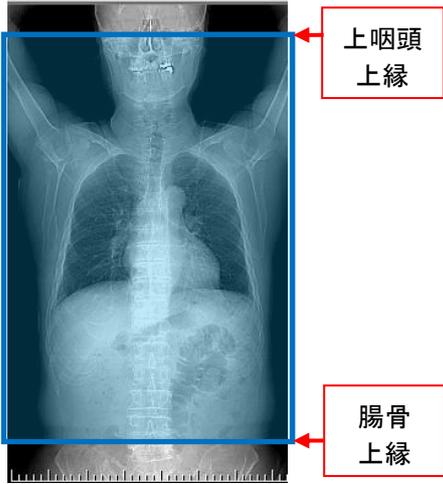

体幹部固形癌(食道癌以外)の頸部リンパ節評価

C1 棘突起下縁から腸骨上縁まで

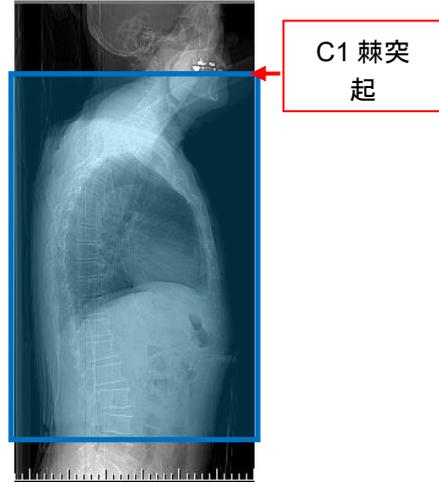

3042 頸-腹部 CT 造影(肝臓単純)
範囲)

①単純:

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで



②造影:

上咽頭上縁から
腸骨上縁まで



体幹部固形癌(食道癌以外)
の頸部リンパ節評価


C1 棘突起下縁から腸骨上縁まで



3048 頸-腹部 CT 単純(5mm)

3049 頸-腹部 CT 造影(5mm)

範囲) 上咽頭上縁から腸骨上縁まで

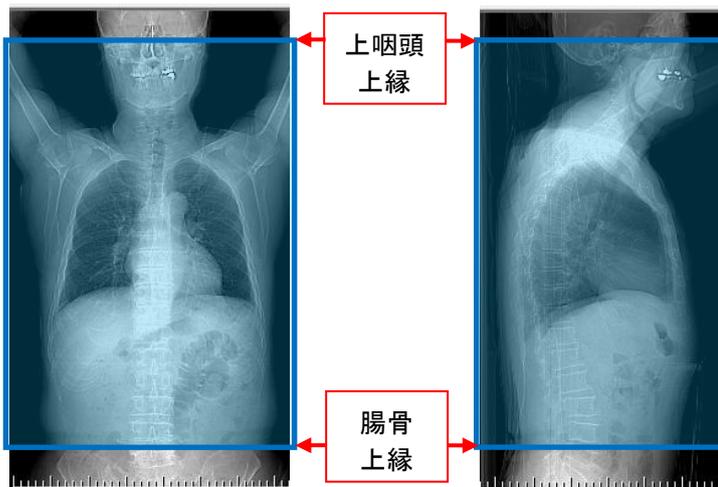

3050 頸-骨盤部 CT 単純

3051 頸-骨盤部 CT 造影


範囲) 上咽頭上縁から

坐骨下縁 1 cm 尾側まで



体幹部固形癌(食道癌以外)の頸部リンパ節評価

C1 棘突起下縁から坐骨下縁 1 cm 尾側まで

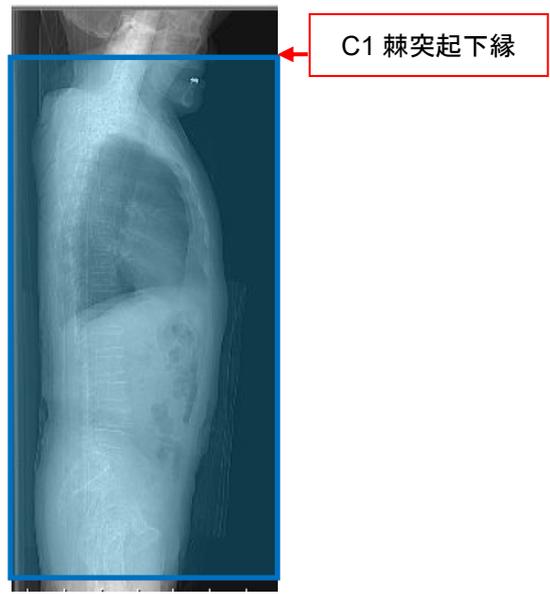

3052 頸-骨盤部 CT 造影(肝臓単純)

範囲)


①単純

肝上縁 2 cm 頭側から 上咽頭上縁から
肝下縁 2 cm 尾側まで 坐骨下縁 1 cm 尾側まで

②造影

体幹部固形癌(食道癌以外)の
頸部リンパ節評価


C1 棘突起下縁から 坐骨下縁
1 cm 尾側まで

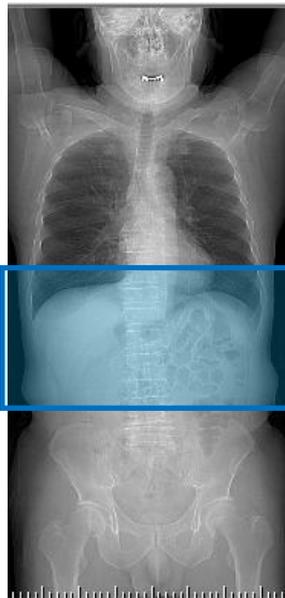

上咽頭
上縁



C1
棘突起
下縁

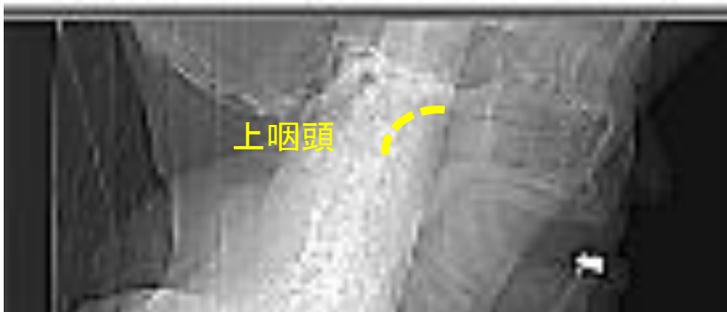


3053 頸-骨盤部 CT 造影+低線量 CTU

3054 頸-骨盤部 CT 造影+CTU

範囲)

①造影

上咽頭上縁から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで

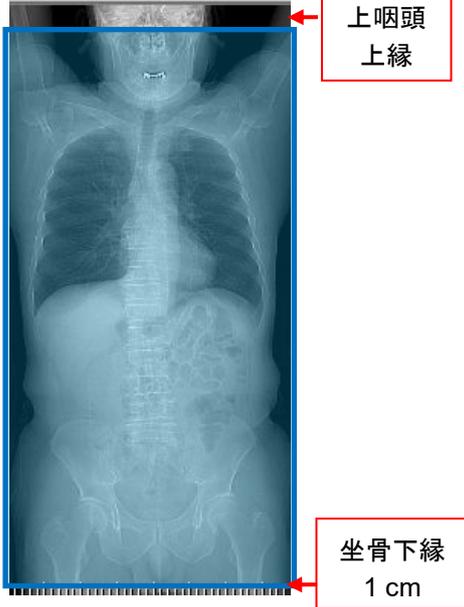


体幹部固形癌(食道癌以外)の
頸部リンパ節評価は
C1 棘突起下縁から



②CTU


腎上縁 2 cm 頭側から
膀胱下縁まで
* 直前の造影を参照

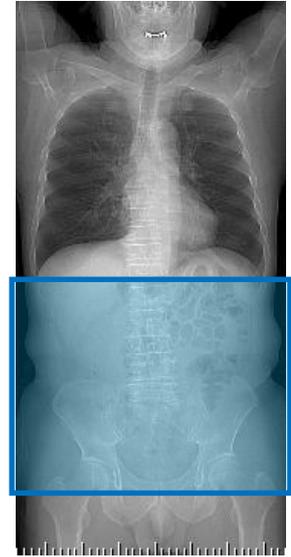

3058 頸-骨盤部 CT 単純(5mm)

3059 頸-骨盤部 CT 造影(5mm)


範囲) 上咽頭上縁から坐骨下縁 1 cm 尾側まで

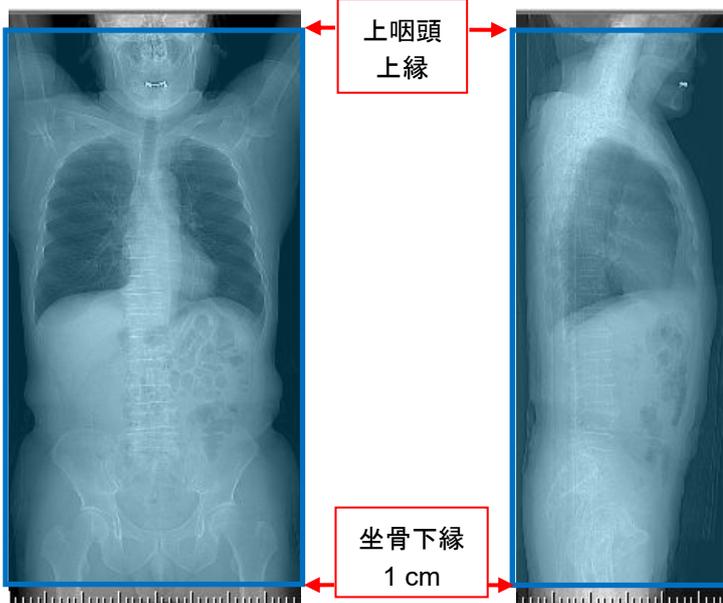

3100 胸部 CT 単純

3101 胸部 CT 造影

範囲) 肺尖 2 cm 頭側から肺底部まで

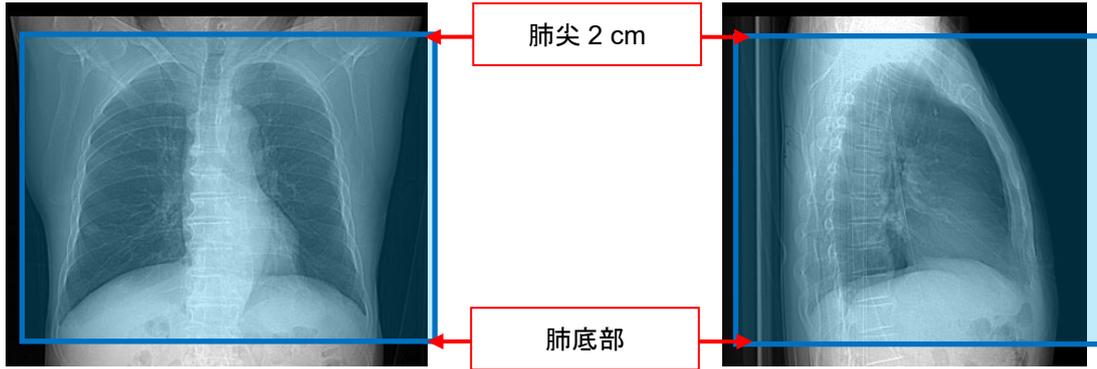


3120 胸-腹部 CT 単純(肺精査)

3121 胸-腹部 CT 造影(肺精査)

3122 胸-腹部 CT 単純

3123 胸-腹部 CT 造影

範囲) 肺尖 2 cm 頭側から腸骨上縁まで

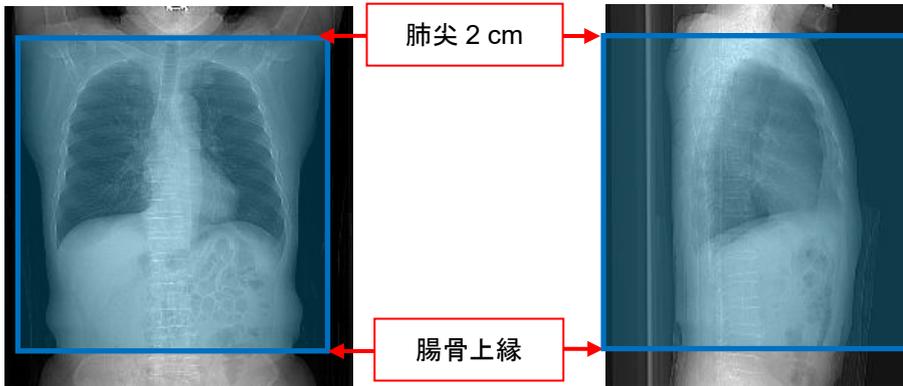


3124 胸-腹部 CT 造影(肝臓単純)

範囲)

①単純: 肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで




②造影: 肺尖 2 cm 頭側から
腸骨上縁まで

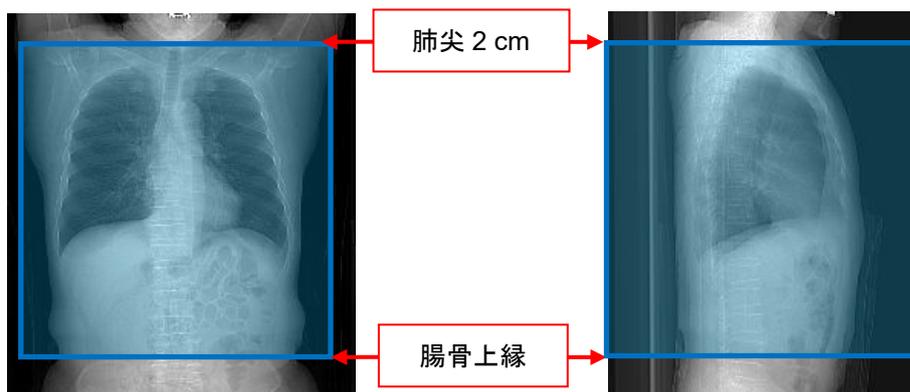

3128 胸-腹部 CT 単純(5mm)

3129 胸-腹部 CT 造影(5mm)


範囲) 肺尖 2 cm 頭側から腸骨上縁まで

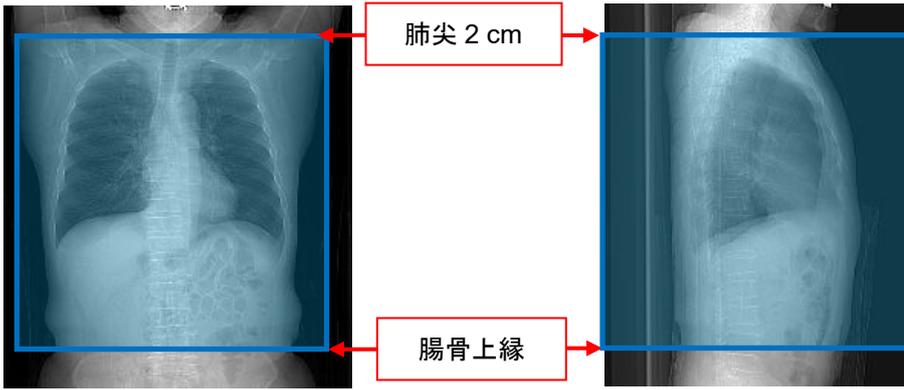

3130 胸-骨盤部 CT 単純

3131 胸-骨盤部 CT 造影


範囲) 肺尖 2 cm 頭側から坐骨下縁 1cm 尾側まで

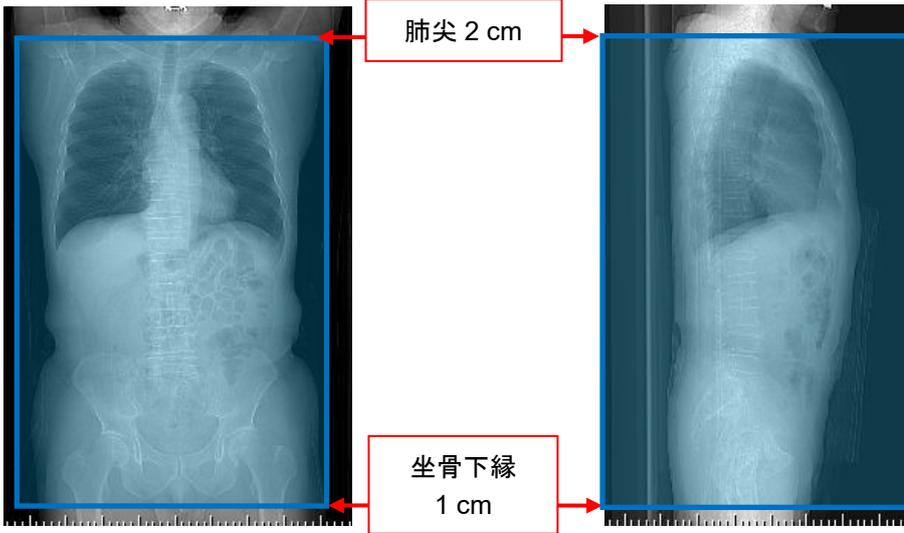


3132 胸-骨盤部 CT 造影(肝臓単純)

範囲)

①単純: 肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで

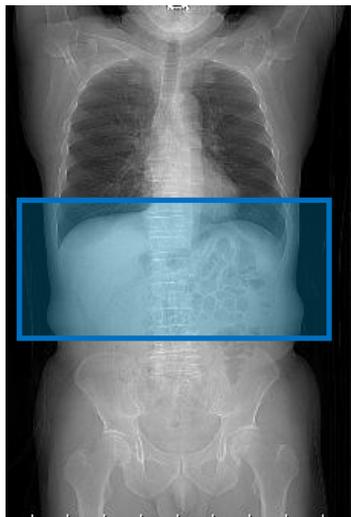

②造影: 肺尖 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで

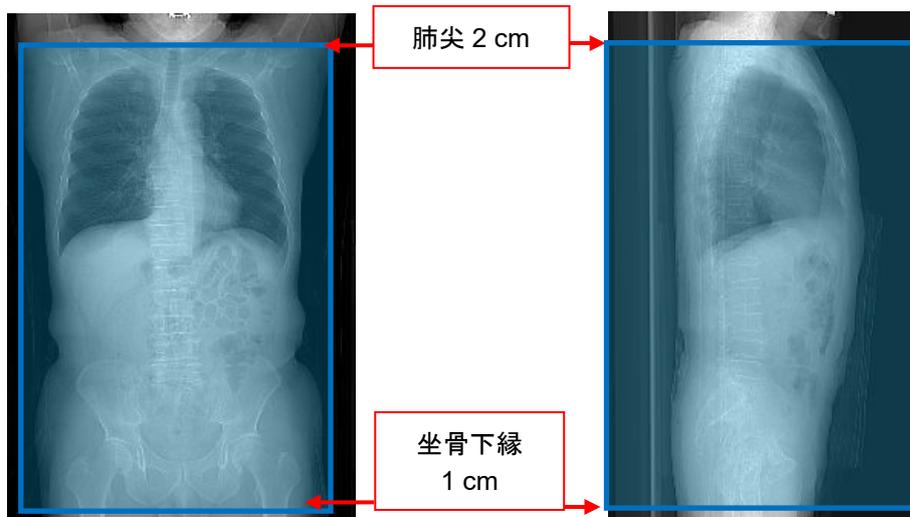


3133 胸-骨盤部 CT 造影+低線量 CTU


3134 胸-骨盤部 CT 造影+CTU

範囲)

①造影: 肺尖 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで

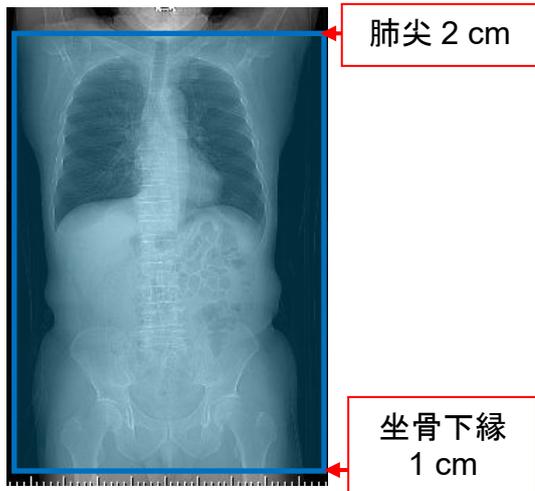


②CTU: 腎上縁 2 cm 頭側から膀胱下縁まで
* 直前の造影を参照

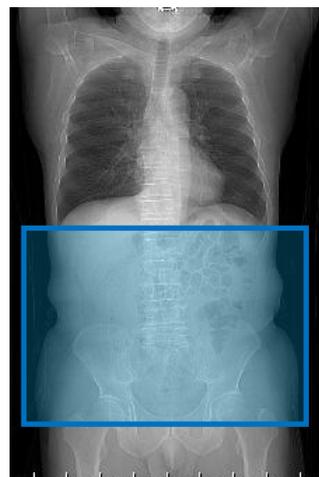

3138 胸-骨盤部 CT 単純(5mm)

3139 胸-骨盤部 CT 造影(5mm)


範囲) 肺尖 2 cm 頭側から坐骨下縁 1cm 尾側まで

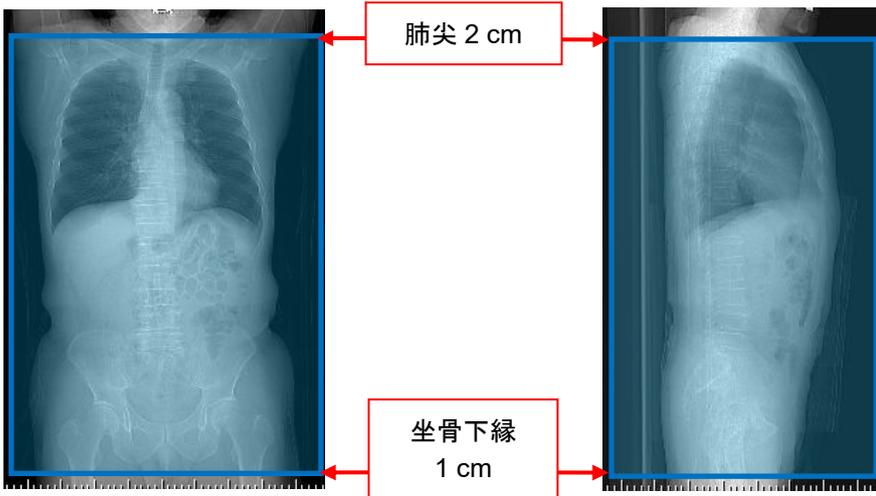

3200 腹部 CT 単純

3202 腹部 CT 造影

範囲) 肝上縁 2 cm 頭側から腸骨上縁まで

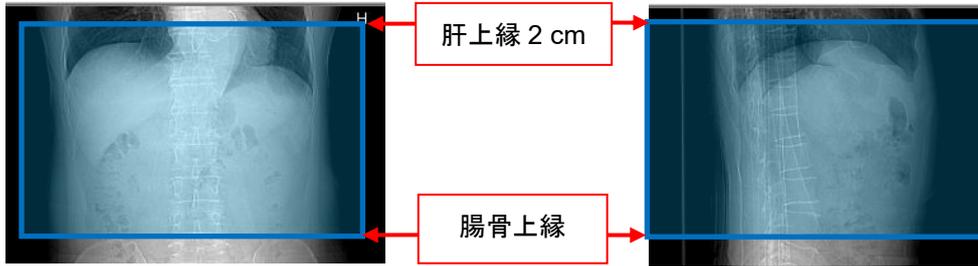


3203 腹部【DIC 後】CT

範囲)

肝上縁 2 cm 頭側から十二指腸水平脚下縁 2 cm 尾側まで


* 過去画像や他院画像などの参照可能な画像がなければ、腸骨上縁 2 cm 尾側までとする

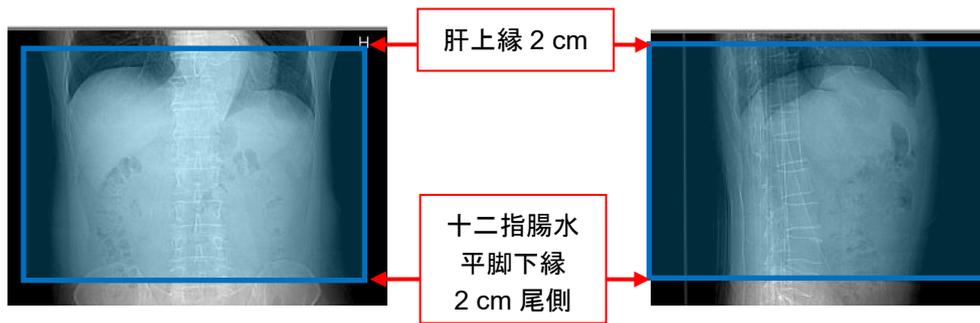

3240 腹-骨盤部 CT 単純

3241 腹-骨盤部 CT 造影


範囲) 肝上縁 2 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで

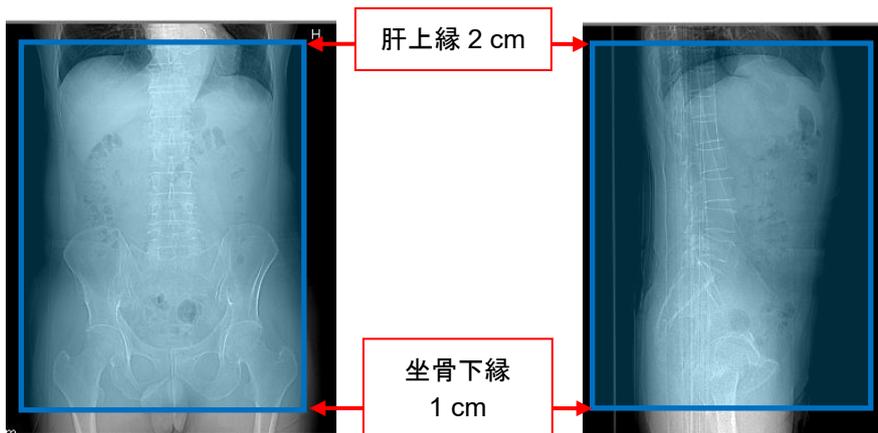


3242 腹-骨盤部 CT 造影(肝臓単純)

範囲)

①単純: 肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで

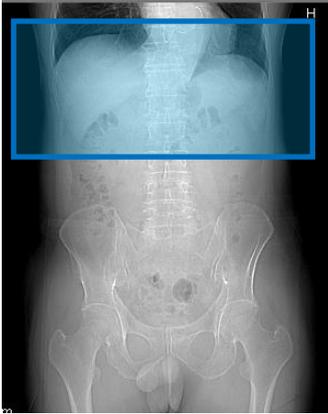

②造影: 肝上縁 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで

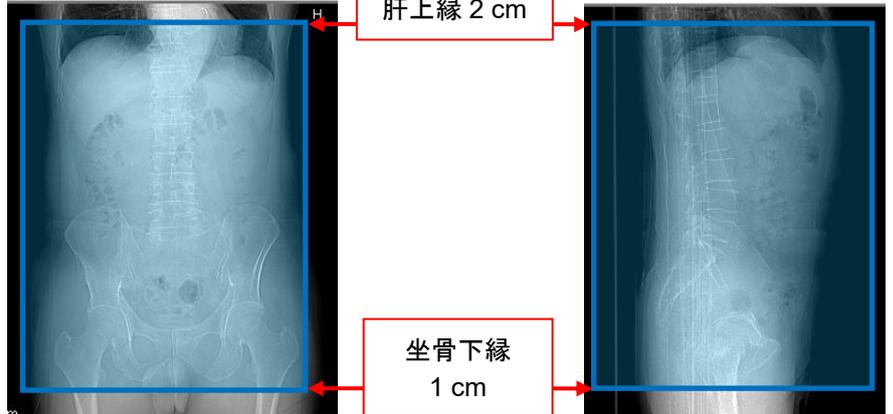


3243 腹-骨盤部 CT 造影+低線量 CTU

3244 腹-骨盤部 CT 造影+CTU

範囲)

①造影: 肝上縁 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで

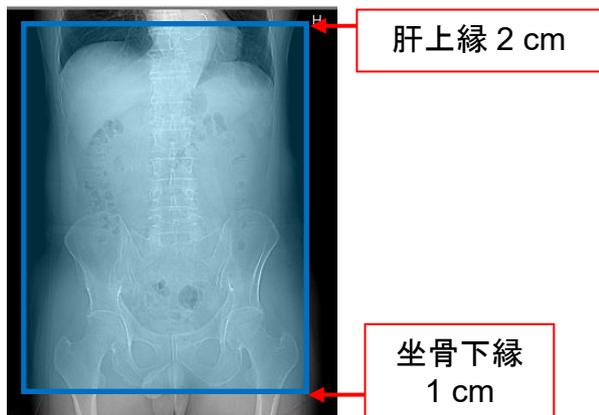


②CTU: 腎上縁 2 cm 頭側から膀胱下縁まで
* 直前の造影を参照



3248 腹-骨盤部 CT 単純(5mm)

3249 腹-骨盤部 CT 造影(5mm)

範囲) 肝上縁 2 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで

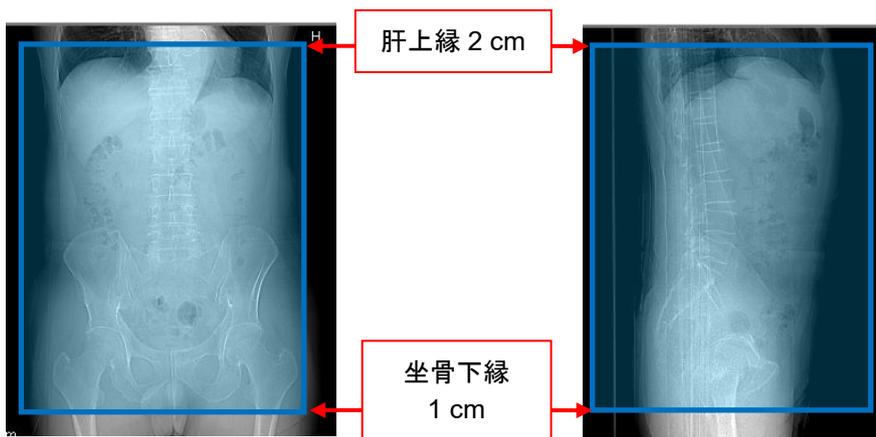

3300 腎-膀胱 CT 単純
範囲)

左右横隔膜の高位側の上縁 3 cm 尾側から坐骨下縁 1 cm 頭側まで



3301 腎-膀胱 CT 単純+低線量 CTU

範囲)

①単純:

左右横隔膜の高位側の
上縁 3 cm 尾側から
坐骨下縁 1 cm 頭側まで



②CTU:

腎上縁 2 cm 頭側から
膀胱下縁まで
* 直前の造影を参照



- * 位置決め画像より、腎の位置が把握可能であれば、腎上縁 2 cm 頭側からとする
- * 過去画像があり参照可能であれば、腎上縁 2 cm 頭側からとする

3302 腎-膀胱 CT 単純+造影+CTU

範囲)


①単純:

左右横隔膜の高位側の
上縁 3 cm 尾側から
坐骨下縁 1 cm 頭側まで



②実質相

腎上縁 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 頭側まで
* 直前の単純を参照

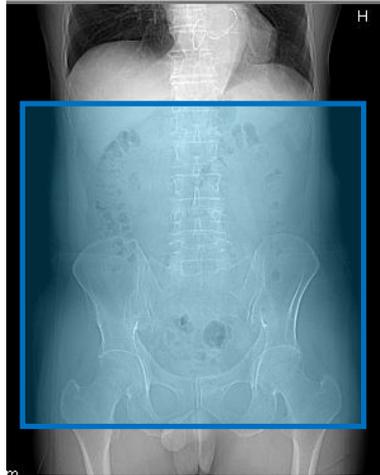

③CTU

腎上縁 2 cm 頭側から
膀胱下縁まで
* 直前の造影を参照



- * 位置決め画像より、腎の位置が把握可能であれば、腎上縁 2 cm 頭側からとする
- * 過去画像があり参照可能であれば、腎上縁 2 cm 頭側からとする

3400 骨盤部 CT 単純

3401 骨盤部 CT 造影

範囲) 腸骨上縁 2 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで




体幹精査

4000 肝ダイナミック CT

範囲)


①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで

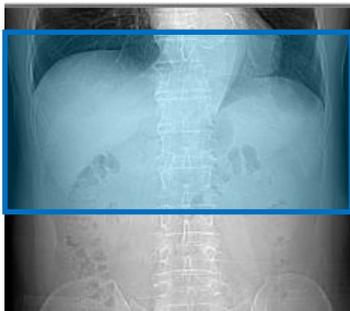

②後期動脈相

単純と同一範囲
* 単純から範囲を再設定

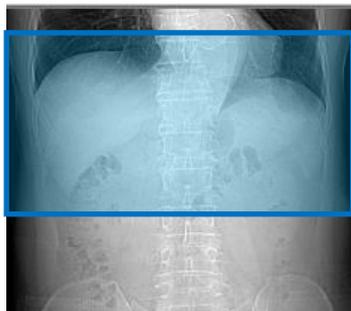


③門脈相

肝上縁 2 cm 頭側から
腸骨上縁または
肝下縁 2 cm 尾側



④平衡相(3分)

②と同一範囲

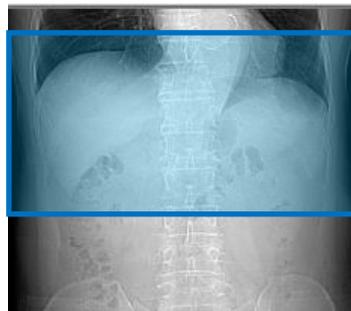


4001 肝ダイナミック CT(腹-骨盤部)

範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで

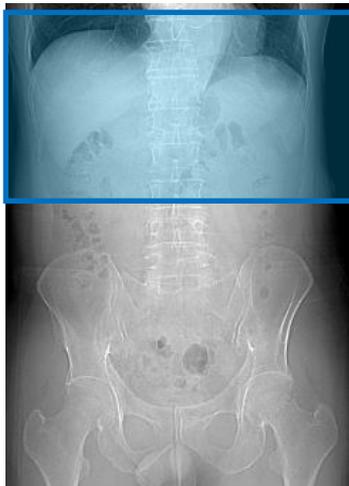

②後期動脈相

単純と同一範囲
* 単純から範囲を再設定



③門脈相

肝上縁 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで



④平衡相(3分)

②と同一範囲



4002 肝ダイナミック CT(胸-腹部)

範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで



②後期動脈相

単純と同一範囲
* 単純から範囲を再設定




③門脈相

肺尖 2 cm 頭側から
腸骨上縁または
肝下縁 2 cm 尾側のうち
尾側の方



④平衡相(3分)

②と同一範囲

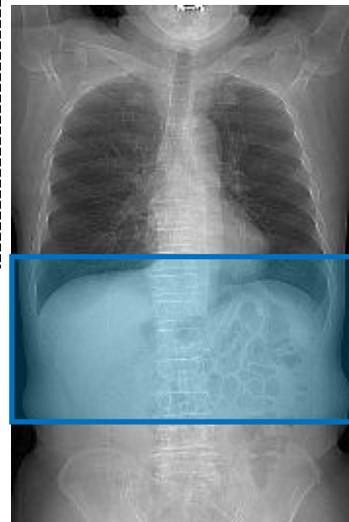


4003 肝ダイナミック CT(胸-骨盤部)

範囲)


①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで

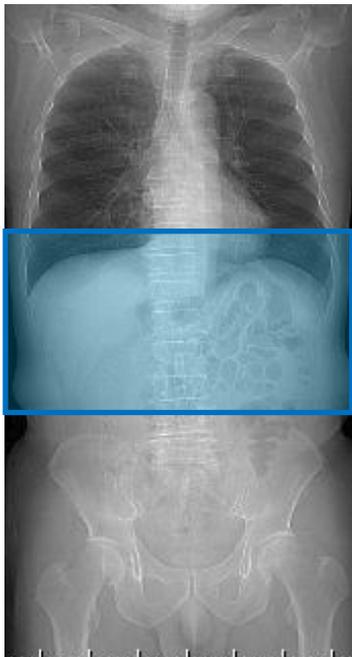

②後期動脈相

単純と同一範囲
* 単純から範囲を再設定

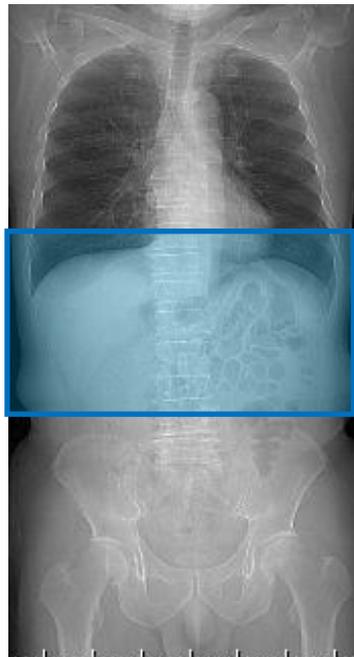


③門脈相

肺尖 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで



④平衡相(3分)

②と同一範囲

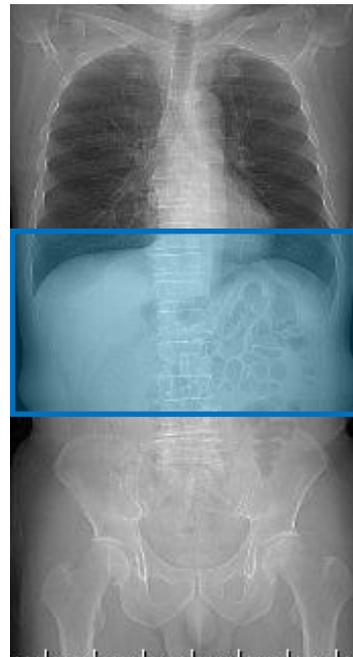

4010 肝ダイナミック CT 静脈瘤精査(腹部 範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで



②後期動脈相

単純と同一範囲
* 単純から範囲を再設定



③門脈相

肝上縁 5 cm 頭側から
腸骨上縁または
肝下縁 2 cm 尾側のうち
尾側の方



④平衡相(3分)

②と同一範囲




4011 肝ダイナミック CT 静脈瘤精査(腹-骨盤部)

範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで

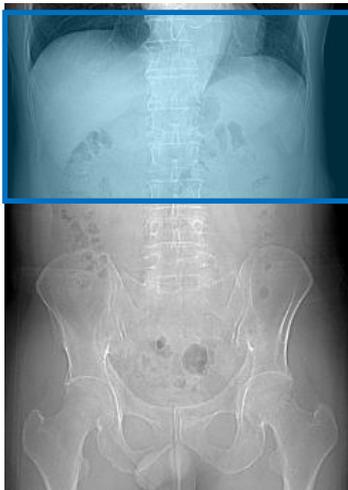

②後期動脈相

単純と同一範囲
* 単純から範囲を再設定



③門脈相

肝上縁 5 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで



④平衡相(3分)

②と同一範囲



4020 肝ダイナミック CT【術前】

範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで



②早期・③後期動脈相

単純と同一範囲
* 単純から範囲を再設定



④門脈相

肝上縁 2 cm 頭側から
腸骨上縁または
肝下縁 2 cm 尾側のうち
尾側の方



⑤平衡相(3分)

②と同一範囲



4021 肝ダイナミック CT【術前】(腹-骨盤部)
範囲)


①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで



②早期・③後期動脈相

単純と同一範囲
* 単純から範囲を再設定

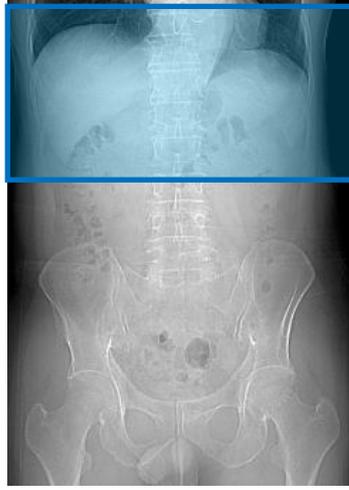

④門脈相

肝上縁 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで



⑤平衡相(3分)

②と同一範囲



4022 肝ダイナミック CT【術前】(胸-腹部)

範囲)


①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで



②早期・③後期動脈相

単純と同一範囲
* 単純から範囲を再設定

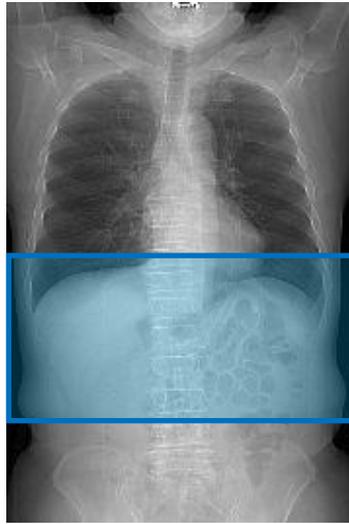


④門脈相

肺尖 2 cm 頭側から
腸骨上縁または
肝下縁 2 cm 尾側のうち
尾側の方



⑤平衡相(3分)


②と同一範囲

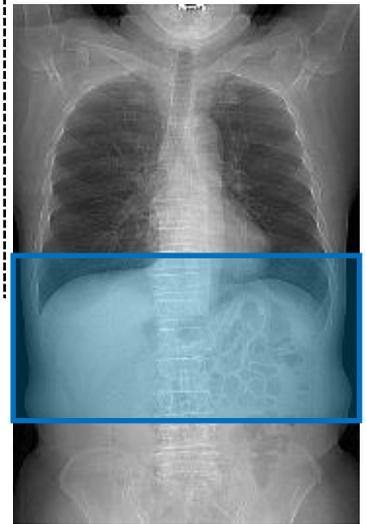

4023 肝ダイナミック CT【術前】(胸-骨盤部
範囲)


①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで

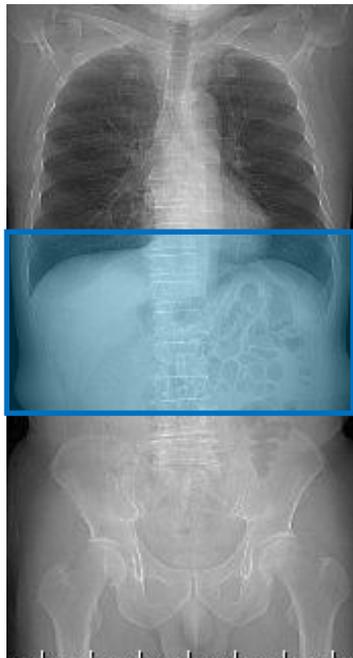

②早期・③後期動脈相

単純と同一範囲
* 単純から範囲を再設定

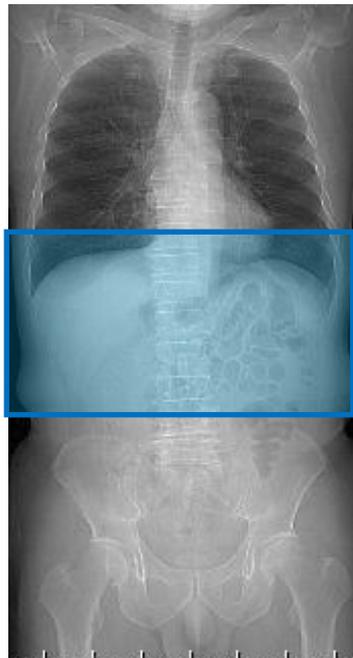


④門脈相

肺尖 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで



⑤平衡相(3分)

②と同一範囲

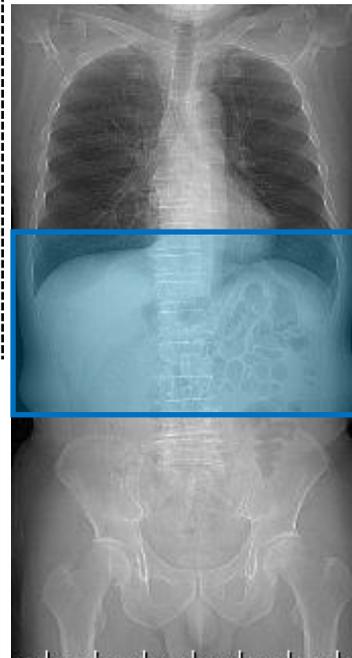

4030 肝ダイナミック CT【肝転移術前】

範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで



②早期動脈相

単純と同一範囲
* 単純から範囲を再設定



③門脈相


肝上縁 2 cm 頭側から腸骨上縁
または肝下縁 2 cm 尾側の尾側の方



4031 肝ダイナミック CT【肝転移術前】(腹-骨盤部) 範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで

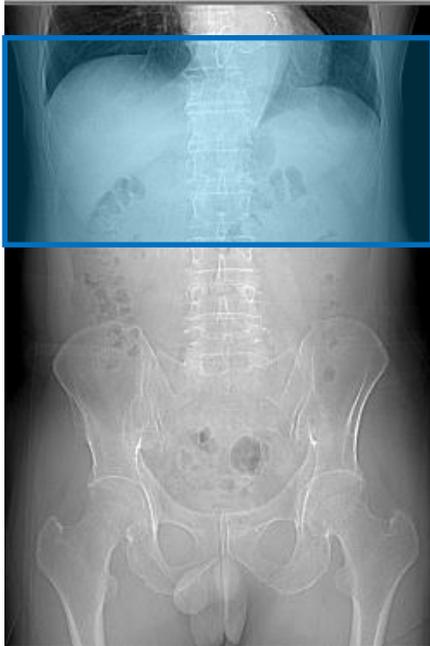

②早期動脈相

単純と同一範囲
* 単純から範囲を再設定



③門脈相

肝上縁 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで




4032 肝ダイナミック CT【肝転移術前】(胸-腹部)

範囲)


①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで

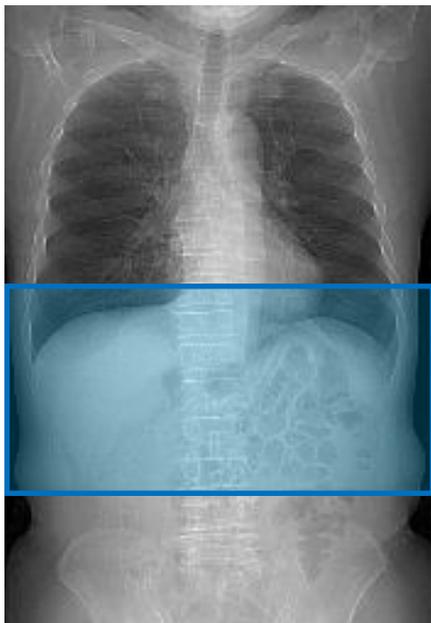

②早期動脈相

単純と同一範囲
* 単純から範囲を再設定

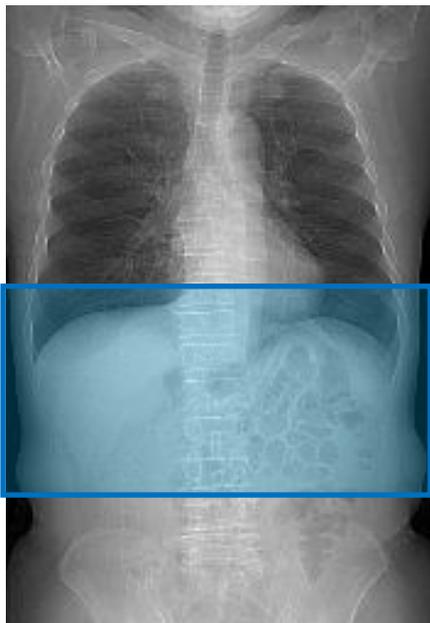

③門脈相


肺尖 2 cm 頭側から腸骨上縁
または肝下縁 2 cm 尾側の尾側の方



4033 肝ダイナミック CT【肝転移術前】(胸-骨盤部)
範囲)


①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで

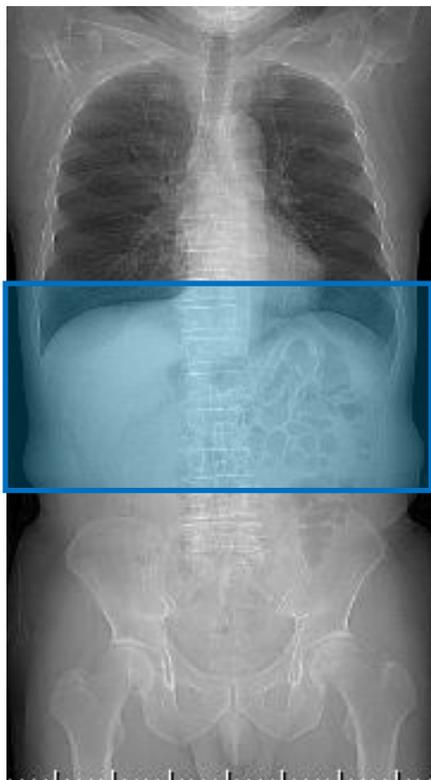

②早期動脈相

単純と同一範囲
* 単純から範囲を再設定

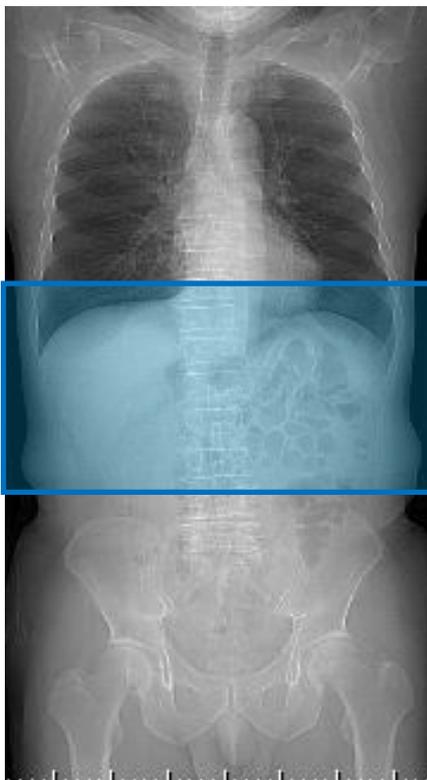

③門脈相

肺尖 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで



4100 胆・膵ダイナミック CT【炎症】

範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
腸骨上縁 2 cm 尾側まで
* 過去画像や他院画像
がある場合は参照




②膵実質相

肝上縁 2 cm 頭側から
十二指腸水平脚下縁
2 cm 尾側まで
* 単純から範囲を再設定



③遅延相(90sec)


肝上縁 2 cm 頭側から腸骨上縁
または十二指腸水平脚 2cm 尾側
のうちで尾側の方

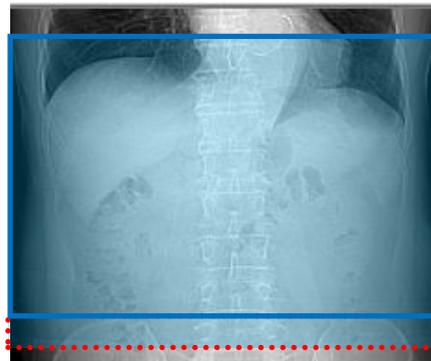

4101 胆・膵ダイナミック CT【炎症】(腹-骨盤部) 範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
腸骨上縁 2 cm 尾側まで
* 過去画像や他院画像
がある場合は参照

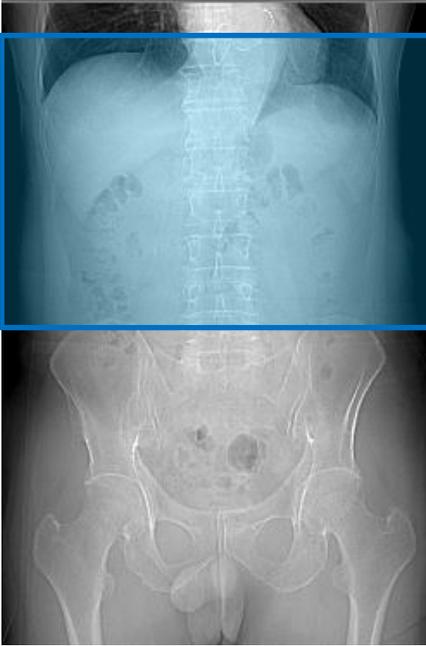

②膵実質相

肝上縁 2 cm 頭側から
十二指腸水平脚下縁
2 cm 尾側まで
* 単純から範囲を再設定



③遅延相(90sec)

肝上縁 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで




4102 胆・膵ダイナミック CT【炎症】(胸-腹部)

範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
腸骨上縁 2 cm 尾側まで

* 過去画像や他院画像
がある場合は参照

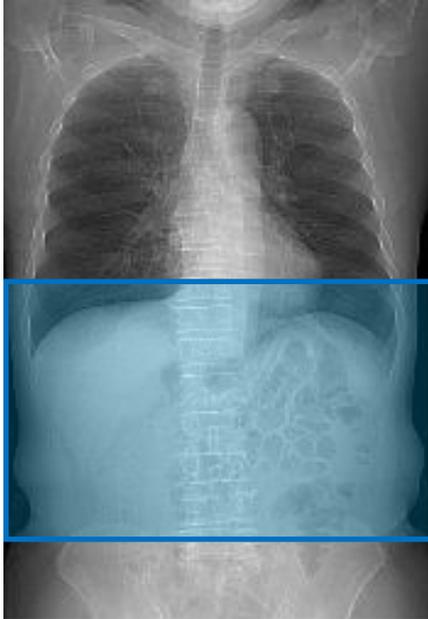

②膵実質相


肝上縁 2 cm 頭側から
十二指腸水平脚下縁
2 cm 尾側まで

* 単純から範囲を再設定



③遅延相(90sec)


肺尖 2 cm 頭側から腸骨上縁または
十二指腸水平脚 2cm 尾側のうちで
尾側の方

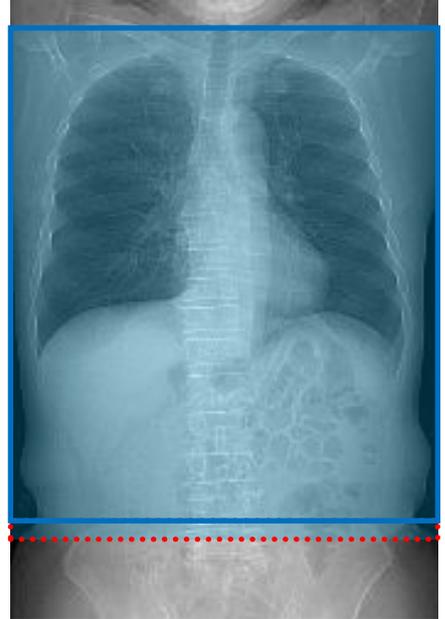

4103 胆・膵ダイナミック CT【炎症】(胸-骨盤部) 範囲)


①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
腸骨上縁 2 cm 尾側まで
* 過去画像や他院画像
がある場合は参照

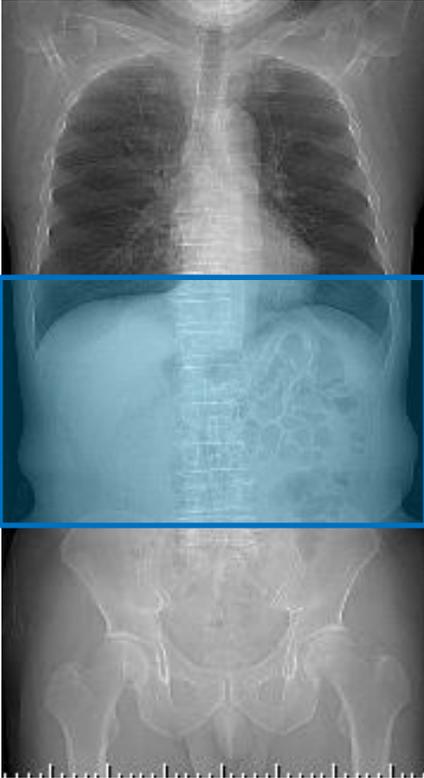


②膵実質相

肝上縁 2 cm 頭側から
十二指腸水平脚下縁
2 cm 尾側まで
* 単純から範囲を再設定

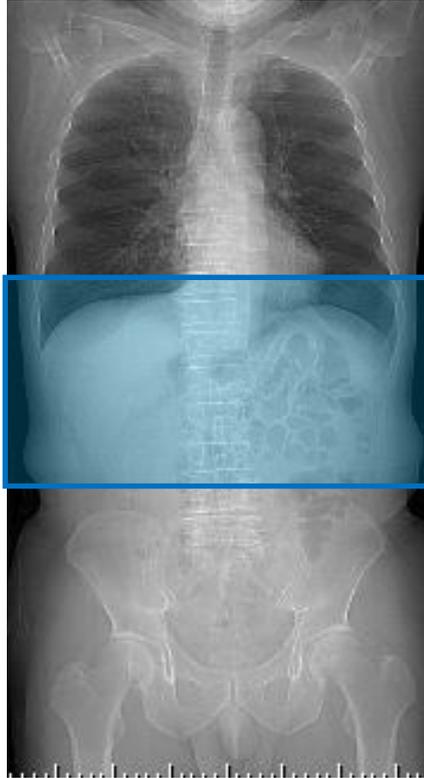

③遅延相(90sec)

肺尖 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで

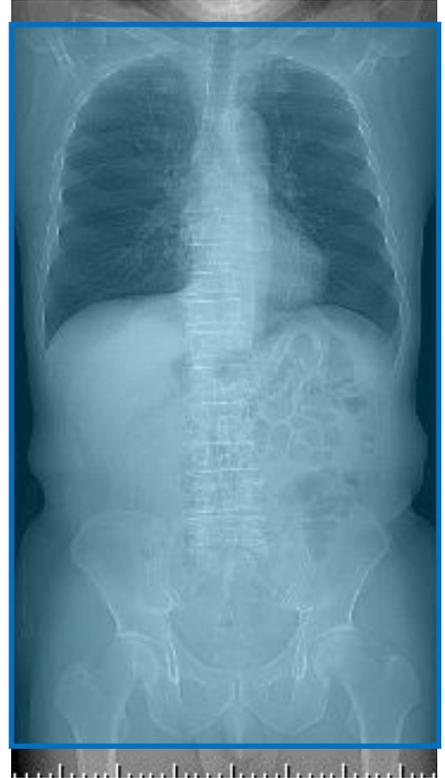

4110 胆・膵ダイナミック CT【腫瘍】

範囲)


①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
腸骨上縁 2 cm 尾側まで
* 過去画像や他院画像
がある場合は参照



②膵実質相

* 単純から範囲を再設定
肝上縁 2 cm 頭側から
十二指腸水平脚下縁
2 cm 尾側まで

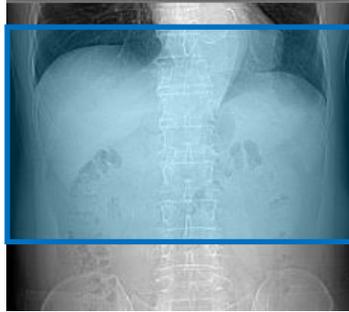

③門脈相

肝上縁 2 cm 頭側から
腸骨上縁または
十二指腸水平脚下縁 2cm
尾側のうちで尾側の方



④平衡相(3分)

②と同一範囲



4111 胆・膵ダイナミック CT【腫瘍】(腹-骨盤部)
範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
腸骨上縁 2 cm 尾側まで
* 過去画像や他院画像
がある場合は参照



②膵実質相

* 単純から範囲を再設定
肝上縁 2 cm 頭側から
十二指腸水平脚下縁
2 cm 尾側まで



③門脈相

肝上縁 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側



④平衡相(3分)

②と同一範囲



4112 胆・膵ダイナミック CT【腫瘍】(胸-腹部) 範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
腸骨上縁 2 cm 尾側まで
* 過去画像や他院画像
がある場合は参照



②膵実質相

* 単純から範囲を再設定
肝上縁 2 cm 頭側から
十二指腸水平脚下縁
2 cm 尾側まで




③門脈相

肺尖 2 cm 頭側から
腸骨上縁または
十二指腸水平脚 2cm
尾側のうちで尾側の方



④平衡相(3分)

②と同一範囲

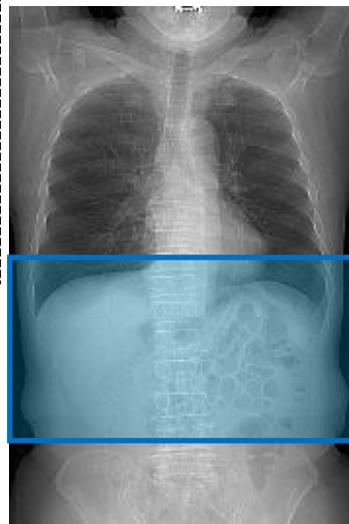


4113 胆・膵ダイナミック CT【腫瘍】(胸-骨盤部)

範囲)


①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
腸骨上縁 2 cm 尾側まで
* 過去画像や他院画像
がある場合は参照

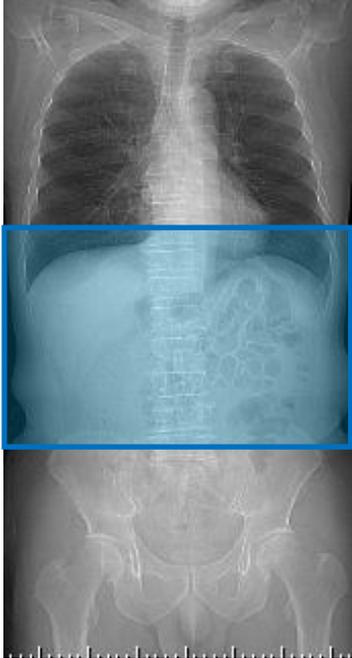

②膵実質相

* 単純から範囲を再設定
肝上縁 2 cm 頭側から
十二指腸水平脚下縁
2 cm 尾側まで

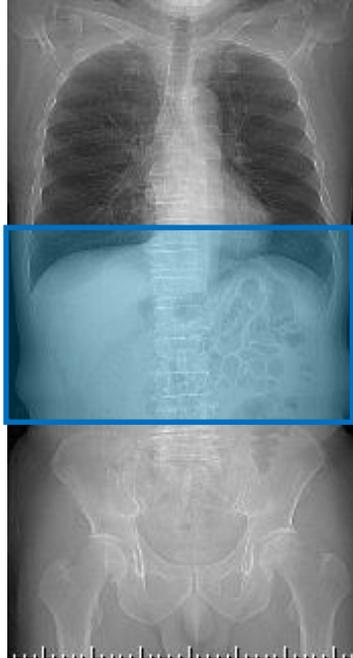


③門脈相

肺尖 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側



④平衡相(3分)

②と同一範囲

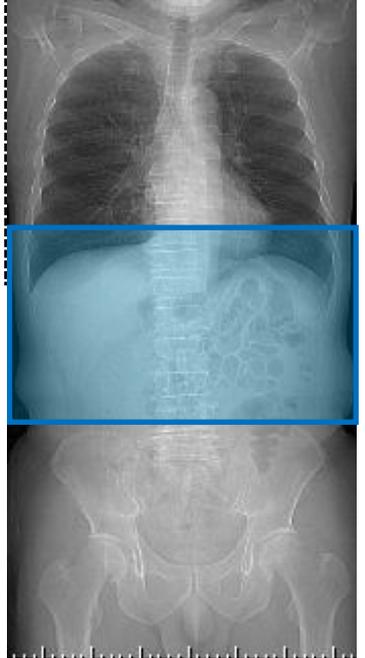

4120 胆・膵ダイナミック CT【術前】

範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
腸骨上縁 2 cm 尾側まで
* 過去画像や他院画像
がある場合は参照



②早期・③膵実質相

* 単純から範囲を再設定
肝上縁 2 cm 頭側から
十二指腸水平脚下縁
2 cm 尾側まで




④門脈相

肝上縁 2 cm 頭側から
腸骨上縁または
十二指腸水平脚 2cm
尾側のうちで尾側の方



⑤平衡相(3分)

②と同一範囲

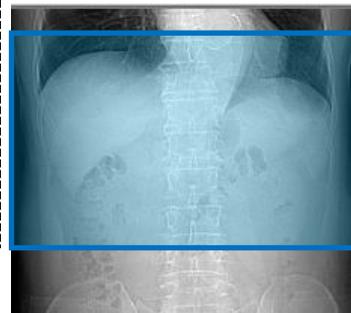

4121 胆・膵ダイナミック CT【術前】(腹-骨盤部)
範囲)


①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
腸骨上縁 2 cm 尾側まで
* 過去画像や他院画像
がある場合は参照



②早期 ・③膵実質相

* 単純から範囲を再設定
肝上縁 2 cm 頭側から
十二指腸水平脚下縁
2 cm 尾側まで

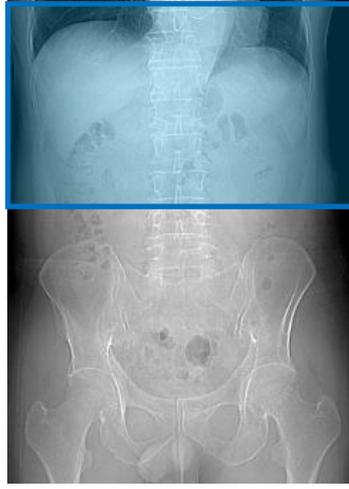

④門脈相

肝上縁 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側



⑤平衡相(3分)

②と同一範囲



4122 胆・膵ダイナミック CT【術前】(胸-腹部)

範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
腸骨上縁 2 cm 尾側まで
* 過去画像や他院画像
がある場合は参照



②早期 ・③膵実質相

* 単純から範囲を再設定
肝上縁 2 cm 頭側から
十二指腸水平脚下縁
2 cm 尾側まで




④門脈相

肺尖 2 cm 頭側から
腸骨上縁または
十二指腸水平脚 2cm
尾側のうちで尾側の方



⑤平衡相(3分)


②と同一範囲

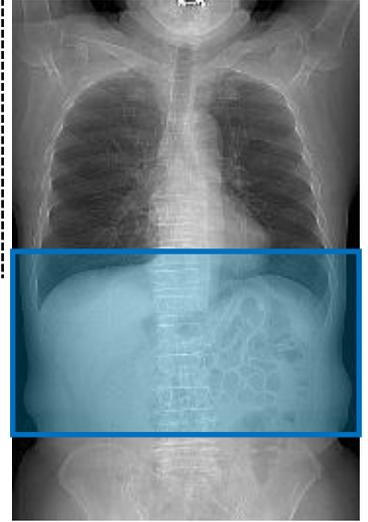

4123 胆・膵ダイナミック CT【術前】(胸-骨盤部)
範囲)


①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
腸骨上縁 2 cm 尾側まで
* 過去画像や他院画像
がある場合は参照

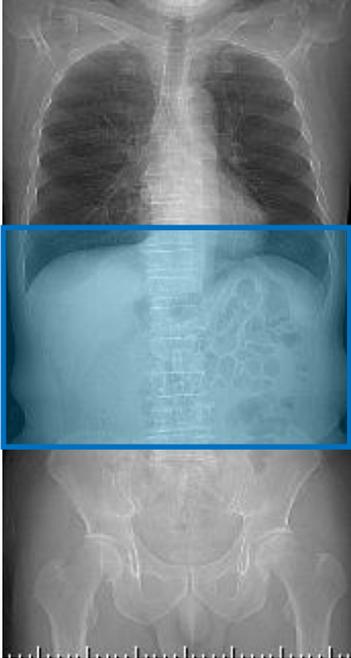

②早期 ・③膵実質相

* 単純から範囲を再設定
肝上縁 2 cm 頭側から
十二指腸水平脚下縁
2 cm 尾側まで

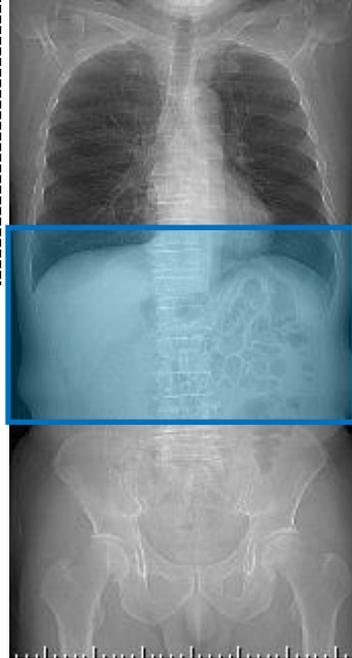


④門脈相

肺尖 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側



⑤平衡相(3分)

②と同一範囲

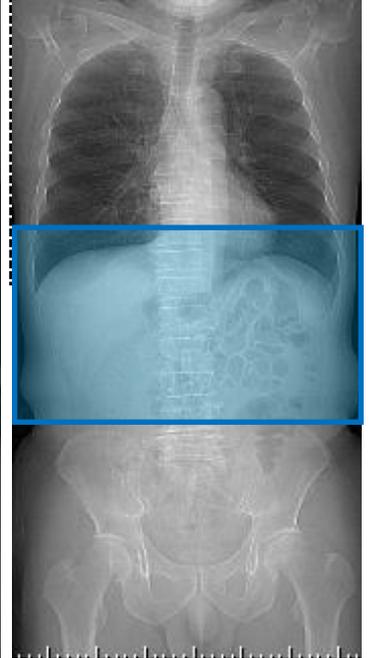


4200 胸-腹部 CT 造影【食道術前】

範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで

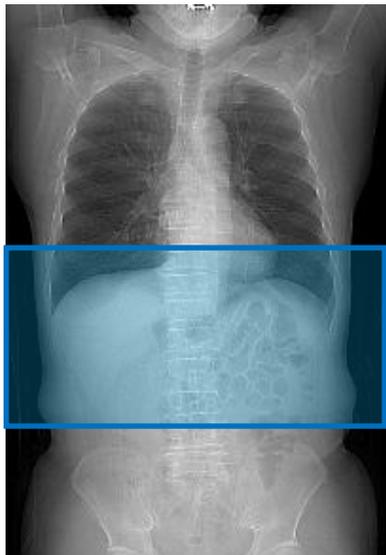

②早期動脈相

肺尖 2 cm 頭側から肺底部まで



③遅延相(90sec)

肺尖 2 cm 頭側から腸骨上縁まで




4201 胸-骨盤部 CT 造影【食道術前】

範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで

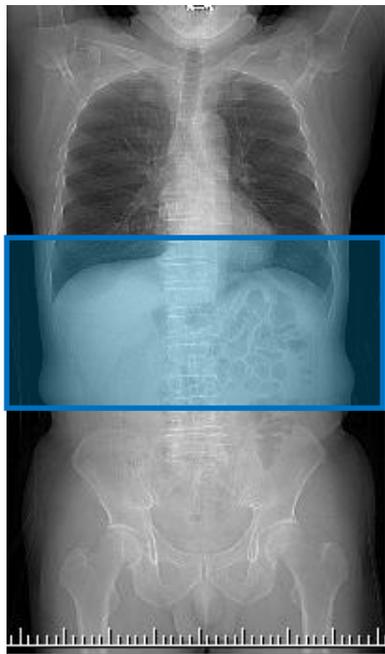

②早期動脈相

肺尖 2 cm 頭側から肺底部まで



③遅延相(90sec)

肺尖 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで




4202 頸-腹部 CT 造影【食道術前】

範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで

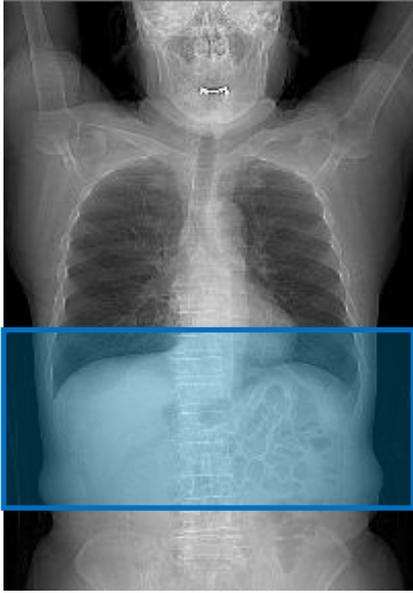

②早期動脈相

肺尖 2 cm 頭側から肺底部まで



③遅延相(90sec)

上咽頭上縁から腸骨上縁まで



4203 頸-骨盤部 CT 造影【食道術前】

範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで



②早期動脈相

肺尖 2 cm 頭側から肺底部まで



③遅延相(90sec)

上咽頭上縁から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで



4210 腹-骨盤部 CT 造影【胃術前】

範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側かつ
胃下縁 2 cm 尾側まで



②早期動脈相

単純と同一範囲
* 単純要確認



③遅延相(90sec)

肝上縁 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで




4211 胸-骨盤部 CT 造影【胃術前】

範囲)


①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側かつ
胃下縁 2 cm 尾側まで

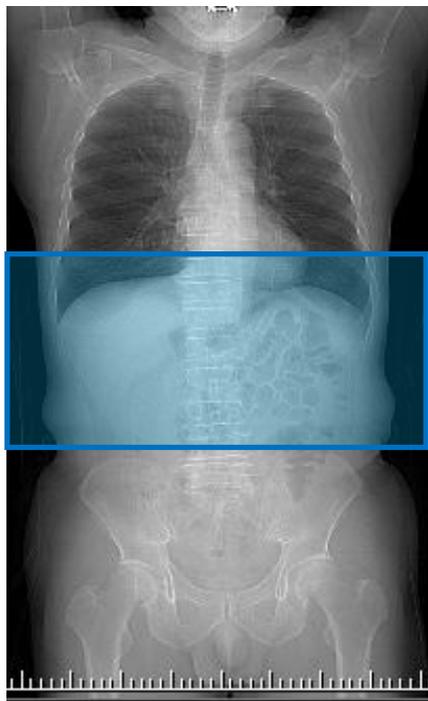

②早期動脈相

単純と同一範囲
*単純要確認

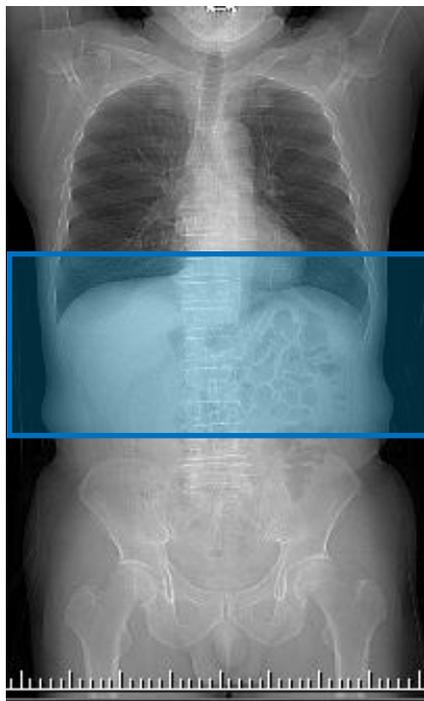

③遅延相(90sec)

肺尖 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで



4220 腹-骨盤部 CT 造影【大腸術前】

範囲)

①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで



②早期動脈相

肝上縁 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで



③遅延相(90sec)

②と同一範囲




4221 胸-骨盤部 CT 造影【大腸術前】

範囲)


①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
肝下縁 2 cm 尾側まで

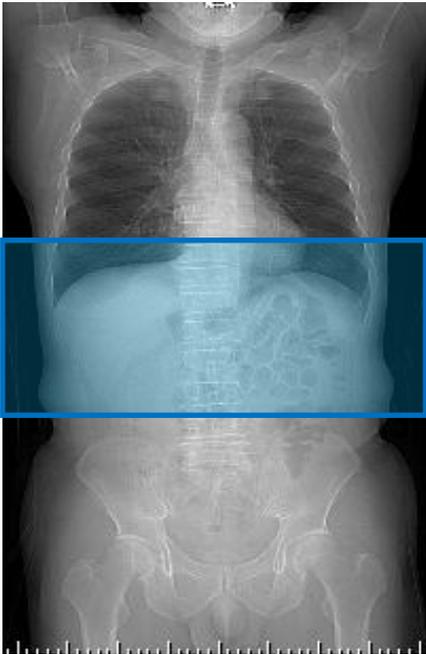

②早期動脈相

肝上縁 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで

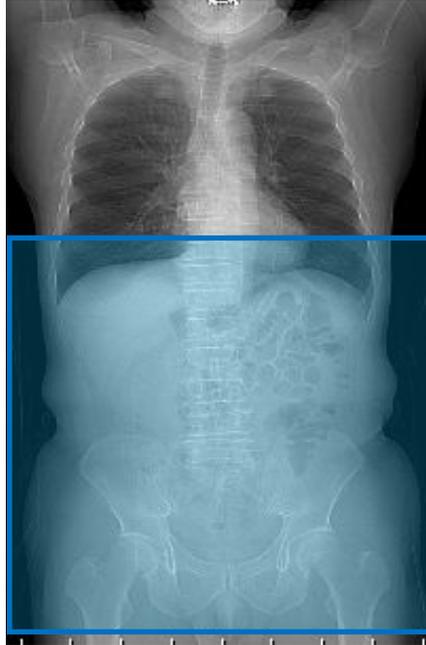

③遅延相(90sec)

肺尖 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで




4240 胸-骨盤部 CT 造影【腎移植術前】

範囲)

①早期動脈相

肝上縁 2 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで

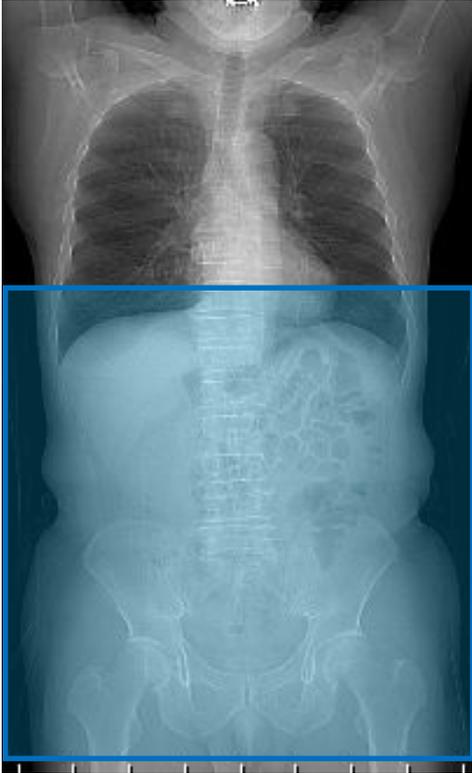

②遅延相(150sec)

肺尖 2 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで




4300 腎臓ダイナミック CT(腹部)

範囲)

①単純

左右横隔膜の高位側
上縁 3 cm 尾側から
腸骨上縁まで

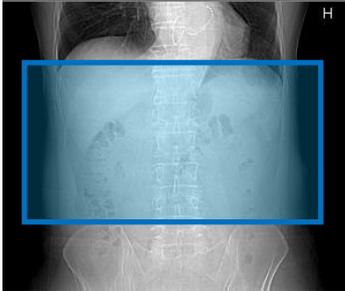


②皮髄相

* 単純から範囲を再設定
腎上縁 3 cm 頭側から
腎下縁 3 cm 尾側まで
* 腎動静脈起始部に注意




③実質相(90sec)

肝上縁 2 cm 頭側から
腸骨上縁または
腎下縁 3 cm 尾側のうち
尾側の方

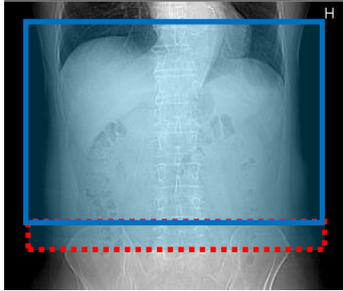

④平衡相(3分)

②と同一範囲

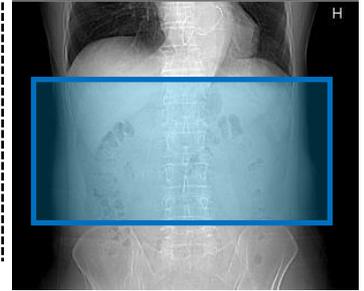


- * 低体重の場合は、腎下縁が腸骨稜より尾側に位置する可能性があるため、業務リーダーに疑義照会を行う。
- * 参照可能な過去画像等があれば、腎上縁かつ腎動静脈起始部の 3 cm 頭側から、腎下縁 3 cm 尾側まで

4301 腎臓ダイナミックCT(腹-骨盤部)

範囲)


①単純

左右横隔膜の高位側
上縁 3 cm 尾側から
腸骨上縁まで

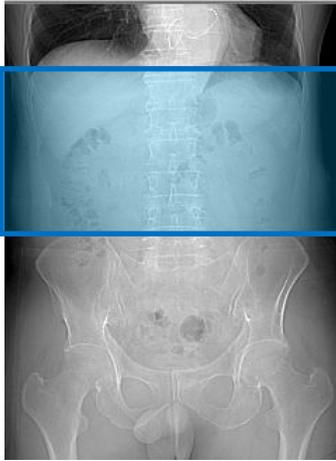

②皮髄相

* 単純から範囲を再設定
腎上縁 3 cm 頭側から
腎下縁 3 cm 尾側まで
* 腎動静脈起始部に注意

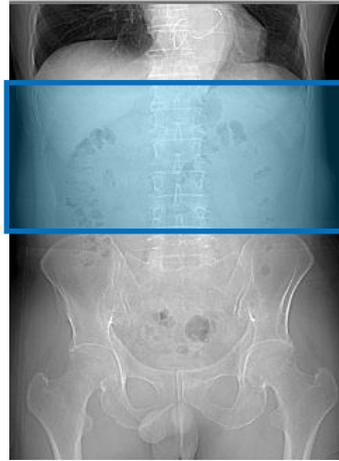


③実質相(90sec)

肝上縁 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側
まで



④平衡相(3分)

皮髄相と同一位置から
坐骨下縁 1 cm 尾側
まで

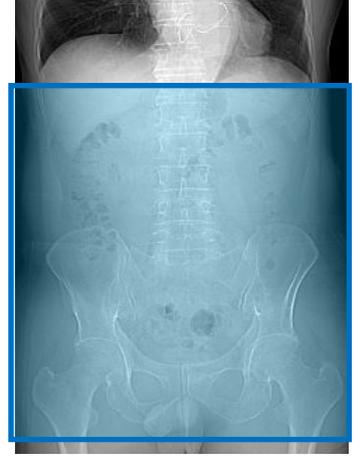

* 低体重の場合は、腎下縁が腸骨稜より尾側に位置する可能性があるため、業務リーダーに疑義照会を行う。
* 参照可能な過去画像等があれば、腎上縁かつ腎動静脈起始部の 3 cm 頭側から、腎下縁 3 cm 尾側まで

4302 腎臓ダイナミック CT(胸-骨盤部)

範囲)


①単純

左右横隔膜の高位側
上縁 3 cm 尾側から
腸骨上縁まで



②皮髄相

* 単純から範囲を再設定
腎上縁 3 cm 頭側から
腎下縁 3 cm 尾側まで
* 腎動静脈起始部に注意

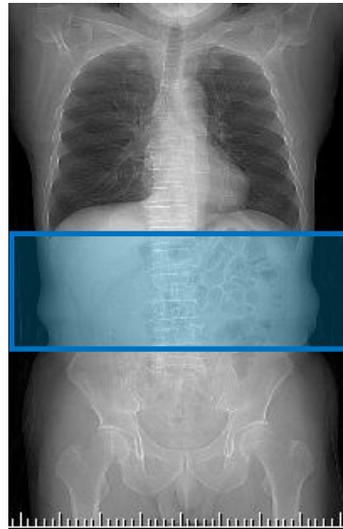


③実質相(90sec)

肺尖 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側
まで



④平衡相(3分)

皮髄相と同一位置から
坐骨下縁 1 cm 尾側
まで

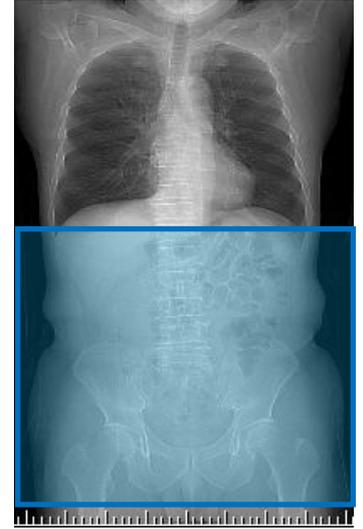

- * 低体重の場合は、腎下縁が腸骨稜より尾側に位置する可能性があるため、業務リーダーに疑義照会を行う。
- * 参照可能な過去画像等があれば、腎上縁かつ腎動静脈起始部の 3 cm 頭側から、腎下縁 3 cm 尾側まで

4400 腹-骨盤部ダイナミック CT

範囲)

①単純・②動脈相・③遅延相 : 肝上縁 2 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで

①単純



②動脈相




③遅延相 (90sec)



4401 腹-骨盤部ダイミック CT(胸-骨盤部 範囲)


①単純

肝上縁 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで

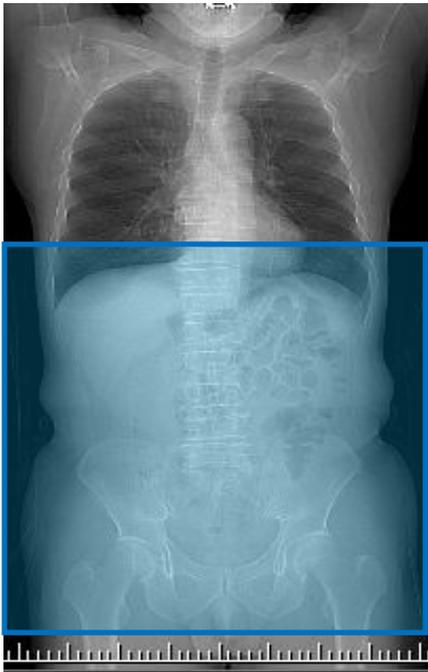

②動脈相

単純と同一範囲

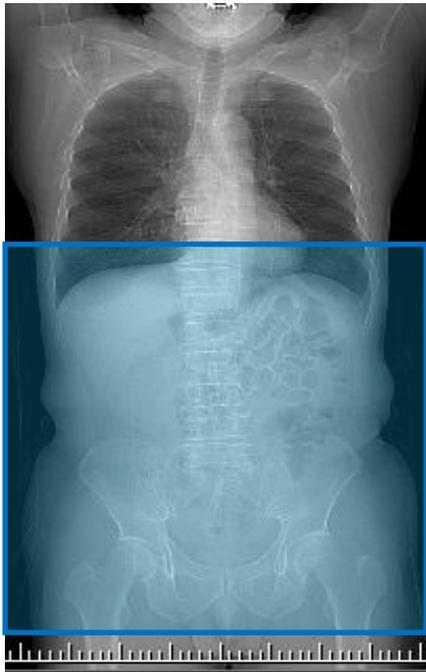

③遅延相(90sec)

肺尖 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで




4500 副腎静脈サンプリング前 CT

範囲)

①単純

上縁) 左右横隔膜の高い方の 1cm 下

下縁) L4 上縁

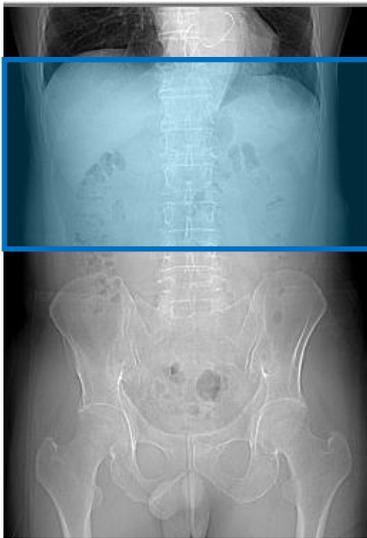

②副腎静脈相

単純画像から以下の範囲に絞る

上縁) 両側副腎上縁の高い方より 3cm 上

下縁) 左腎静脈の全走行を含む



③平衡相(120sec)

肝上縁 2cm 頭側から


坐骨下縁 1cm 尾側まで



4600 肺塞栓 CT【early BH】

4601 肺塞栓 CT【late BH】

範囲) 肺動脈相: 肺尖部 2 cm 頭側から肺底部まで

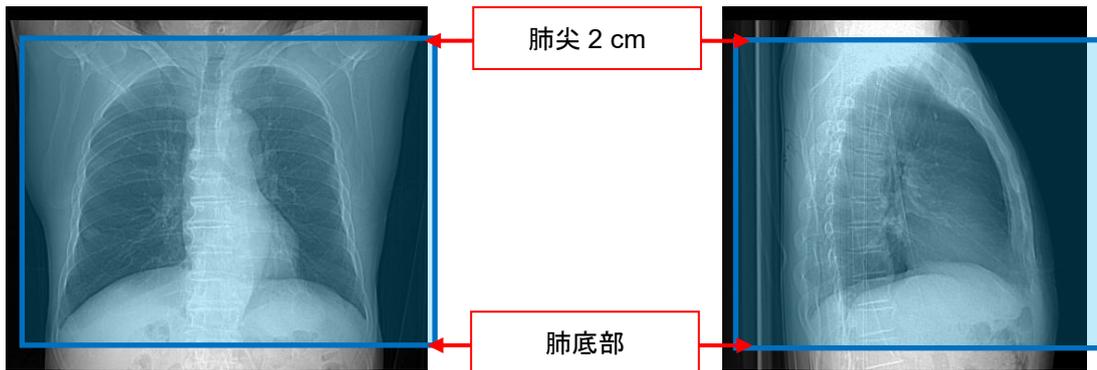

4610 肺塞栓+深部静脈 CT【early BH】

4611 肺塞栓+深部静脈 CT【late BH】

範囲) (GE・Flash)

①肺動脈相

肺尖部 2 cm 頭側から
肺底部まで



(GE)

②遅延相(5分後)


腸骨上縁から
下腿骨下縁 2 cm
遠位まで



(Flash)

②遅延相 1(5分後)


腸骨上縁から
大転子上縁と大腿骨下縁
の中位まで

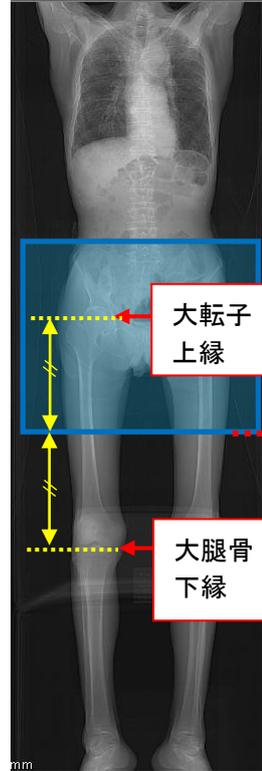

(Flash)

③遅延相 2

大転子上縁と
大腿骨下縁の中位から
下腿骨下縁 2 cm 遠位まで

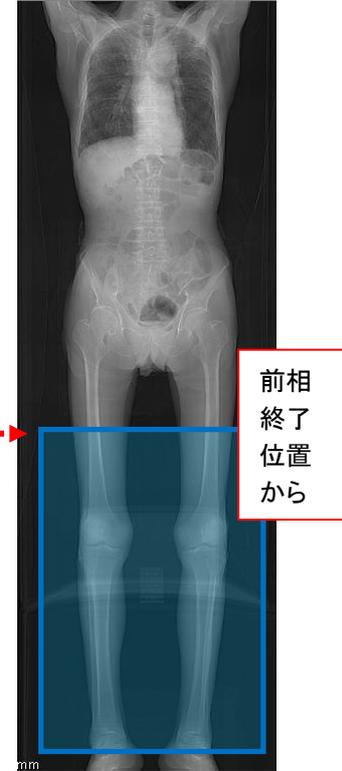

4620 胸-骨盤部 CT 造影【肺塞栓精査 early BH】

4621 胸-骨盤部 CT 造影【肺塞栓精査 late BH】

範囲)①肺動脈相

肺尖 2 cm 頭側から肺底部まで



②遅延相(1分30秒後)

肝上縁 2 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで



CTA(頭頸部以外)

【頸部～】

5000 頸-骨盤部 CTA 単純

5001 頸-骨盤部 CTA

5003 頸-骨盤部 CTA(単純追加)

範囲) ①単純: Pre Check にて指定

②動脈相・③遅延相: 第3頸椎椎体上縁から坐骨下縁 1 cm 尾側まで




5010 頸-骨盤部 CTA (TAVI 術前)

範囲)

①単純


気管分岐部から
心臓下縁まで

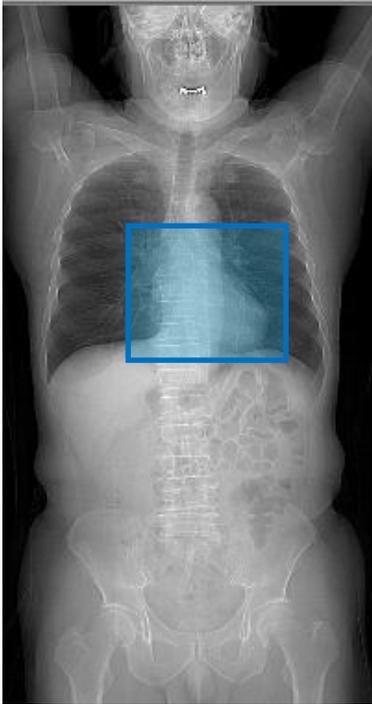

②冠動脈相

[心電図同期撮影]

気管分岐部から
心臓下縁より5スライス尾側まで

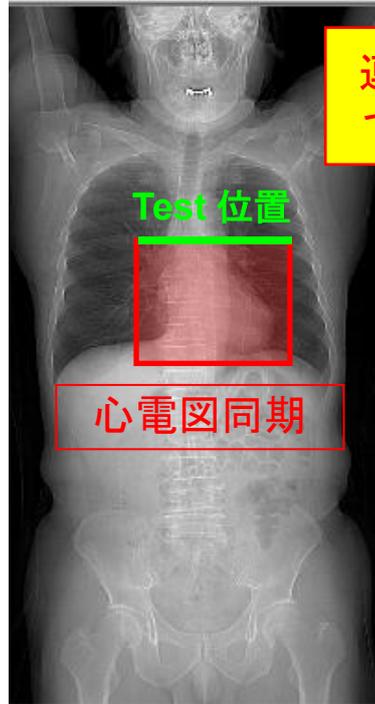

連続で撮影
セルフ合図

③動脈相

[非同期]


第3頸椎椎体上縁から
坐骨下縁1cm尾側まで



5011 頸-骨盤部 CTA(TAVI 術前_CABG 後)
範囲)


①単純

気管分岐部から
心臓下縁まで

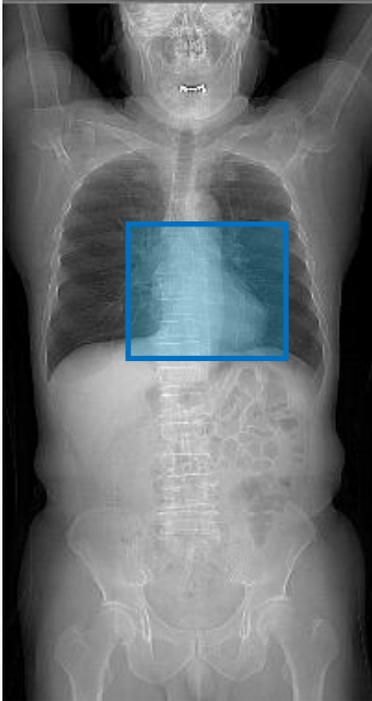

②冠動脈相

[心電図同期撮影]
胸鎖関節上縁 1 cm 頭側から
心膜下縁より 5 スライス尾側まで

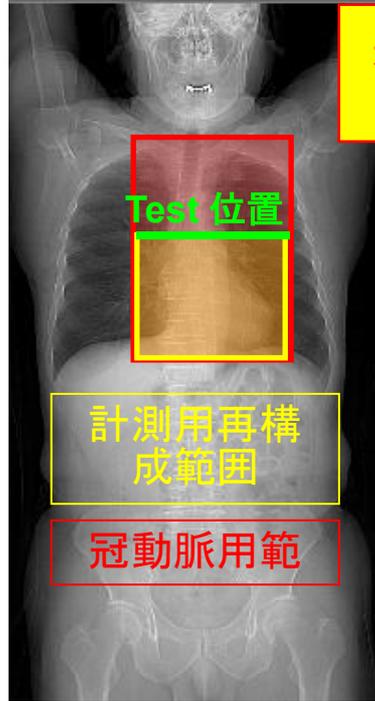

③動脈相

[非同期]
第 3 頸椎椎体上縁から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで



連続で撮影
セルフ合図

【胸部～】


5100 胸部 CTA 単純

5101 胸部 CTA

5103 胸部 CTA(単純追加)



範囲) ①単純: Pre Check にて指定

②動脈相・③遅延相: 肺尖部 2 cm 頭側から肺底部まで

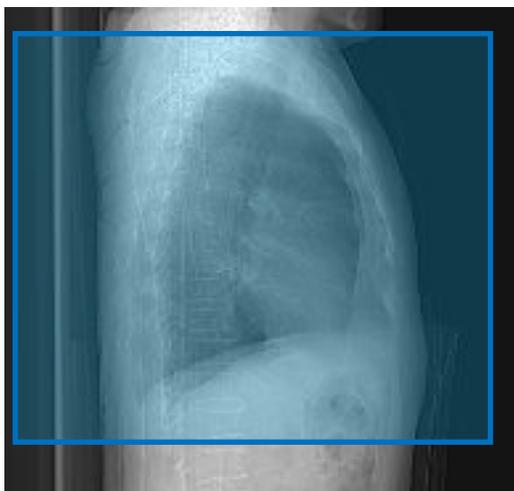

5105 胸部 CTA(肺術前)

範囲) ①肺動脈相・②肺静脈相: 肺尖部 2 cm 頭側から肺底部まで

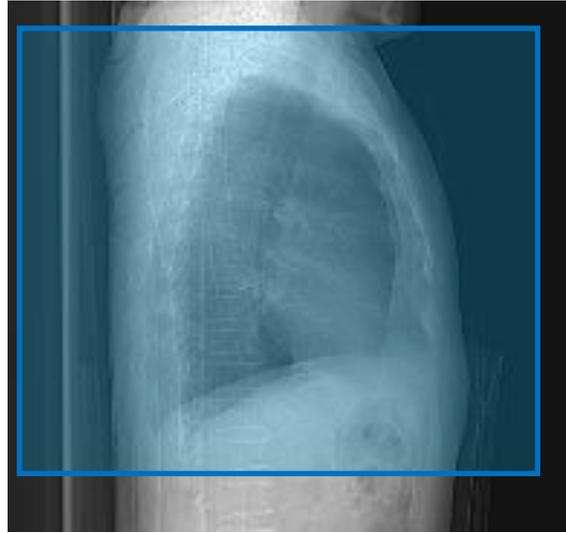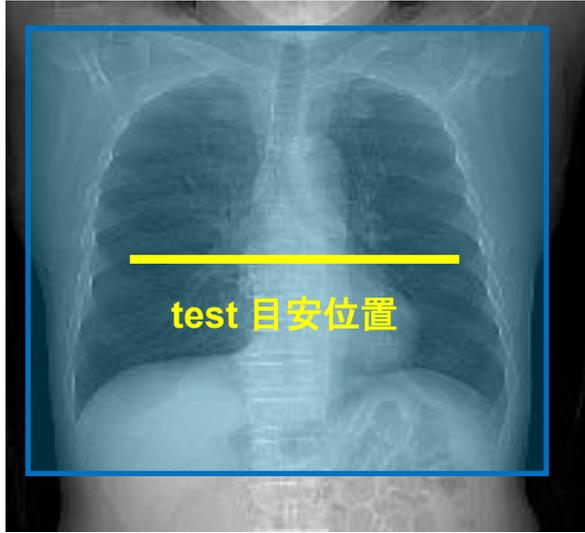

5106 胸部 CTA(喀血 IVR 前)


範囲) ①単純 & ②肺動脈相

肺尖から肺底部まで



③動脈相

肺尖部 2 cm 頭側から
第 1 腰椎椎体下縁まで

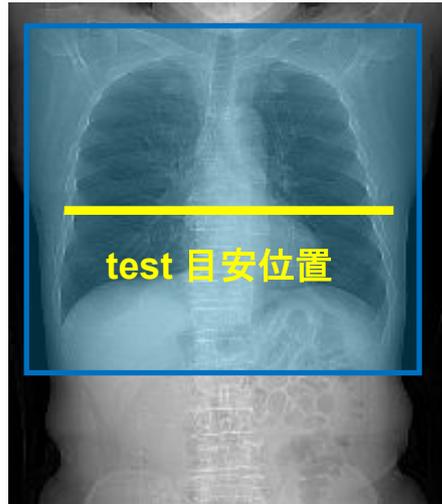


5108 胸部 CTA(心電図同期)

範囲)全相: **Precheck** で指定された範囲

5109 胸部 CTA(動脈管評価)

範囲) **大動脈弓部上縁 2cm 頭側**から**心臓下縁**まで

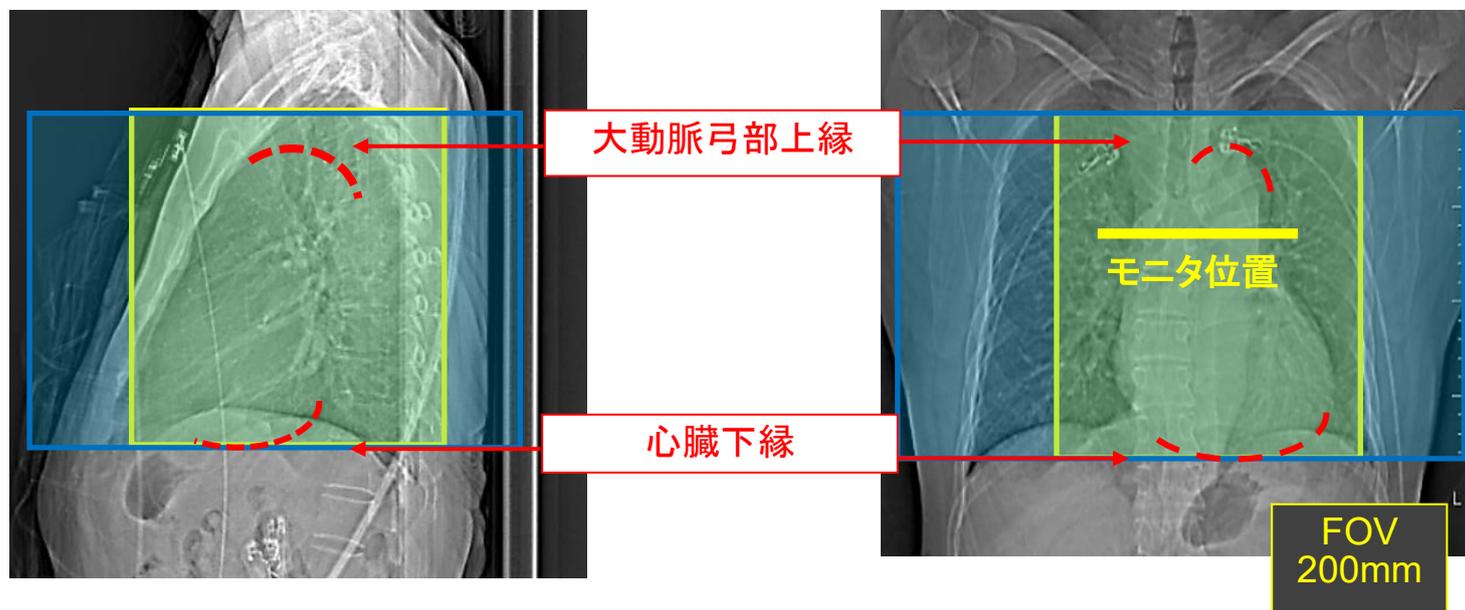

5110 胸-骨盤部 CTA 単純

5111 胸-骨盤部 CTA

5113 胸-骨盤部 CTA(単純追加)

範囲) ①単純: Pre Check にて指定

②動脈相・③遅延相: 肺尖部 2 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで




5116 胸-骨盤部 CTA(心電図同期)

範囲) ①胸部動脈相


肺尖部 2 cm 頭側から
心臓下縁まで

②腹部動脈相

胸部動脈相の終了位置より 1cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで

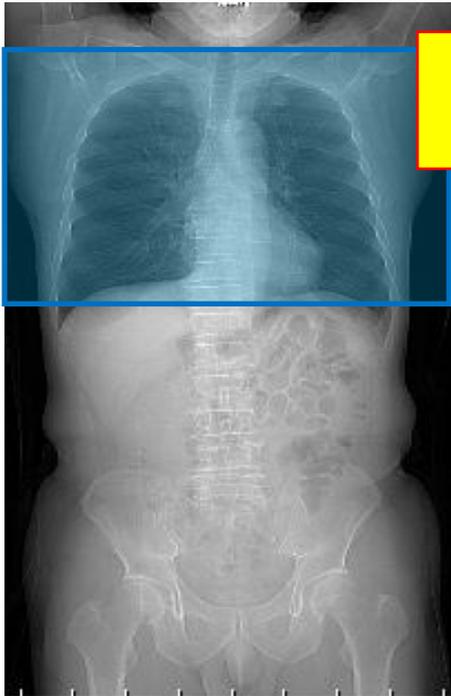

連続で撮影
セルフ合図

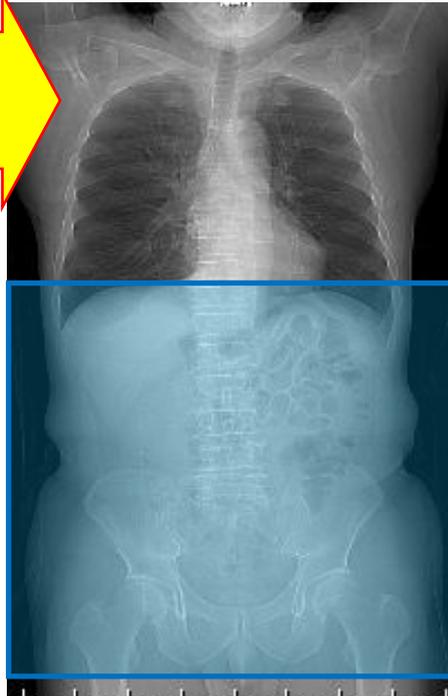

③遅延相

肺尖部 2 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで



5120 胸-下肢 CTA 単純

範囲) 肺尖部 2 cm 頭側から下腿骨下縁 2 cm 遠位まで



5121 胸-下肢 CTA

範囲) ①動脈相

肺尖部 2 cm 頭側から
下腿骨下縁 2 cm 遠位まで



②遅延相

肺尖部 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで



5123 胸-下肢 CTA(ASO)

範囲)①動脈相

肺尖部 2 cm 頭側から
下腿骨下縁 2 cm 遠位まで



②遅延相

動脈相と同一範囲



5125 胸-下肢 CTA(単純追加)

範囲)①単純:Pre Checkにて指定

②動脈相

肺尖部 2 cm 頭側から
下腿骨下縁 2 cm 遠位まで



③遅延相

肺尖部 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで



5127 胸-下肢 CTA(ASO 単純追加)

範囲)①単純: Pre Check にて指定

②動脈相

肺尖部 2 cm 頭側から
下腿骨下縁 2 cm 遠位まで



③遅延相

動脈相と同一範囲



5150 胸-腹部 CTA 単純

5151 胸-腹部 CTA

5153 胸-腹部 CTA(単純追加)

範囲) ①単純: Pre Check にて指定

②動脈相・③遅延相: 肺尖部 2 cm 頭側から岬角まで

* 参照可能な画像があれば、肺尖部 2 cm 頭側から総腸骨動脈分岐部 2cm 尾側まで




5200 腹-骨盤部 CTA 単純

5201 腹-骨盤部 CTA

5203 腹-骨盤部 CTA(単純追加)

範囲) ①単純: Pre Check にて指定

②動脈相・③遅延相: 肝上縁 2 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで

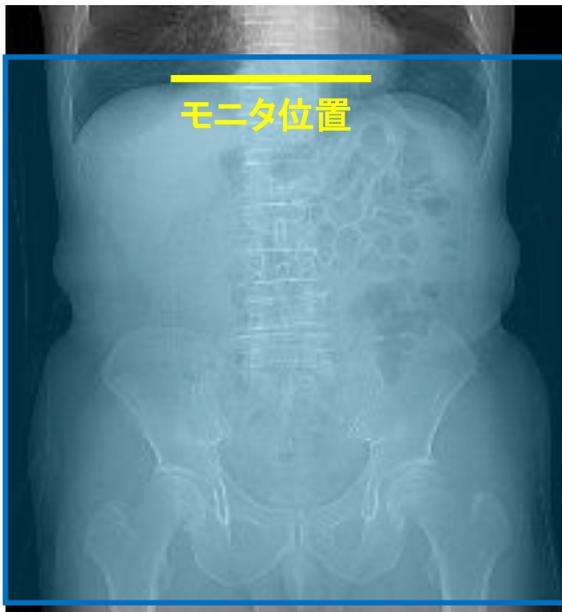

5210 腹-下肢 CTA 単純

範囲) 肝上縁 2 cm 頭側から下腿骨下縁 2 cm 遠位まで



5211 腹-下肢 CTA

範囲) ①動脈相

肝上縁 2 cm 頭側から
下腿骨下縁 2 cm 遠位まで



②遅延相

肝上縁 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで



5213 腹-下肢 CTA(ASO)

範囲)①動脈相

肝上縁 2 cm 頭側から
下腿骨下縁 2 cm 遠位まで



②遅延相

動脈相と同一範囲



5215 腹-下肢 CTA(単純追加)

範囲)①単純: Pre Check にて指定

②動脈相

肝上縁 2 cm 頭側から
下腿骨下縁 2 cm 遠位まで



③遅延相

肝上縁 2 cm 頭側から
坐骨下縁 1 cm 尾側まで



5217 腹-下肢 CTA(ASO 単純追加)

範囲)①単純:Pre Checkにて指定

②動脈相

肝上縁 2 cm 頭側から
下腿骨下縁 2 cm 遠位まで




③遅延相

動脈相と同一範囲



5251 腹部 CTA

範囲) ①動脈相・②遅延相: 肝上縁 2 cm 頭側から腸骨上縁まで

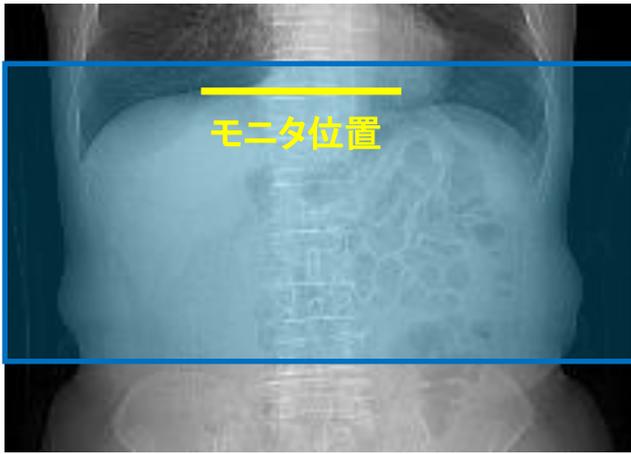

5300 骨盤-下肢 CTA 単純

5301 骨盤-下肢 CTA

5303 骨盤-下肢 CTA (単純追加)

範囲) ①単純: Pre Check にて指定

②動脈相・③遅延相: 腸骨上縁 2 cm 頭側から下腿骨下縁 2 cm 遠位まで



5351 骨盤部 CTA


範囲) 腸骨上縁 2 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで



【その他】

5400 Adamkiewicz

範囲) 第6胸椎椎体上縁から第3腰椎椎体下縁まで

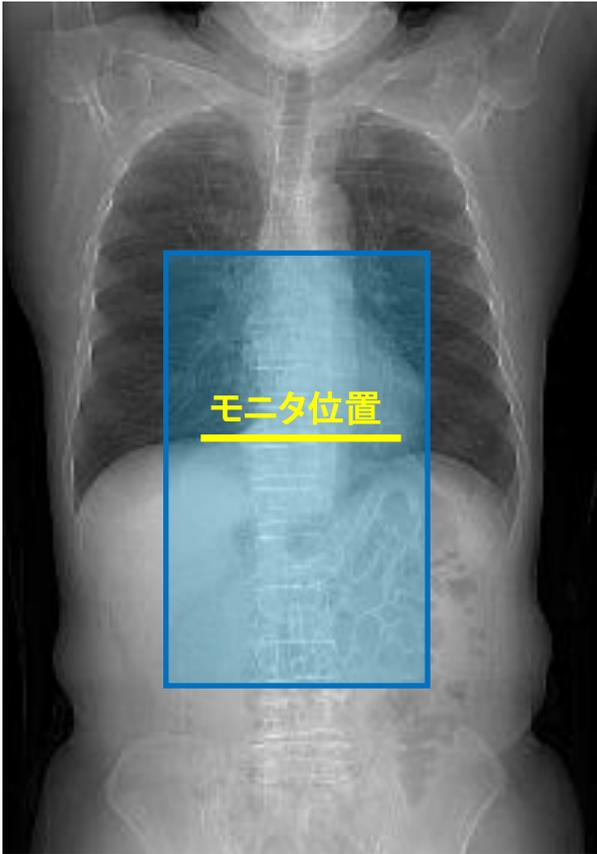

5501 右上肢 CTA

範囲)①動脈相・②遅延相: Precheck で指定された範囲

Precheck) 右上肢全体の場合、「肩鎖関節上縁 3 cm 頭側から手指先まで」と記載



5502 右上肢 CTA(シャント) 尾頭方向に撮影

範囲) ①動脈相・②遅延相 : 右上肢を下げ、**中手骨下端から肩鎖関節上縁 3 cm 頭側まで**




尾頭方向に撮影

5511 左上肢 CTA



範囲) ①動脈相・②遅延相: Precheck で指定された範囲

Precheck) 右上肢全体の場合、「肩鎖関節上縁 3 cm 頭側から手指先まで」と記載

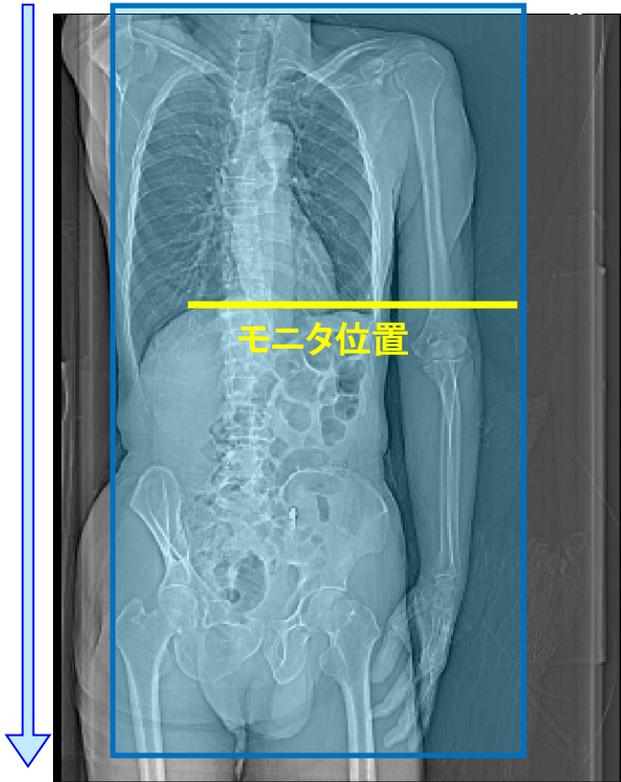

5512 左上肢 CTA(シャント) 尾頭方向に撮影

範囲) ①動脈相・②遅延相 : 左上肢を下げ、**中手骨下端から肩鎖関節上縁 3 cm 頭側まで**

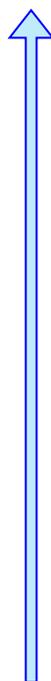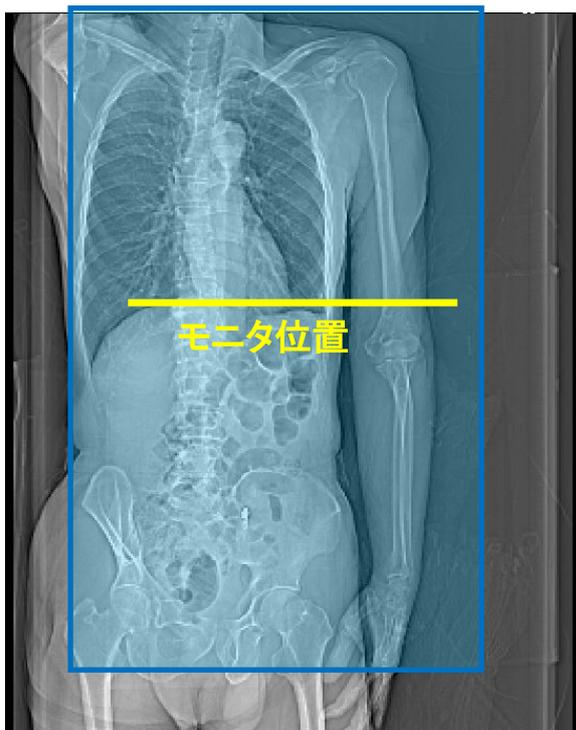

尾頭方向に撮影

5601 下肢 CTA

範囲)①動脈相・②遅延相 : Pre Check にて範囲を指定

【冠動脈】

5700 冠動脈 CTA

範囲) ①単純


気管分岐部から心臓下縁まで



②CTA: 単純画像より下記の範囲に設定する。

(上縁) 冠動脈上縁より 5 スライス頭側まで

(下縁) 心膜下縁より 5 スライス尾側まで

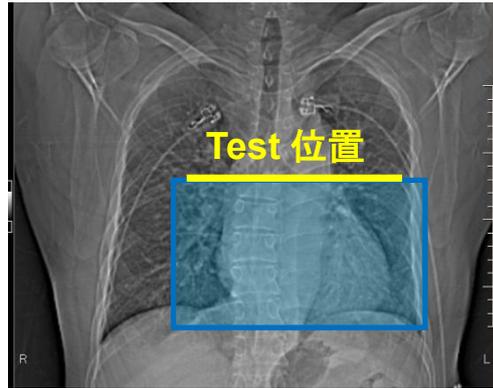

5710 冠動脈 CTA(CABG 後)

範囲)

①単純

気管分岐部から心臓下縁まで



②CTA: 内胸動脈をグラフト血管に使用しているかどうか。


(使用)

胸鎖関節上縁 1cm 上～心膜下縁より 5 スライス下まで

(不使用)

手術記録よりグラフト血管の起始部(吻合部)から


心膜下縁より 5 スライス尾側まで

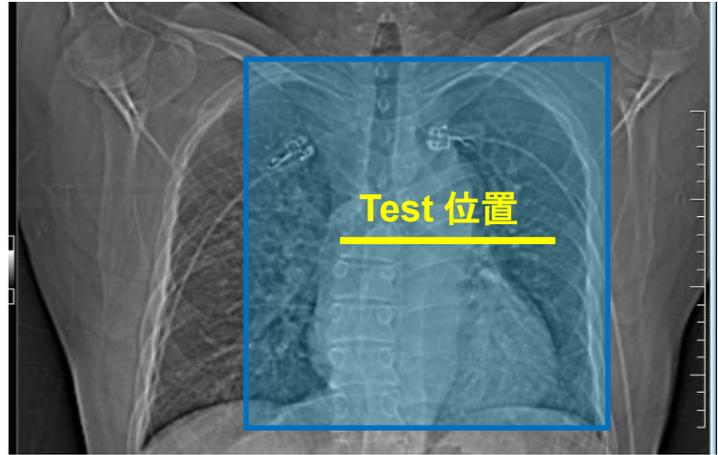

【アブレーション術前・左心耳カテーテル術前】

5800 胸部 CTA(アブレーション術前)

範囲) 気管分岐部 2 cm 頭側から心臓下縁まで

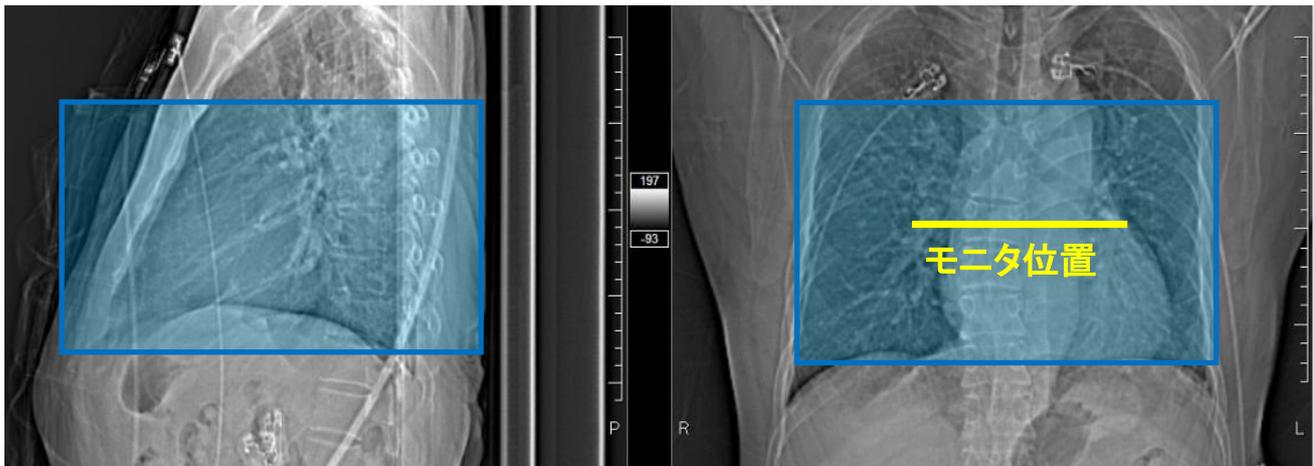


5810 胸部 CTA(アブレーション術前)+遅延相

5820 胸部 CTA(左心耳カテーテル術前)


範囲)

①動脈相: 気管分岐部 2 cm 頭側から心臓下縁まで

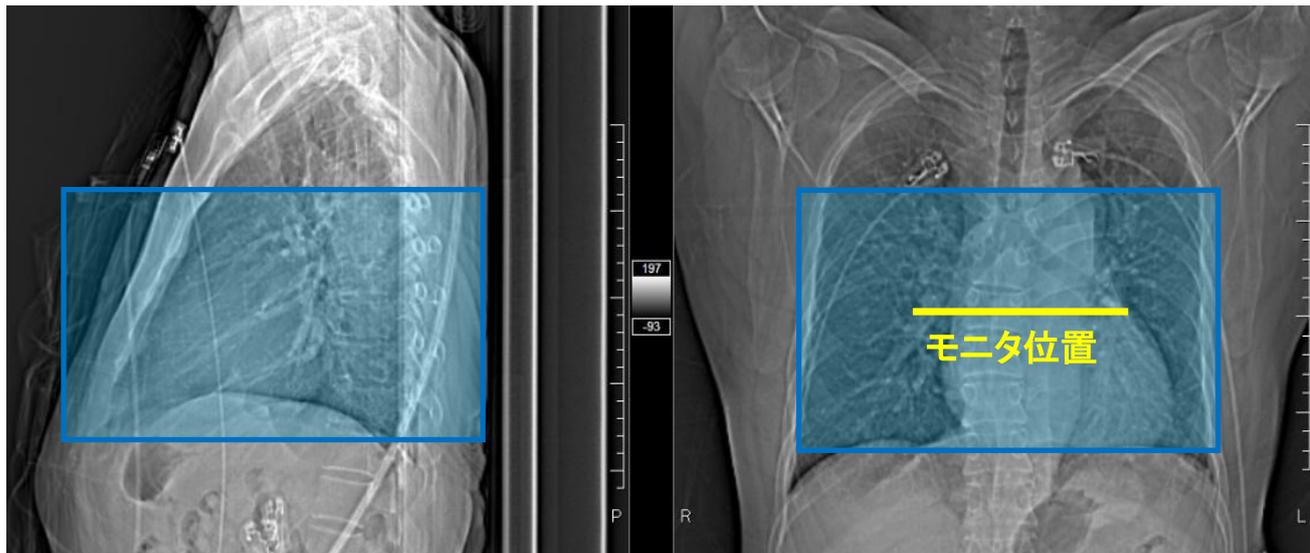


②遅延相(90sec 後): 左心耳上縁 2cm 頭側から左房下縁まで

(動脈相の画像から範囲を設定)

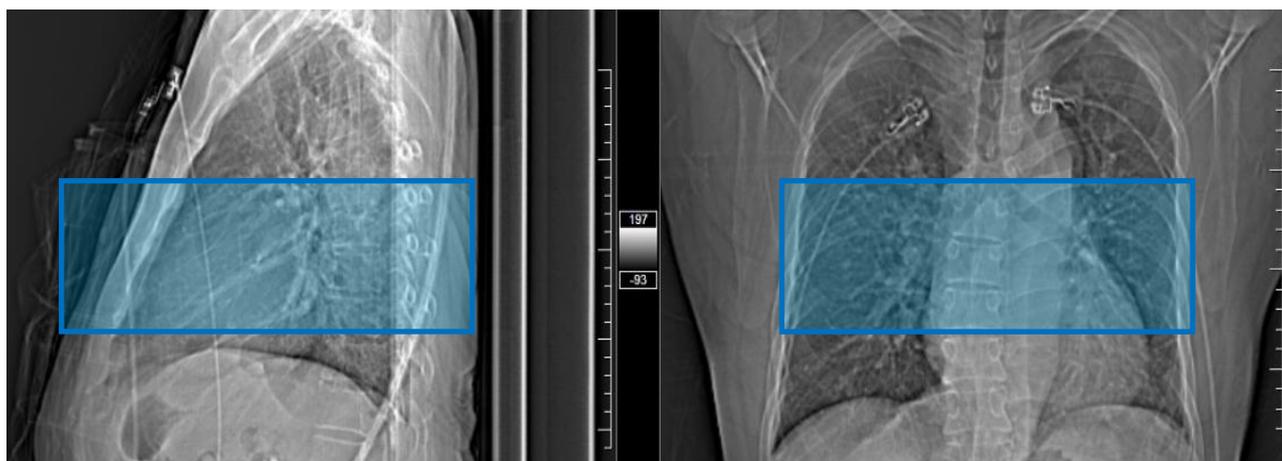

5830 胸部 CTA (TPVI 術前)

範囲) ①動脈相: 大動脈弓上縁 1 cm 尾側から右第 2 弓下縁まで


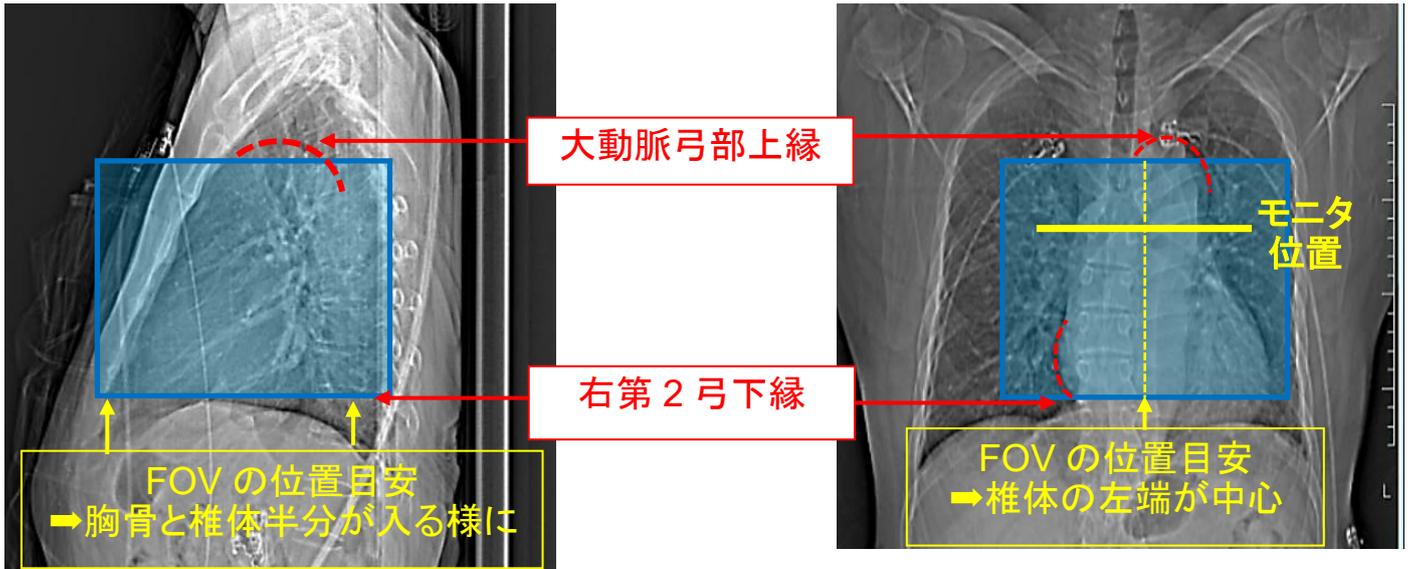


脊椎

6000 頸椎 CT 単純

6001 頸椎 CT 造影



範囲) 大後頭孔後縁 2 cm 頭側から第 2 肋骨基部下縁まで

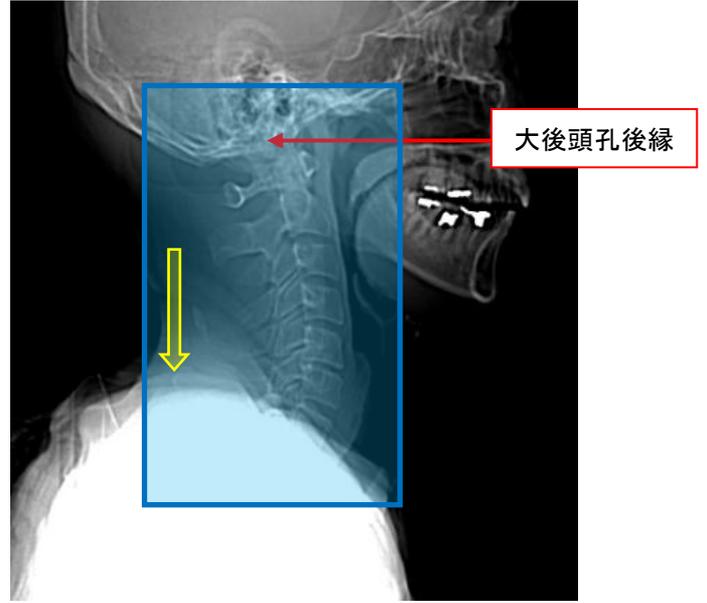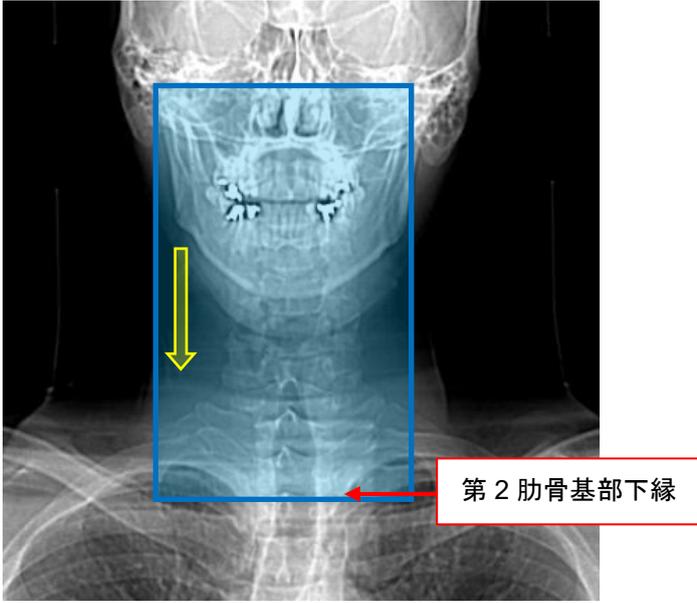

6010 胸椎 CT 単純

6011 胸椎 CT 造影


範囲) 第 1 胸椎横突起上縁 2 cm 頭側から第 1 腰椎椎体下縁まで

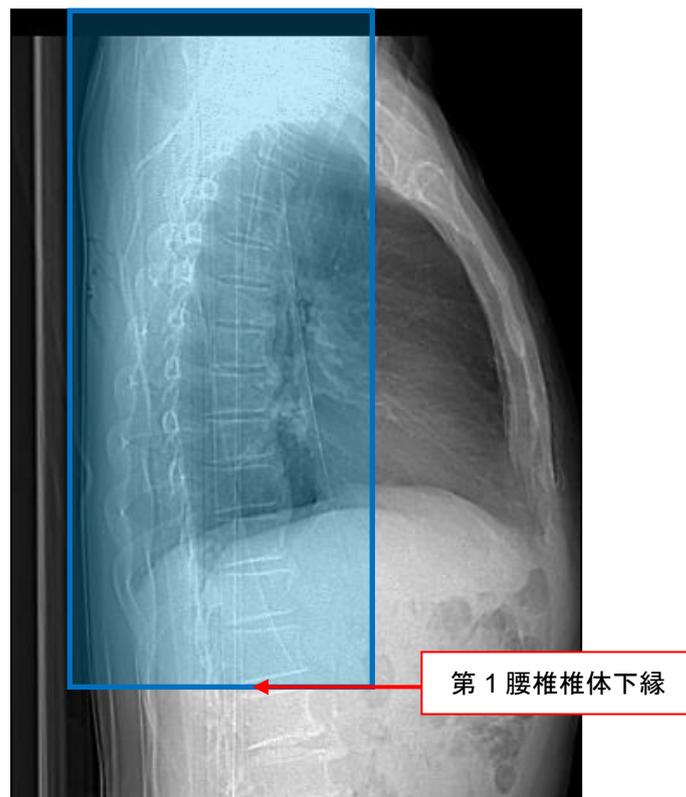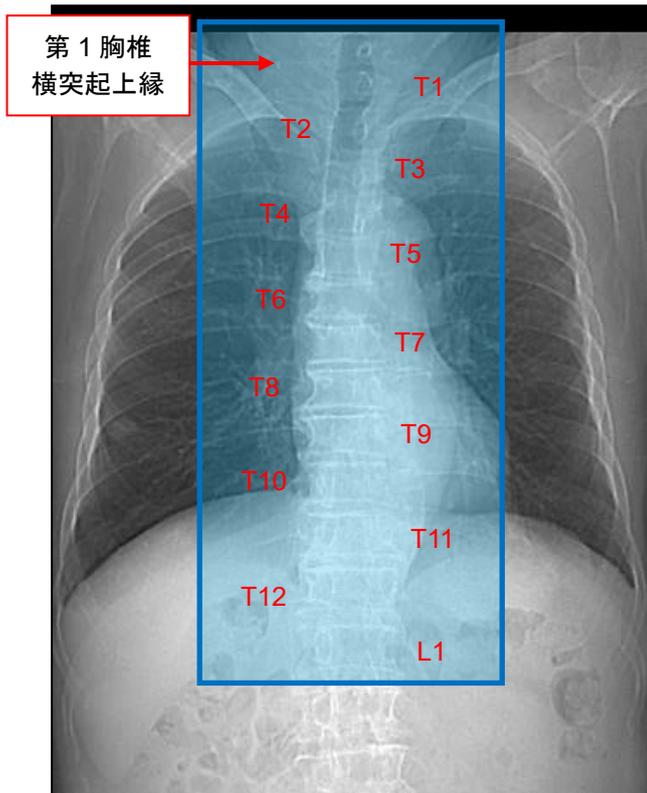

6020 腰椎 CT 単純

6021 腰椎 CT 造影



範囲) 第 12 胸椎椎体上縁から岬角 2 cm 尾側まで

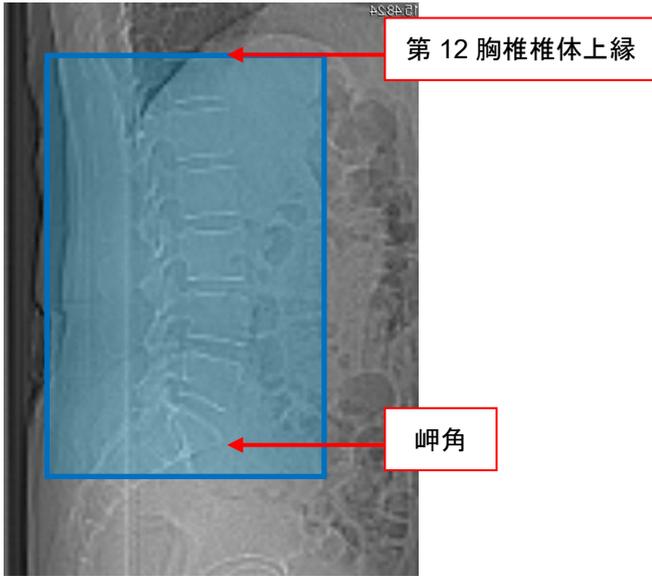

6030 頸胸椎 CT 単純

6031 頸胸椎 CT 造影



範囲) 大後頭孔後縁 2 cm 頭側から第 1 腰椎椎体下縁まで

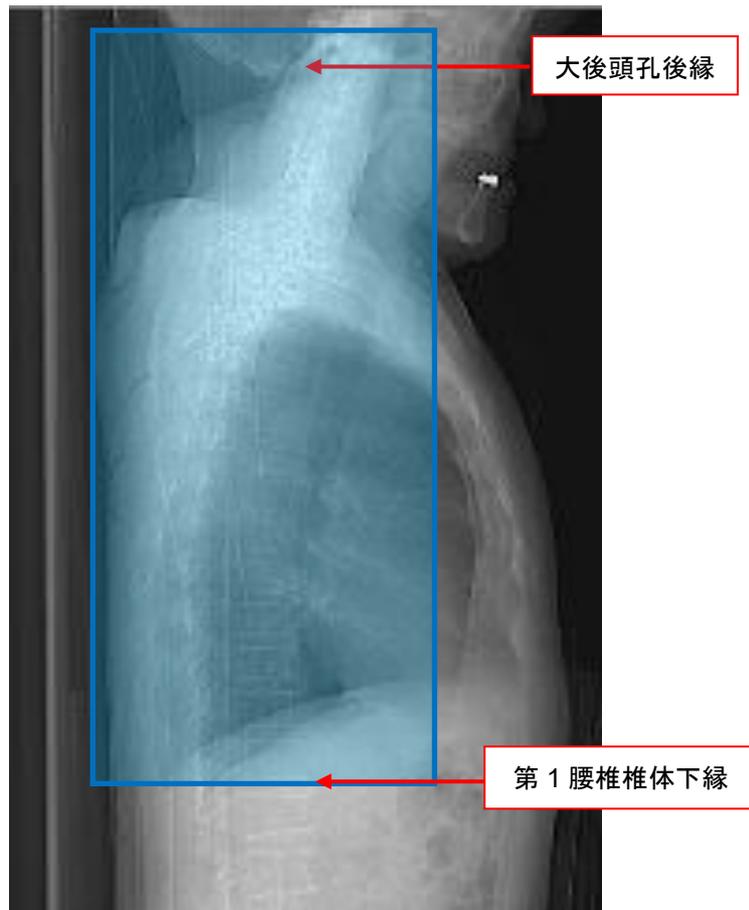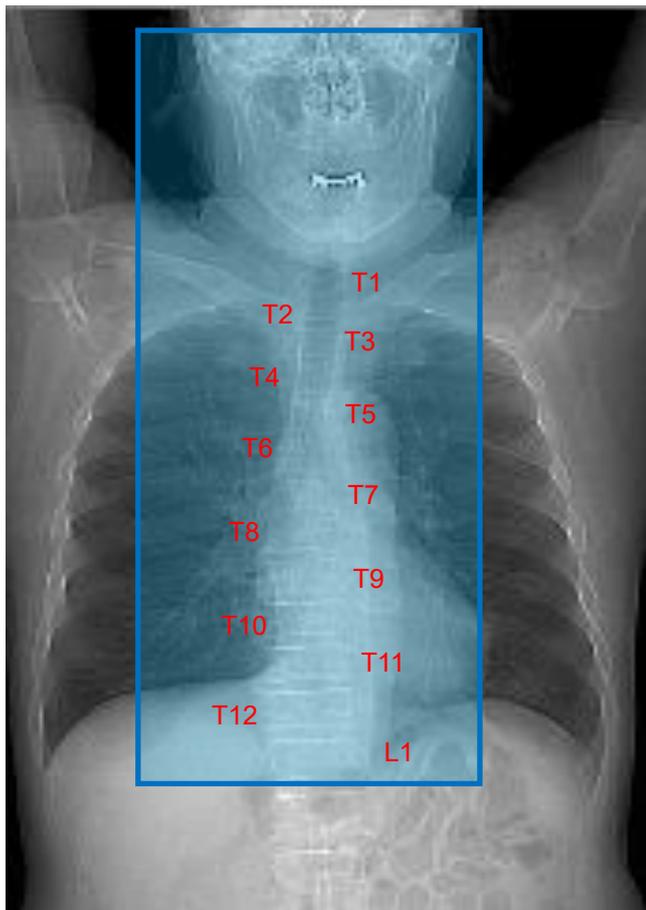

6040 胸腰椎 CT 単純

6041 胸腰椎 CT 造影


範囲) 第 1 胸椎横突起上縁 2 cm 頭側から岬角 2 cm 尾側まで

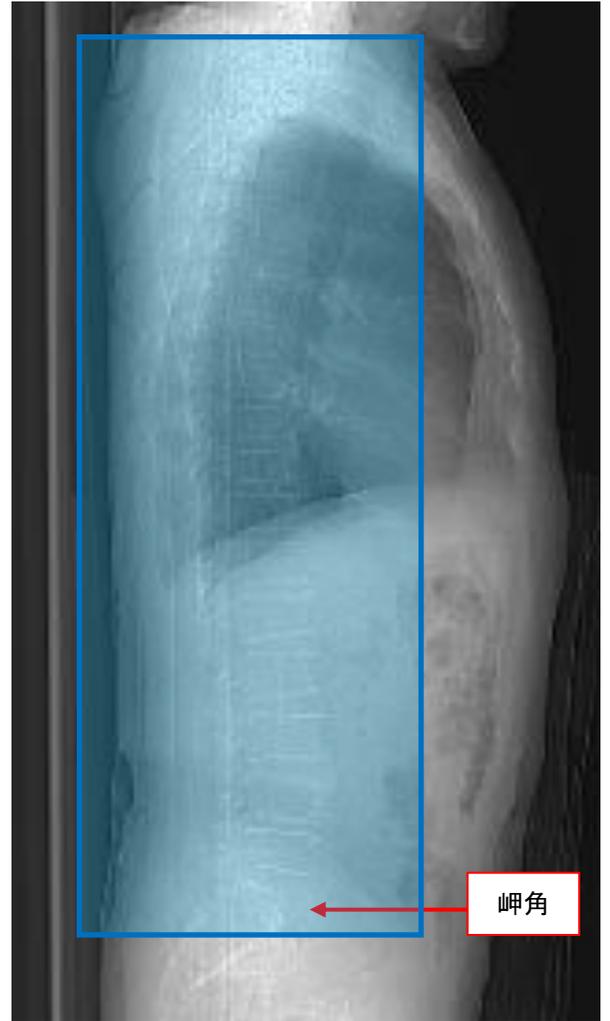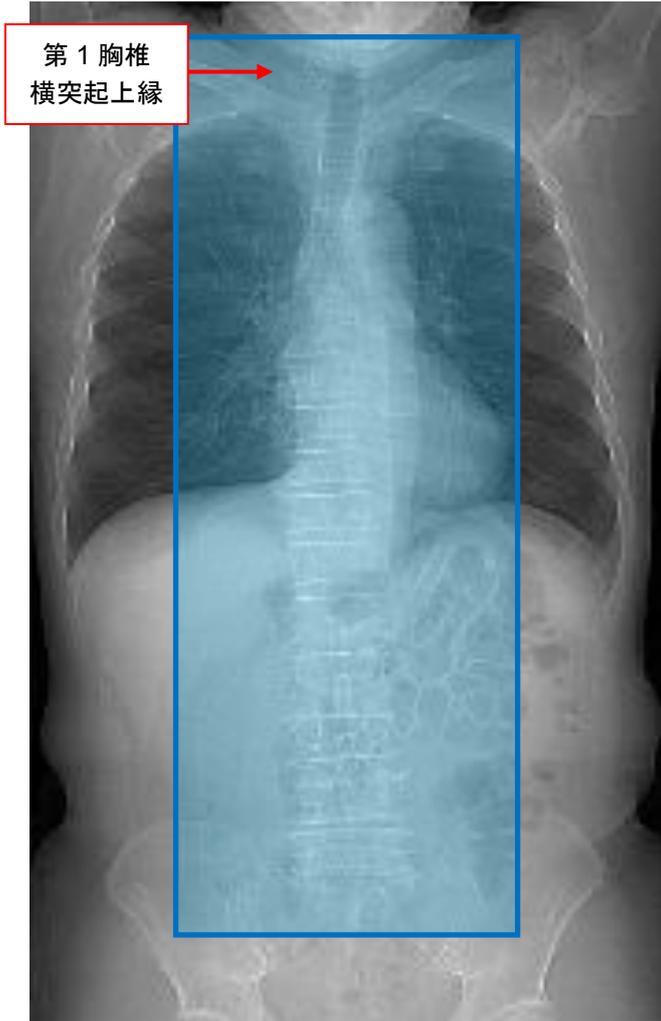

6050 腰仙椎 CT 単純

6051 腰仙椎 CT 造影


範囲) 第 12 胸椎椎体上縁から尾骨下縁まで

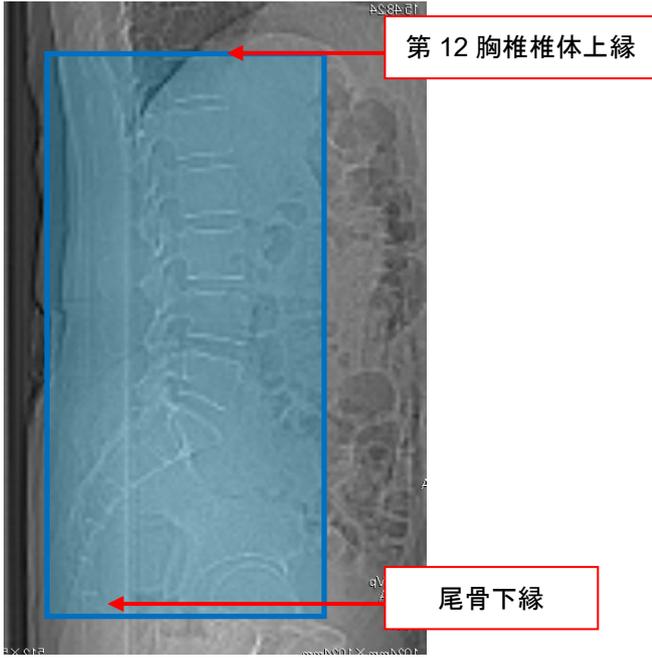

6060 胸腰仙椎 CT 単純

6061 胸腰仙椎 CT 造影


範囲) 第 1 胸椎横突起上縁 2 cm 頭側から尾骨下縁まで

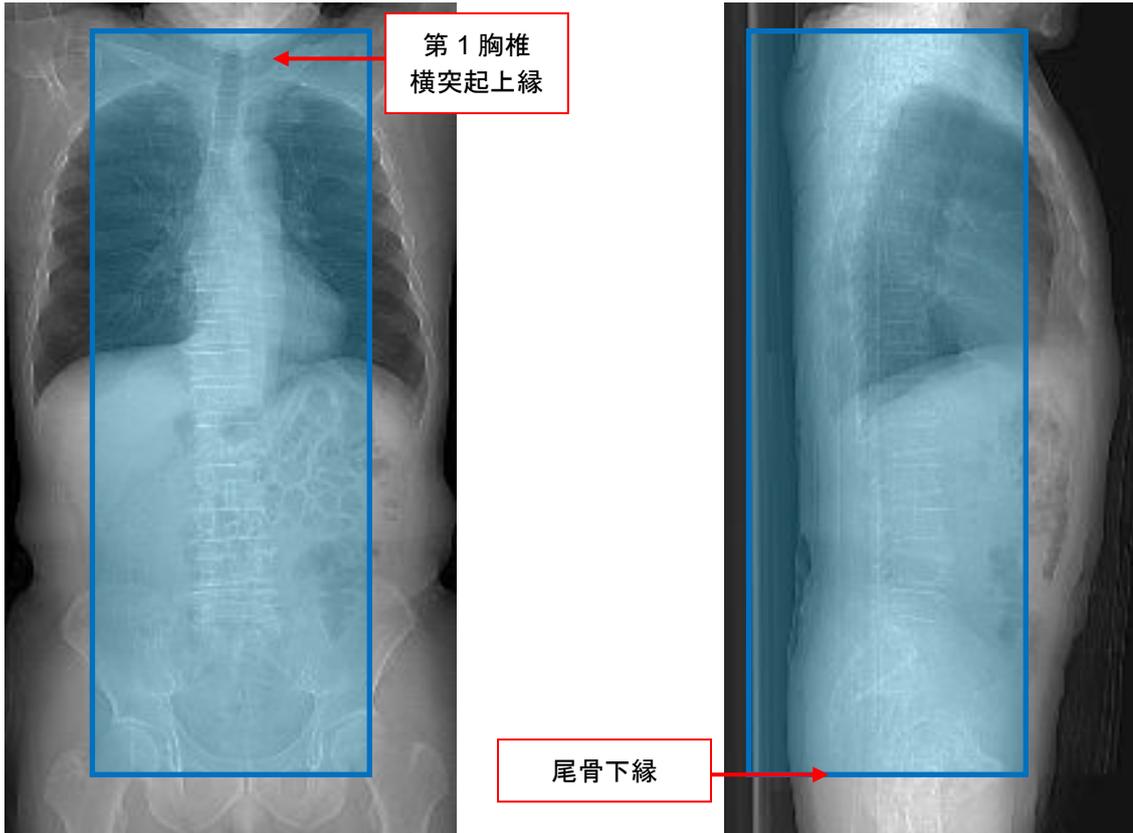

6070 全脊椎 CT 単純

6071 全脊椎 CT 造影

範囲) 大後頭孔後縁 2 cm 頭側から尾骨下縁まで

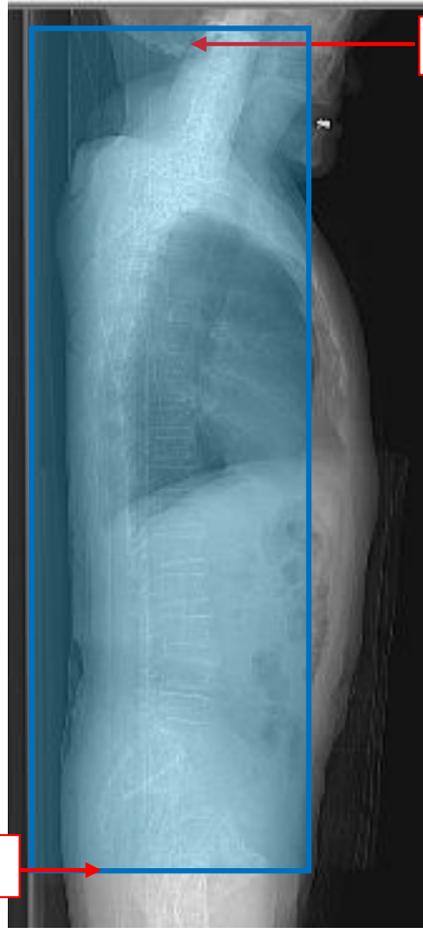


大後頭孔後縁

尾骨下縁

骨軟部


7000 胸郭 CT 単純

範囲) 第 1 胸椎横突起上縁 2 cm 頭側から肋骨下縁 2 cm 尾側まで

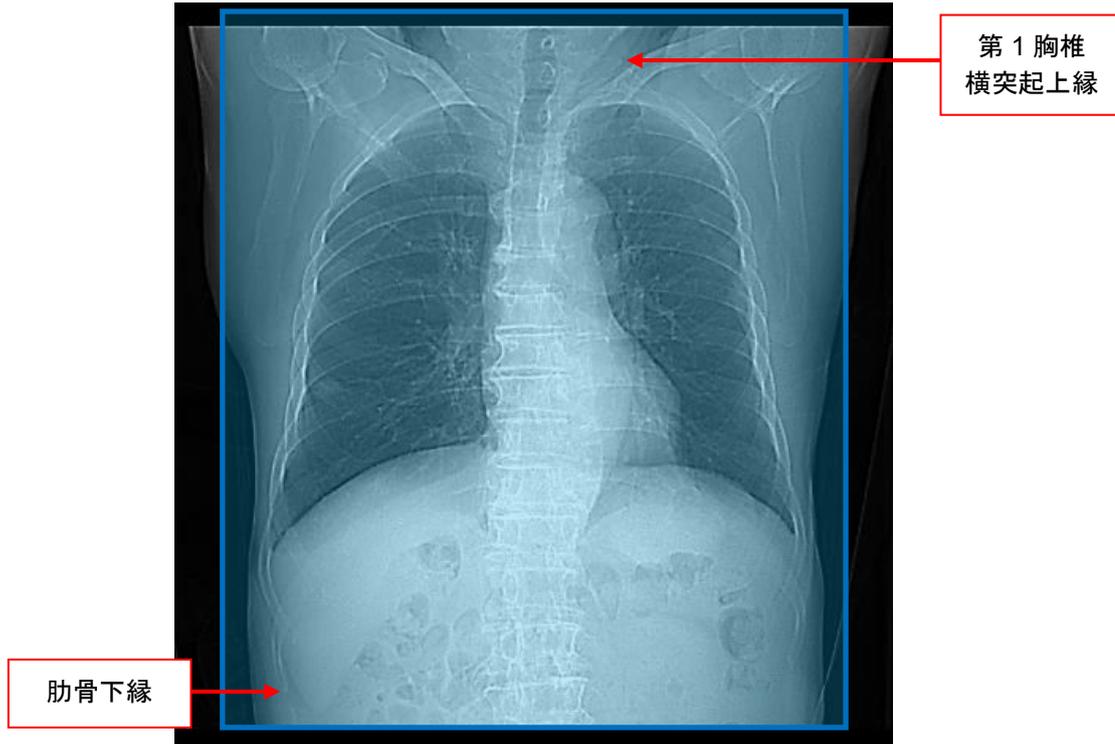


7010 肩関節 CT

範囲) 肩甲骨上縁 2 cm 頭側から肩甲骨関節窩 3 cm 尾側まで

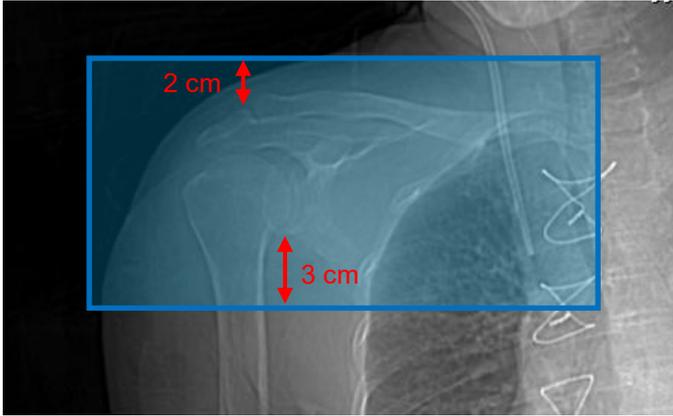


7020 肩甲骨 CT

範囲) 肩甲骨上縁 2 cm 頭側から肩甲骨上縁 18 cm 尾側まで

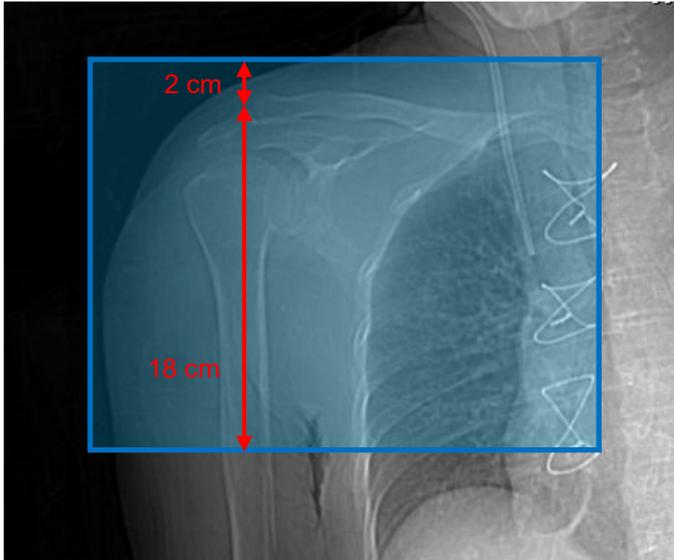

7030 上腕 CT



範囲) 上腕骨頭上縁 2 cm 頭側から橈骨頭 2 cm 遠位まで

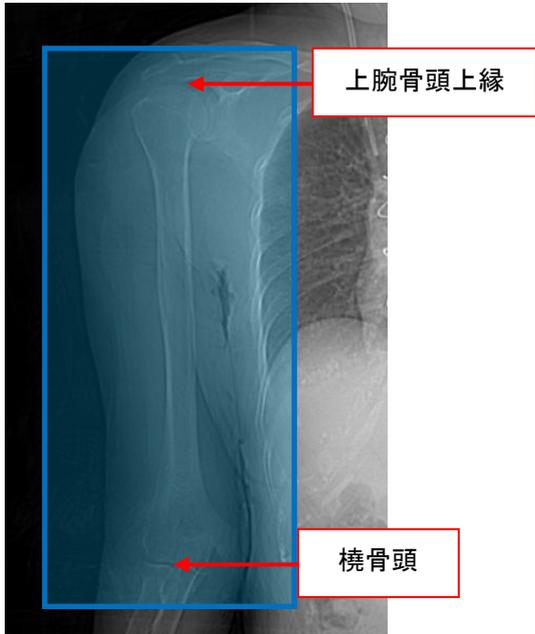

7040 肘関節 CT


範囲) 肘関節は伸展させ、橈骨頭上縁を中心に 15 cm の範囲

* 伸展できない場合は、撮影範囲上縁を肘関節の滑車切痕から近位に 7.5 cm とし、下縁は滑車切痕から前腕遠位 1/2 までとする。

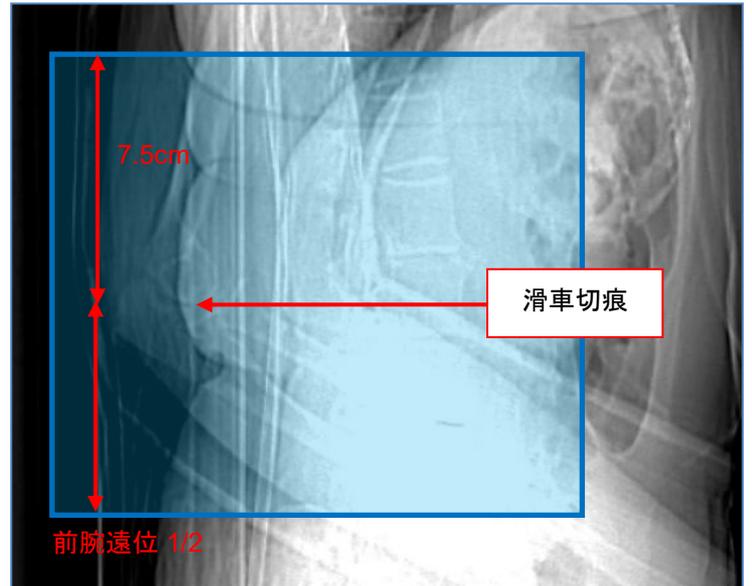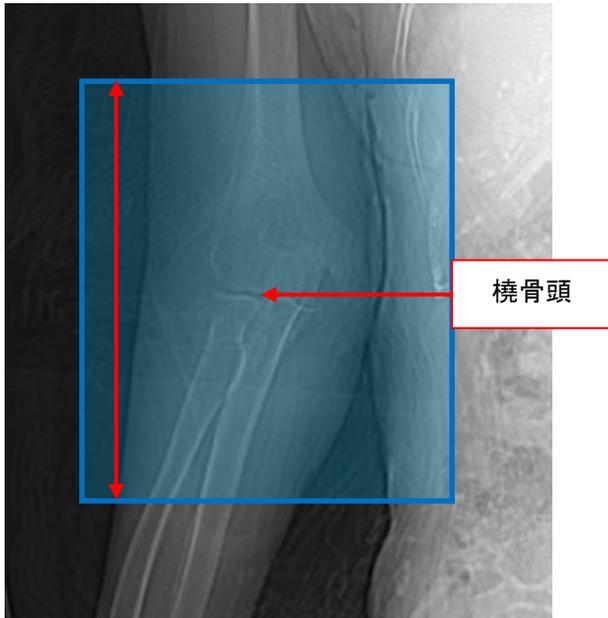


7050 前腕 CT

範囲) 前腕骨上縁 2 cm 近位から前腕骨下縁 2 cm 遠位まで

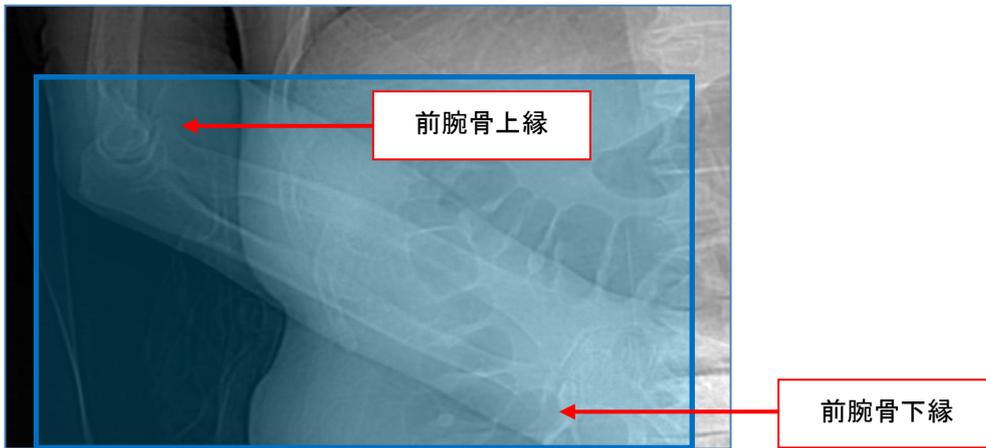

7060 手関節 CT

範囲) 尺骨茎状突起を中心に 15 cm の範囲 * 検側のみ拳上

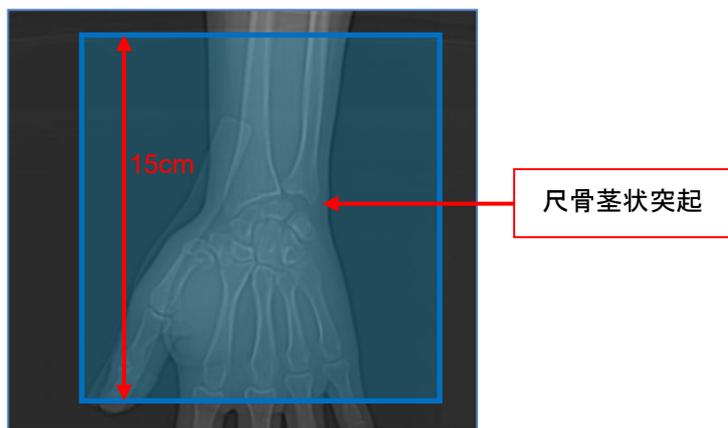

7070 手 CT

範囲) 尺骨茎状突起 2 cm 近位から手指先まで * 検側のみ拳上



尺骨茎状突起


7100 骨盤骨 CT 単純

範囲) 腸骨上縁 2 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで




7110 股関節 CT

範囲) 寛骨臼蓋上縁 5 cm 頭側から小転子下縁 3 cm 遠位まで

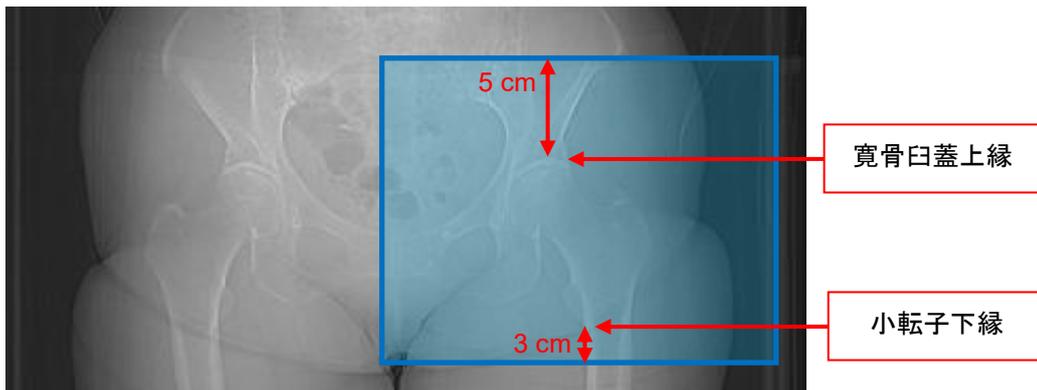


7130 大腿 CT

範囲) 寛骨臼蓋上縁 3 cm 頭側から大腿骨下縁 3 cm 遠位まで

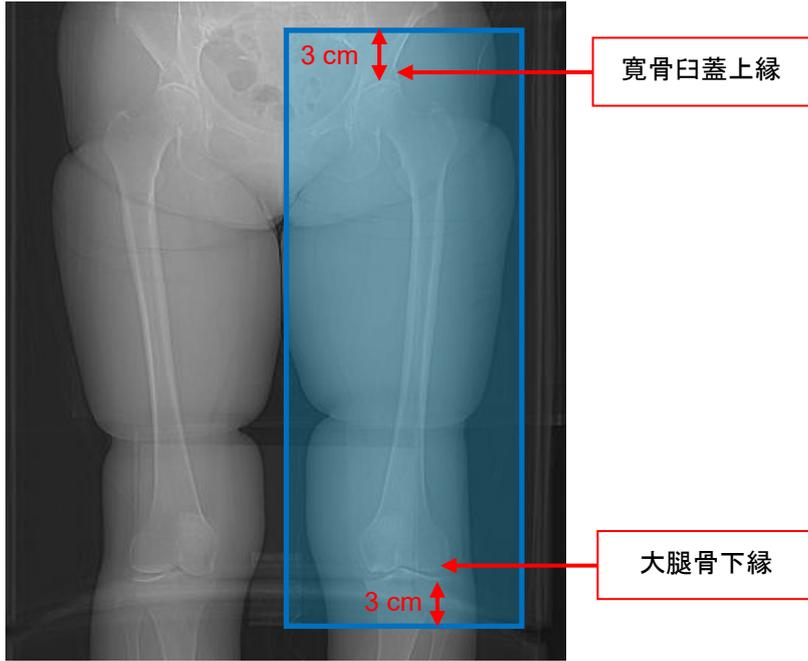


7140 膝関節 CT

範囲) 大腿骨内側顆下縁を中心に 20 cm の範囲

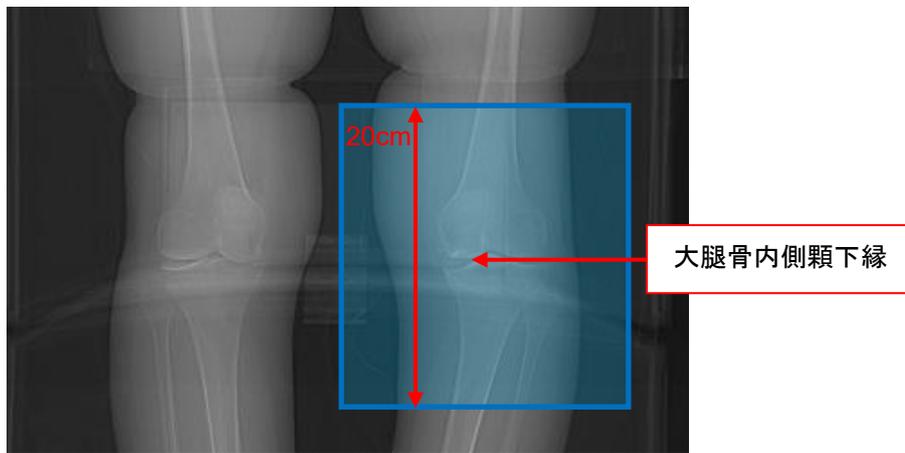


7160 下腿 CT

範囲) 下腿骨上縁 3 cm 近位から下腿骨下縁 2 cm 遠位まで

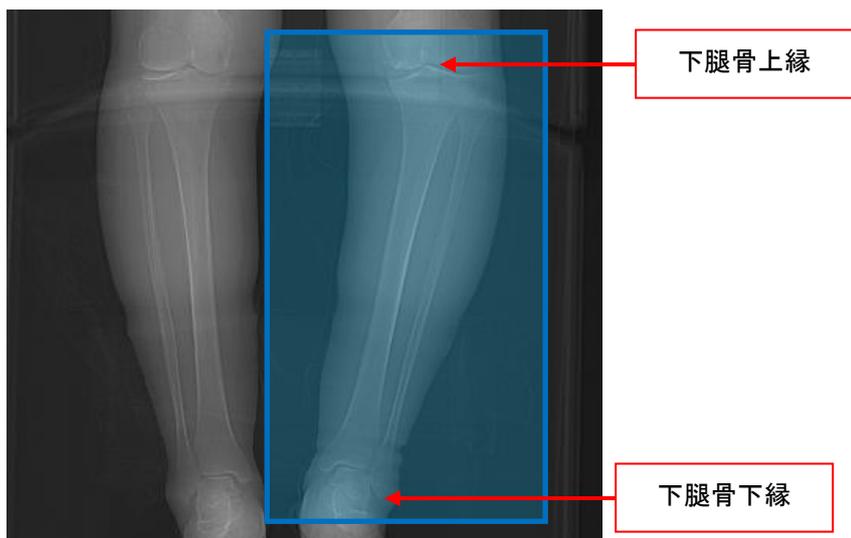

7170 足関節 CT


範囲) 距骨上縁を中心に 15 cm の範囲

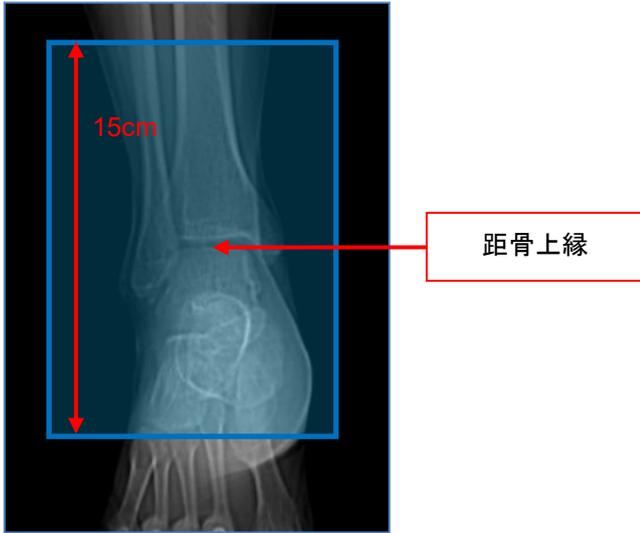

7180 足 CT

範囲) 踵骨隆起から足趾先まで

* 足根骨の精査など、足趾先まで必要がない場合は Pre Check にて明記する。

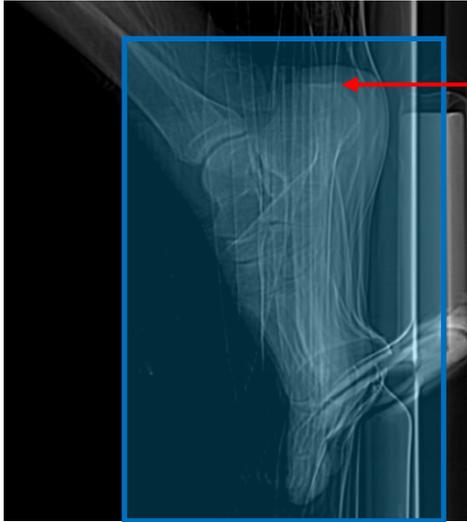

踵骨隆起

小児 頭部

8000 小児頭部 CT 単純 [8001, 8002, 8003, 8004]

範囲) 後頭蓋窩下縁から頭蓋骨内板上縁まで

[1000 参照](#)

8005 小児頭部 CT 造影 [8006, 8007, 8008, 8009]

範囲) 後頭蓋窩下縁から頭蓋骨内板上縁まで

[1001 参照](#)

8010 小児頭部多断面 CT 単純 [8011, 8012, 8013, 8014]

範囲) 後頭蓋窩下縁から頭蓋骨内板上縁まで

* 頭蓋骨の検査(3D 作成など)も兼ねている場合は、頭蓋骨外板まで

[1010 参照](#)

8015 小児頭部多断面 CT 造影 [8016, 8017, 8018, 8019]

範囲) 後頭蓋窩下縁から頭蓋骨内板上縁まで

* 頭蓋骨の検査(3D 作成など)も兼ねている場合は、頭蓋骨外板まで

[1011 参照](#)

8020 小児頭部多断面 CT 単純(脳室サイズ) [8021, 8022, 8023, 8024]

範囲) 後頭蓋窩下縁から頭蓋骨内板上縁まで

基準面) 前頭蓋窩下縁と後頭蓋窩下縁を結んだ線

[1004 参照](#)

小児 頭頸部

8100 小児顔面骨 CT 単純 [8101, 8102, 8103, 8104]

範囲) 下顎骨下縁 1 cm 尾側から眼窩上縁 1 cm 頭側まで

[2000 参照](#)

8110 小児鼻骨 CT 単純 [8111, 8112, 8113, 8114]

範囲) 歯列下縁から眼窩上縁 1 cm 頭側まで

[2010 参照](#)

8120 小児眼窩 CT 単純 [8121, 8122, 8123, 8124]

範囲) 歯列下縁から眼窩上縁 1 cm 頭側まで

[2020 参照](#)

8125 小児眼窩 CT 造影 [8126, 8127, 8128, 8129]

範囲) 歯列下縁から眼窩上縁 1 cm 頭側まで

[2020 参照](#)

8130 小児眼窩 CT 単純+造影 [8131, 8132, 8133, 8134]

範囲) 全相 : 歯列下縁から眼窩上縁 1 cm 頭側まで

[2020 参照](#)

8140 小児副鼻腔 CT 単純 [8141, 8142, 8143, 8144]

範囲) 歯列下縁から前頭洞上縁 1 cm 頭側まで

[2030 参照](#)

8145 小児副鼻腔 CT 造影 [8146, 8147, 8148, 8149]

範囲) 歯列下縁から前頭洞上縁 1 cm 頭側まで

[2030 参照](#)

8150 小児側頭骨 CT 単純 [8151, 8152, 8153, 8154]

範囲) 乳突蜂巣下縁から錐体上縁 1 cm 頭側まで

[2040 参照](#)

8155 小児側頭骨 CT 造影 [8156, 8157, 8158, 8159]

範囲) 乳突蜂巣下縁から錐体上縁 1 cm 頭側まで [2040 参照](#)

8160 小児頸部 CT 単純 [8161, 8162, 8163, 8164]

範囲) 上咽頭上縁から気管分岐部まで

8165 小児頸部 CT 造影 [8166, 8167, 8168, 8169]

範囲) 上咽頭上縁から気管分岐部まで

小児 体幹部

8200 小児頸-胸部 CT 単純 [8201, 8202, 8203, 8204]

範囲) 上咽頭上縁から肺底部まで

8205 小児頸-胸部 CT 造影 [8206, 8207, 8208, 8209]

範囲) 上咽頭上縁から肺底部まで

8300 小児胸部 CT 単純 [8301, 8302, 8303, 8304]

範囲) 肺尖 1 cm 頭側から肺底部まで

* 但し、身長が 120 cm 超える場合は、肺尖 2cm 頭側から肺底部まで

8305 小児胸部 CT 造影 [8306, 8307, 8308, 8309]

範囲) 肺尖 1 cm 頭側から肺底部まで

* 但し、身長が 120 cm 超える場合は、肺尖 2cm 頭側から肺底部まで

8320 小児胸-腹部 CT 単純 [8321, 8322, 8323, 8324]

範囲) 肺尖 1 cm 頭側から腸骨上縁まで

* 但し、身長が 120 cm 超える場合は、肺尖 2cm 頭側から腸骨上縁まで

8325 小児胸-腹部 CT 造影 [8326, 8327, 8328, 8329]

範囲) 肺尖 1 cm 頭側から腸骨上縁まで

* 但し、身長が 120 cm 超える場合は、肺尖 2cm 頭側から腸骨上縁まで

8360 小児胸-骨盤部 CT 単純 [8361, 8362, 8363, 8364]

範囲) 肺尖 1 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで

* 但し、身長が 120 cm 超える場合は、肺尖 2cm 頭側から

8365 小児胸-骨盤部 CT 造影 [8366, 8367, 8368, 8369]

範囲) 肺尖 1 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで

* 但し、身長が 120 cm 超える場合は、肺尖 2cm 頭側から

8400 小児腹部 CT 単純 [8401, 8402, 8403, 8404]

範囲) 肝上縁 2 cm 頭側から腸骨上縁まで

8405 小児腹部 CT 造影 [8406, 8407, 8408, 8409]

範囲) 肝上縁 2 cm 頭側から腸骨上縁まで

8410 小児腹部ダイナミック CT 単純+造影 2 相 [8411, 8412, 8413, 8414]

範囲) 肝上縁 2 cm 頭側から腸骨上縁まで

8430 小児腹部ダイナミック CT 造影 2 相【術前】 [8431, 8432, 8433, 8434]

範囲) 肝上縁 2 cm 頭側から腸骨上縁まで

8500 小児腹-骨盤部 CT 単純 [8501, 8502, 8503, 8504]

範囲) 肝上縁 2 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで

8505 小児腹-骨盤部 CT 造影 [8506, 8507, 8508, 8509]

範囲) 肝上縁 2 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで

8530 小児腹-骨盤部ダイナミック CT 単純+造影 2 相 [8531, 8532, 8533, 8534]

範囲) 肝上縁 2 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで

8600 小児骨盤部 CT 単純 [8601, 8602, 8603, 8604]

範囲) 腸骨上縁 1 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで

8605 小児骨盤部 CT 造影 [8606, 8607, 8608, 8609]

範囲) 腸骨上縁 1 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで

小児 CTA

8700 小児頭部 CTA [8701, 8702, 8703, 8704]

範囲) 後頭蓋窩下縁から頭側 2/3 まで

8710 小児頸部 CTA [8711, 8712, 8713, 8714]

範囲) 気管分岐部から眼窩上縁まで

8720 小児胸部 CTA [8721, 8722, 8723, 8724]

範囲) 肺尖 1 cm 頭側から肺底部まで

* 但し、身長が 120 cm 超える場合は、肺尖 2cm 頭側から肺底部まで

8730 小児腹-骨盤部 CTA [8731, 8732, 8733, 8734]

範囲) 肝上縁 2 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで

8740 小児胸-骨盤部 CTA [8741, 8742, 8743, 8744]

範囲) 肺尖 1 cm 頭側から坐骨下縁 1 cm 尾側まで

* 但し、身長が 120 cm 超える場合は、肺尖 2cm 頭側から

8750 小児上肢 CTA [8751, 8752, 8753, 8754]

範囲) 指定された範囲

* Pre Check で明確に範囲を明記する

8760 小児下肢 CTA [8761, 8762, 8763, 8764]

範囲) 指定された範囲

* Pre Check で明確に範囲を明記する

小児 脊椎・四肢

8800 小児頸椎 CT 単純 [8801, 8802, 8803, 8804]

範囲) 大後頭孔後縁 1 cm 頭側から第 2 肋骨基部下縁まで

* 身長が 120 cm 超える場合は、大後頭孔後縁 2 cm 頭側から第 2 肋骨基部下縁まで

8805 小児頸椎 CT 造影 [8806, 8807, 8808, 8809]

範囲) 大後頭孔後縁 1 cm 頭側から第 2 肋骨基部下縁まで

* 身長が 120 cm 超える場合は、大後頭孔後縁 2 cm 頭側から第 2 肋骨基部下縁まで

8810 小児脊椎 CT 単純 [8811, 8812, 8813, 8814]

* 「小児頸椎 CT 単純」以外に使用

範囲) 指定された範囲

* Pre Check で明確に範囲を明記する

胸椎 [6010 参照](#)

腰椎 [6020 参照](#)

頸-胸椎 [6030 参照](#)

胸-腰椎 [6040 参照](#)

腰-仙椎 [6050 参照](#)

胸-腰-仙椎 [6060 参照](#)

全脊椎 [6070 参照](#)

8815 小児脊椎 CT 造影 [8816, 8817, 8818, 8819]

* 「小児頸椎 CT 造影」以外に使用

範囲) 指定された範囲

* Pre Check で明確に範囲を明記する

胸椎 [6010 参照](#)

腰椎 [6020 参照](#)

頸-胸椎 [6030 参照](#)

胸-腰椎 [6040 参照](#)

腰-仙椎 [6050 参照](#)

胸-腰-仙椎 [6060 参照](#)

全脊椎 [6070 参照](#)

8830 小児胸郭 CT 単純 [8831, 8832, 8833, 8834]

範囲) 第 1 胸椎横突起上縁 1 cm 頭側から肋骨下縁 1 cm 尾側まで (* 位置決め資料参照)

* 身長が 120 cm 超える場合は、それぞれ 2 cm 頭側および 2 cm 尾側までに変更

8840 小児上肢 CT [8841, 8842, 8843, 8844]

範囲) 指定された範囲

* Pre Check で明確に範囲を明記する

肩関節	7010 参照
肩甲骨	7020 参照
上腕	7030 参照
肘関節	7040 参照
前腕	7050 参照
手関節	7060 参照
手	7070 参照

8870 小児下肢 CT [8871, 8872, 8873, 8874]

範囲) 指定された範囲

* Pre Check で明確に範囲を明記する

骨盤骨	7100 参照
股関節	7110 参照
股関節術前	7120 参照
大腿骨	7130 参照
膝関節	7140 参照
膝関節術前・術後	7150 参照
下腿骨	7160 参照
足関節	7170 参照
足	7180 参照